

GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JANUAR BIS JUNI 2025

PRAXIS



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Small changes, big smiles

Minimalinvasive Restaurationen mit maximaler ästhetischer Wirkung

Lächeln macht glücklich und Lachen gesund. Doch zahlreiche Menschen sind mit ihrem Lächeln unzufrieden. Das hat oft erhebliche psychosoziale Folgen. Viele von ihnen wünschen sich eine kosmetische Zahnbehandlung, schrecken aber vor hohen Kosten, möglichen Schmerzen

und der Behandlungsdauer zurück. Dabei könnte man bei einem Grossteil schon mit kleinen Veränderungen an den Zähnen die Ästhetik des Lächelns deutlich verbessern, wie der nachstehend beschriebene Workflow zeigt.

1. Identifizieren: Welche Patienten kommen in Frage?

Das Komposit-Bonding lässt den natürlichen Zahn weitgehend intakt, ist kostengünstig und liefert sofortige Ergebnisse bei minimaler Belastung. Als Behandler sollte man sich jedoch nicht nur auf die Ästhetik konzentrieren, sondern auch nach den Ursachen des Problems forschen und ganzheitlich vorgehen.

3. Behandeln: Minimalinvasives Vorgehen

Diastemaverschluss

- Harmonisches, symmetrisches Lächeln
- Stabilisierung der Zahnpositionen



Die Patientin hatte das Gefühl, dass das Diastema die Ebenmässigkeit ihres Lächelns störte.



G-aenial A'CHORD ist angenehm zu formen und zu modellieren.



Zähne mit natürlichem Lichtspiel
Mit freundlicher Genehmigung von Assoc. Prof. Dr. Z. B. Kütük (Türkei)

Verschluss von schwarzen Dreiecken

- Jugendlicheres Erscheinungsbild
- Impaktion von Speiseresten wird vermieden



Bei diesem Patienten mit hoher Lachlinie sind die schwarzen Dreiecke sehr deutlich zu erkennen.



G-aenial Universal Injectable lässt sich kontrolliert in enge Zwischenräume einbringen.



Nahtlose und glatte Restaurationen für eine gesunde Gingiva
Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. B. Korkut (Türkei)

Restauration von Abrasionen

- Ästhetische Verbesserung der Form
- Verbesserte Stabilität der Okklusion und wiederhergestellt Eckzahnführung



Die Abrasion und die Form der seitlichen Schneidezähne tragen zu einem eher eigenwilligen Lächeln bei.



Die adaptive Lichtreflexion von G-aenial A'CHORD verbessert die Integration und vereinfacht die Farbauswahl.



Nahtloser Übergang und exzellente Integration der Restaurationen
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. O. Bushati (Albanien)

Restauration von Frakturen

- Ästhetische Verbesserung der Form
- Verhindert Hypersensibilität und verringert die Plaque-Retention an der Schmelz-Zement-Grenze



Unbehandelt können Frakturen zu Hypersensibilität, Plaqueansammlungen und Karies führen.



Die glatte Oberfläche von G-aenial A'CHORD sorgt für eine gesunde Gingiva.



Glänzende, unauffällige Restaurationen
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. R. Zunzarren (Frankreich)

Unsere Adhäsiv-Empfehlung



G-Premio BOND

- ✓ Klinisch erprobte Leistung
- ✓ Dünne Bondingschicht; die gelbe Farbe verschwindet nach der Lichthärtung
- ✓ Universeller Workflow, kompatibel mit allen Ätzverfahren



4. Erhalten

Regelmässige Kontrolluntersuchungen und gegebenenfalls Nachpolieren werden empfohlen. Die Mundhygiene sollte wie gewohnt mit nicht-abradierenden Produkten durchgeführt werden. GC MI Paste Plus liefert das Fluorid und die Mineralstoffe, die für ein gutes Gleichgewicht im Mundhöhlenmilieu notwendig sind.

Unsere MI-Empfehlung

GC MI Paste Plus




Unsere Komposit-Empfehlung



G-aenial A'CHORD

- ✓ Angenehme Konsistenz, angepasst an den Einsatz
- ✓ Vereinfachte Farbauswahl durch hervorragendes Verschmelzen mit der umgebenden Zahnschubstanz
- ✓ Schnell poliert für dauerhaften Glanz
- ✓ Naturgetreue Fluoreszenz sorgt für eine adaptierte Zahnfarbe - unter allen Bedingungen

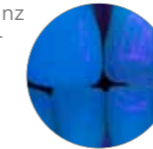

G-aenial Universal Injectable

- ✓ Aussergewöhnliche Härte und Abriebfestigkeit
- ✓ Drei Schritte in einem: Formen und Konturieren direkt bei der Injektion
- ✓ Leicht auf dauerhaften Hochglanz zu polieren
- ✓ Kontrolliertes Injizieren: Besonders geeignet für die Versorgung kleinerer Defekte in Bereichen mit hoher Belastung



G-Premio BOND
Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv



G-aenial A'CHORD
Hochentwickeltes Universal-Komposit mit der Einfachheit des Unishade-Systems



G-aenial Universal Injectable
Hochfestes Universal-Komposit



DiaPolisher Paste
Diamantpolierpaste



EPITEX
Ausarbeitungs- und Polierstreifen



D-Light Pro
LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge



Composite Modeling Kit
Kit zum Modellieren von Kompositrestaurationen



GC MI Paste Plus
Bioverfügbares Kalzium und Phosphat mit Fluorid



Formveränderung an einem seitlichen Schneidezahn mit G-aenial A'CHORD
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giancarlo Pongione (Italien) Courtesy: Dr. Giancarlo Pongione, Italy



Restauration der Inzisalkanten mit einem einzigen Farbton von G-aenial A'CHORD
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Urszula Witek-Furman (Polen)



Wiederaufbau abradierter Inzisalkanten und Schliessen von Diastemata mit G-aenial A'CHORD
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Aleksandra Ślaczan (Polen)



Formveränderung und Diastemaverschluss mit G-aenial A'CHORD
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Andres Silva (Spanien)





G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für alle Bonding Techniken und ideal für Reparaturen und als Desensitizer einsetzbar!



DIE ERFOLGREICHEN 2!

Unsere starken und kompetenten Adhäsivsysteme für all Ihre täglichen restaurativen Aufgabestellungen

Fragen Sie zusätzlich Ihren GC Fachberater nach weiteren Informationen!



G2-BOND Universal

Der neue Standard der 2-Flaschen-Universal-Bondings - wegweisend für einen neuen Standard in Ihren Händen



G-PREMIO BOND 3ER-PACKUNG

Kaufe 1 x G-Premio BOND 3-Bottle Packung und erhalte zusätzlich 1 x G-ænial A'CHORD Spritze oder Unitipspackung gratis!

G-ÆNIAL ACHORD SPRITZE ODER UNITIPS GRATIS

Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-PREMIO BOND PACKUNG
G-ÆNIAL UNIVERSAL INJECTABLE GRATIS

Kaufe 1 x G-Premio BOND (gültig für alle erhältlichen G-Premio BOND Packungen) und erhalte zusätzlich 2 x G-ænial Universal Injectable Spritzen oder Unitipspackungen gratis!

Gültig für alle G-Premio BOND Verpackungseinheiten und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Farbmix möglich.

G-PREMIO BOND BOTTLE
109,40 CHF

Art.-Nr. 10001461
G-Premio BOND Bottle
1 Flasche à 5 ml,
109,40 CHF pro Packung

PREISVORTEIL
10% **251,91 CHF**
~~279,90 CHF~~

Art.-Nr. 10001458
G-Premio BOND 3-Bottle-Packung
3 Flaschen à 5 ml; 251,91 CHF pro Packung

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Komposit, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperative Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

G2-BOND Universal mit seiner patentierten Dual-H-Technologie, die für fortschrittlich optimierten Haftverbund sowohl am Zahn als auch am Komposit sorgt, ist ein vielseitig einsetzbares 2-Flaschen-Universal-System, das die zahnärztlichen Anforderungen in Hinblick auf die existierenden Goldstandards für Selbstätzung (SE) und Etch-and-Rinse (ER) erfüllt und darüber hinaus folgendes bietet:

- Auswahl des bevorzugten Ätzverfahrens
- Hervorragende Haltbarkeit und erstklassiger Haftverbund
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Randverfärbungen
- Hervorragende Dosierung und geringe Techniksensibilität
- Multiindikativ¹
- Modernes, intelligentes und ergonomisches Design: 1-PRIMER/2-BOND



Optimal geeignet für die IDS-Technik (IMMEDIATE DENTIN SEALING Technik)!

Für eine rundum Zufriedenheit und den Komfort Ihrer Patienten!

JETZT EINSTEIGEN
170,60 CHF

Art.-Nr. 10006819
G2-BOND Universal Flasche Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml, Zubehör;
170,60 CHF pro Flaschen Kit

Ein neuer 2-Flaschen-Bonding-Standard für alle Ätzverfahren

FLIP-TOP VERSCHLUSSKAPPE
300 Applikationen pro 5 ml Flasche
Geniessen Sie die gewohnte Performance und entdecken Sie gleichzeitig ein einfaches Handling

- 4-MET
- MDP
- MDTP

Gesamtleistung einer einzigartigen Zusammensetzung

- 4-MET für zuverlässige Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin
- MDP für ausgezeichnete Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Nichtedelmetallen
- MDTP zur Adhäsion an Edelmetallen
- HEMA-freies Bonding-System für klinisch nachgewiesene, herausragende Haltbarkeit?²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.



Verkleinerter Kontaktpunkt zwischen Schützhülle und Flasche

Lamelle für effektives Drücken der Flasche

Als weitere Option:



G-Premio BOND DCA = Dual-cure Aktivator

Weitere erhältliche Verpackungseinheiten:

- Art.-Nr. 10001242
G-Premio BOND Unitdose
50 Stück à 0,1 ml, Zubehör; 137,60 CHF
- Art.-Nr. 10001457
G-Premio BOND Kit
1 Flasche 5 ml, Zubehör; 138,80 CHF
- Art.-Nr. 10001349
G-Premio BOND DCA
1 Flasche 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 57,10 CHF

¹ Indikationen: Direkte Komposite | Intraorale Reparatur | Sofortige Dentinversiegelung (IDS) | Behandlung von Hypersensibilitäten | Behandlung freiliegender Wurzeloberflächen | Befestigung indirekter Restaurationen (mit G-CEM LinkForce) | Stiftbefestigung & Stumpfaufbau (mit GRADIA CORE & GPB DCA).

Weitere Verpackungseinheiten: Nachfüllpackungen
Art.-Nr. 10006821 **G2-BOND Universal 1-PRIMER Refill**
1 x Flasche 5 ml; 125,00 CHF
Art.-Nr. 10006822 **G2-BOND Universal 2-BOND Refill**
1 x Flasche 5 ml; 52,80 CHF

Verpassen Sie nicht unsere Komposit-Workshops mit unseren Top-Referenten!
Weitere Informationen ab Seite 25.

Hier gehts zur G-æniäl A'CHORD Webpage
<http://gaenialachord.com>



Hier geht's zu den Videos

G-æniäl™ A'CHORD

Lichthärtendes Universalkomposit-Füllungsmaterial
Einfachheit, Ästhetik und Funktionalität in Ihren Händen



A'CHORD revolutionäre Technologie


- Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität und Verschleissfestigkeit
- Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit

A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal

A'CHORD Ästhetik

- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen

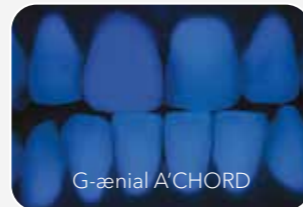

© Dr. J. Tapia Guadix, Spanien



Vor Politur | Nach Politur



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB
64,20
CHF

Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl A'CHORD zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl A'CHORD zum Preis von 10!

Farbmix möglich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.



PREISVORTEIL

BUNDLEPACK SPRITZEN
G-æniäl A'CHORD + G-Premio BOND

~~366,20 CHF~~ 329,- CHF

Art.-Nr. 10006916

G-æniäl A'CHORD Syringe + G-Premio BOND Bundlepack

Inhalt: 2 x A2 + 2 x A3 in G-æniäl A'CHORD Spritzen + 1 x 5 ml Flasche G-Premio BOND 329,- CHF (Preis pro Bundlepack)

PREISVORTEIL


BUNDLEPACK UNITIPS
G-æniäl A'CHORD + G-Premio BOND

~~384,60 CHF~~ 346,- CHF

Art.-Nr. 10006917

G-æniäl A'CHORD Unitip + G-Premio BOND Bundlepack

Inhalt: 2 x A2 + 2 x A3 in G-æniäl A'CHORD Unitips (15 Stk.) + 1 x 5 ml Flasche G-Premio BOND 346,- CHF (Preis pro Bundlepack)

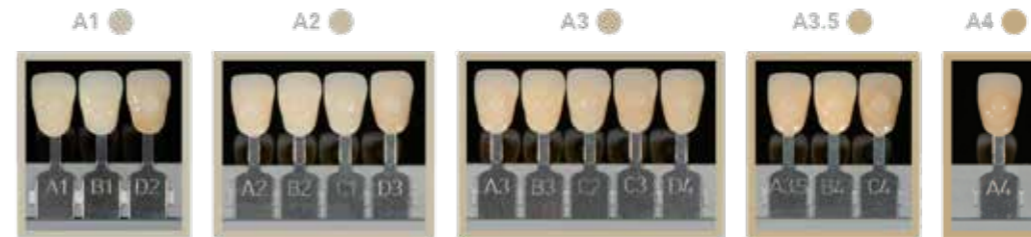

SPRITZEN

Art.-Nr. 10006767

G-æniäl A'CHORD Layering Kit

1 Spritze / Farbe: A2; A3; AO2; AE; JE (à 2,1 ml/4g); 288,40 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006768

G-æniäl A'CHORD Core Kit

1 Spritze / Farbe: A1; A2; A3; A3,5; A4 (à 2,1 ml/4g); 288,40 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006769 **Trial Kit A**

3 Spritzen, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4g) 173,90 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006771

G-æniäl A'CHORD Bleach Kit

1 Spritze/Farbe: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4g) 173,90 CHF (Preis pro Packung)
G-æniäl A'CHORD Bleach KIT nur in Spritzenform erhältlich. Bleachfarben für Unitips als Refill verfügbar.

Spritzen Refill

à 2,1 ml /4 g: A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); 64,20 CHF (Preis pro Packung)

UNITIPS

Art.-Nr. 10006772

G-æniäl A'CHORD Layering Kit Unitips

15 Unitips / Farbe: A2, A3, AO2, AE, JE (à 15 x 0,16 ml); 309,40 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006773

G-æniäl A'CHORD Core Kit Unitips

15 Unitips / Farbe: A1, A2, A3, A3,5, A4 (à 15 x 0,16 ml); 309,40 CHF (Preis pro Packung)

Unitips Refill

à 15x 0,16 ml: A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, A6; AO1, O1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach); 68,80 CHF (Preis pro Packung)

DIAPOLISHER PASTE Diamantpolierpaste



51,80 CHF

Art.-Nr. 10000892
DIAPOLISHER PASTE

Inhalt: DIAPOLISHER PASTE Spritze 2 g, 1 x Dispensing Tip (needle type) & 1 x Protective cover; 51,80 CHF pro Packung

Der Leitfaden „Restaurative Lösungen“ von GC

Der Leitfaden bietet Ihnen 3D-Darstellungen aller Kavitätenarten und zeigt deren Wiederherstellung mit GCs fortschrittlichen Gasionomeren, Glas-Hybriden und/oder Restaurationskomposit.



Mehr Informationen finden Sie in unserem Restaurations-Leitfaden oder in der App!



G-ænia Universal Injectable

Hochfestes Füllungskomposit

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise

Das innovative Design sorgt für einfache Handhabung und Formstabilität. Durch mühelose Materialausgabe und der einfachen Darreichung macht es Freude unsere Spritzen und Unitips in Verwendung zu haben.



- Ultra-feine Bariumfüller (150µm)
- Hoher Fülleranteil
- Full-coverage Silane Coating (FSC) Technologie verbessert: das Ausbringen & den Verbund der Füller in der Matrix
- Geringer Auspressdruck
- Klebt nicht
- Hohe Röntgensichtbarkeit

PREISVORTEIL

4 + 1	AB
10 + 3	43,-
	CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-ænia Universal Injectable zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-ænia Universal Injectable zum Preis von 10!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Hier geht's zu den Videos



PREISVORTEIL

BUNDLEPACK G-ænia Universal Injectable + G-Premio BOND

~~238,40 CHF~~ **205,- CHF**



Art.-Nr. 10003741
G-ænia Universal Injectable + G-Premio BOND Bundlepack
Inhalt: G-ænia Universal Injectable je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml), 1 x A3 (1 ml), G-Premio BOND 5 ml Flasche, Zubehör 205,- CHF (Preis pro Bundlepack)



Aussergewöhnliche Stärke und Verschleissfestigkeit

Injizieren, Formen und Konturieren zugleich

3 in 1 Formen und Konturieren während der Injektion

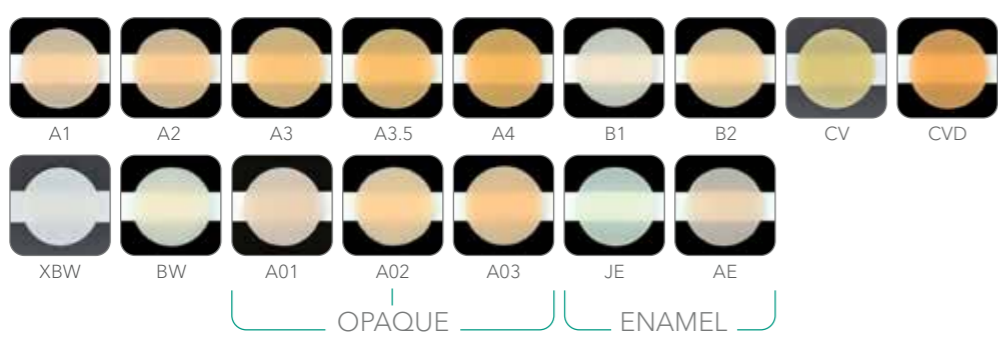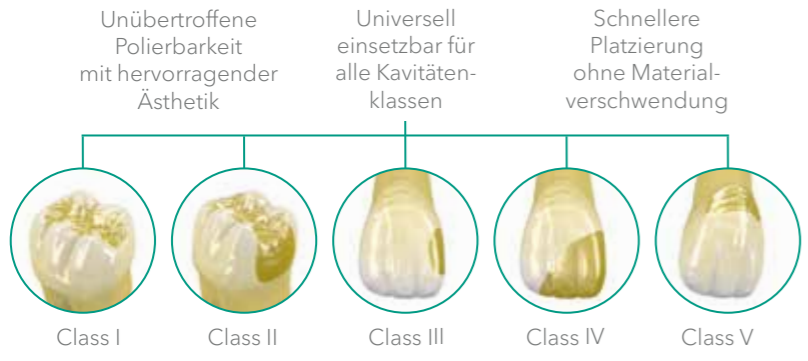

G-ænia Universal Injectable Spritze 1 ml (1,7 g); 43,00 CHF pro Packung

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. 10003705 A1 | Art.-Nr. 10003714 AO1 | Art.-Nr. 10003712 CV |
| Art.-Nr. 10003706 A2 | Art.-Nr. 10003715 AO2 | Art.-Nr. 10003713 CVD |
| Art.-Nr. 10003707 A3 | Art.-Nr. 10003716 AO3 | Art.-Nr. 10003717 JE |
| Art.-Nr. 10003708 A3.5 | Art.-Nr. 10003710 B1 | Art.-Nr. 10003703 XBW |
| Art.-Nr. 10003709 A4 | Art.-Nr. 10003711 B2 | |
| Art.-Nr. 10003718 AE | Art.-Nr. 10003704 BW | |

G-ænia Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 64,80 CHF pro Packung

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr. 10006896 A1 | Art.-Nr. 10006905 AO1 | Art.-Nr. 10006903 CV |
| Art.-Nr. 10006897 A2 | Art.-Nr. 10006906 AO2 | Art.-Nr. 10006904 CVD |
| Art.-Nr. 10006898 A3 | Art.-Nr. 10006907 AO3 | Art.-Nr. 10006908 JE |
| Art.-Nr. 10006899 A3.5 | Art.-Nr. 10006901 B1 | Art.-Nr. 10006910 XBW |
| Art.-Nr. 10006900 A4 | Art.-Nr. 10006902 B2 | |
| Art.-Nr. 10006909 AE | Art.-Nr. 10006911 BW | |

D-Light® Pro

LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, autoklavierbar & Detection Mode



Aushärten

- HP Modus (High Power) 1400 mW/cm²
- Blaue LED (Wellenlänge: 460 - 465 nm)
- Violette LED (Wellenlänge: 400 - 405 nm)
- Effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Licht-Initiatoren

Schützen

- LP Modus (Low Power) mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm² z.B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an der Pulpa liegt

Erkennen

- DT Modus (Detection Mode) verwendet ausschliesslich UV-nahes Licht
- Visualisierung von Plaque
- Visualisierung von infiziertem Dentin
- Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten
- Bewertung von Bakterienaktivität z.B. in den Fissuren
- Visualisierung von fluoreszierenden Materialien
- Bewertung der Risttiefe

GC PRODUKT AKTION

D-LIGHT PRO GRATIS

Kaufe GC-Produkte (G-ænia, Essentia, EverX Flow, CERASMART270 oder EQUIA Forte HT) im Wert von 2900,- CHF und erhalte die D-Light Pro gratis!

Produktmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Autoklavieren

Hochstabiler Lichtleiter

Gesteigerte Akkuleistung



AKTIONSPREIS

999,- CHF ~~1418,- CHF~~

Art.-Nr. 70000008 **D-Light Pro**
Inhalt: Handstückhülle und Elektronikmodul, Lichtleiter 8 mm; Akkus (2 Stk.), Ladestation, Netzteil, EU-/UK-Adapter, Lichtschuttschild, weicher Augenschutz (3 Stk.)



Das Unsichtbare sehen



GC MI Paste Plus™ & GC Tooth Mousse™

Remineralisierende zuckerfreie Zahnschutzcreme mit RECALDENT™ CPP-ACP
Dreifachwirkung: Stärken, Schützen, Regenerieren.



Tooth Mousse oder MI Paste Plus?

Tooth Mousse und MI Paste Plus können für dieselben Indikationen verwendet werden. Tooth Mousse wird bei Kindern unter 6 Jahren empfohlen, um das Fluoroserisiko zu vermeiden. Ausserdem eignet sich das Produkt für Fälle, in denen keine Fluorid-Ergänzung erforderlich oder erwünscht ist. Für die Anwendung über Nacht wird Tooth Mousse bis zum Alter von 12 Jahren empfohlen. MI Paste Plus kann ab diesem Alter verwendet werden.

PREISVORTEIL
4 + 1 199,90 CHF

Kaufe 4 x 10er Packung Tooth Mousse (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung Tooth Mousse (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.
Nur gültig bei entsprechender Abnahme der 10er Packungen von Tooth Mousse.

Verpackungseinheiten:

GC Tooth Mousse 10-Packung
199,90 CHF pro Packung

- Art-Nr. 10001743
GC Tooth Mousse, sortiert
(je Geschmacksrichtung 2 Tuben)
Art-Nr. 10001746
GC Tooth Mousse, Melone
Art-Nr. 10001747
GC Tooth Mousse, Minze
Art-Nr. 10001745
GC Tooth Mousse, Erdbeere
Art-Nr. 10001748
GC Tooth Mousse, Tutti-Frutti
Art-Nr. 10001744
GC Tooth Mousse, Vanille

Art-Nr. 10003205
GC Tooth Mousse, Promotional 5-Packung
(je Geschmacksrichtung 1 Tube)
108,60 CHF pro Packung



PREISVORTEIL
4 + 1 223,50 CHF

Kaufe 4 x 10er Packung MI Paste Plus (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) und erhalte 1 x 10er Packung MI Paste Plus (Einzelgeschmacksrichtung oder sortiert) gratis!

Flavour-Mix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.
Nur gültig bei entsprechender Abnahme der 10er Packungen von MI Paste Plus.

Verpackungseinheiten:

GC MI Paste 10-Packung
223,50 CHF pro Packung

- Art-Nr. 10001749
GC MI Paste Plus, sortiert
(je Geschmacksrichtung 2 Tuben)
Art-Nr. 10001752
GC MI Paste Plus, Melone
Art-Nr. 10001750
GC MI Paste Plus, Minze
Art-Nr. 10001751
GC MI Paste Plus, Erdbeere
Art-Nr. 10001754
GC MI Paste Plus, Tutti Frutti
Art-Nr. 10001753
GC MI Paste Plus, Vanille

Art-Nr. 10003270
GC MI Paste Plus, Promotional 5-Packung
(je Geschmacksrichtung 1 Tube)
117,50 CHF pro Packung



MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff RECALDENT™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz
- MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid

RECALDENT und das RECALDENT-Logo sind Marken der Mondelez international group und werden unter Lizenz verwendet. RECALDENT™ wird aus Milchkeisein gewonnen. Nicht bei Personen mit einer Milchallergie anwenden. Im Falle einer allergischen Reaktion: Anwendung abbrechen, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

PREISVORTEIL
PROMOPACKUNG
5 + 1 108,60 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003210 **Tooth Mousse Bundlepack**
Inhalt: 5 Tuben Tooth Mousse (je Geschmacksrichtung 1 Tube Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere) + 1 Tube Tooth Mousse gratis!
Gratisware ist im Bundlepack bereits inkludiert.

Nur gültig für Tooth Mousse Promopackung



PREISVORTEIL
PROMOPACKUNG
5 + 1 117,50 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003271 **MI Paste Plus Bundlepack**
Inhalt: 5 Tuben MI Paste Plus (je Geschmacksrichtung 1 Tube Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere) + 1 Tube MI Paste Plus gratis!
Gratisware ist im Bundlepack bereits inkludiert.

Nur gültig für MI Paste Plus Promopackung



1 von 7 Kindern leidet an Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation. GC hat Lösungsansätze zur Behandlung von MIH.



Mehr zu MIH

Weitere Informationen, das klinische Erscheinungsbild, die Symptome und den GC-Behandlungsplan finden Sie hier:



EPITEX

Kunststoff-Finier- und Polierstreifen

Leichtes Finieren und Polieren von interdentalen Räumen, geeignet für Glasionomer- und Kompositfüllungen.

- Für sehr geringe interproximale Abstände geeignet
- Praktischer Streifenspender
- Auch als Matrizenband erhältlich
- Sehr langlebig
- Schleifpartikel mit dem Trägermaterial verschweisst
- Extrem dünn und flexibel, besonders reissfest
- Vier Körnungen

PREISVORTEIL
5 + 1 43,60 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 6 Packungen EPITEX zum Preis von 5!

Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



PREISVORTEIL
20% 172,96 CHF
~~216,20 CHF~~

Art.-Nr. 10000117 **EPITEX Starter Kit**;
172,96 CHF anstatt 216,20 CHF pro Packung

Inhalt: Ständer mit Spender für alle erhältlichen Körnungen je 10 m (grob-blau, mittel-grün, fein-grau, X-fein-rot)

Einzelpackungen (Inhalt: 10 m); 43,60 CHF
Art.-Nr. 10000122 **EPITEX Refill, Translucent Matrix**
Art.-Nr. 10000118 **EPITEX Refill, Coarse (grob-blau)**
Art.-Nr. 10000120 **EPITEX Refill, Medium (mittel-grün)**
Art.-Nr. 10000119 **EPITEX Refill, Fine (fein-grau)**
Art.-Nr. 10000121 **EPITEX Refill, X-Fine (x-rein-rosa)**



G-æniäl

Das Allroundkomposit für unsichtbare Restaurationen - mit altersspezifischem Farbauswahlssystem



- G-æniäl Anterior überzeugt durch
- Seine Ästhetik & Röntgensichtbarkeit
 - Seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit
 - Auf das Alter abgestimmtes Farbsystem
 - Mühelose Verarbeitung

- G-æniäl Posterior überzeugt durch
- Ein angepasstes Farbsystem
 - Sehr gute Röntgensichtbarkeit
 - Seine gute Stopfbarkeit
 - Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit



Hier geht's zu den Videos

PREISVORTEIL

4 + 1	AB
10 + 3	75,70 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl Anterior / Posterior Spritzen zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-æniäl Anterior / Posterior Spritzen zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000805 **Anterior Spritzen A2**
Art.-Nr. 10000806 **Anterior Spritzen A3**
Art.-Nr. 10000826 **Posterior Spritzen PA2**
Art.-Nr. 10000827 **Posterior Spritzen PA3**
ab 75,70 CHF pro 20er Packung

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

PREISVORTEIL

4 + 1	AB
10 + 3	107,60 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl Anterior / Posterior Unitips zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-æniäl Anterior / Posterior Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000776 **Anterior Unitip A2**
Art.-Nr. 10000777 **Anterior Unitip A3**
Art.-Nr. 10000798 **Posterior Unitip PA2**
Art.-Nr. 10000799 **Posterior Unitip PA3**
ab 107,60 CHF pro 20er Packung

Farben: Anterior Packung mit 20 Unitips: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Anterior Packung mit 10 Unitips: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Posterior Packung mit 20 Unitips: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE

DIAPOLISHER PASTE Diamantpolierpaste



51,80 CHF

Art.-Nr. 10000892 **DIAPOLISHER PASTE**

Inhalt: DIAPOLISHER PASTE Spritze 2 g, 1 x Dispensing Tip (needle type) & 1 x Protective cover; 51,80 CHF pro Packung

G-æniäl Flo X

Der perfekte Partner!

G-æniäl Flo X enthält homogen verteilte, ultrafeine Partikel in einer mittleren Füllergrosse (Barium-Glasfüller) und zeichnet sich durch seine niedrige Viskosität und insbesondere durch seine sehr gute Röntgenopazität (300 % bei 1 mm, 284 % bei 0,5 mm Schichtung) aus, was unter anderem die Diagnose von Sekundärkaries vereinfacht.

PREISVORTEIL

4 + 1	10 + 3
76,30 CHF	

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl FloX Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl FloX Spritzen zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10003362 **G-æniäl Flo X A2**
Art.-Nr. 10003363 **G-æniäl Flo X A3**
Spritze 3,6 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



G-æniäl Universal Injectable

Hochfestes Komposit für Restaurationen
Fliebfähige Konsistenz - dauerhafte Festigkeit

G-æniäl Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationsskomposit mit ausserordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen. Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-æniäl Universal Injectable ausserordentliche Festigkeit.

PREISVORTEIL

4 + 1	10 + 3
AB 43,- CHF	

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl Universal Injectable Spritzen oder Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Preis pro Spritzen-Packung 43,00 CHF
Art.-Nr. 10003706 **A2 Spritze**
Art.-Nr. 10003707 **A3 Spritze**

Preis pro Unitip-Packung 64,80 CHF
Art.-Nr. 10006897 **A2 Unitip**
Art.-Nr. 10006898 **A3 Unitip**



Weitere Informationen zu G-æniäl Universal Injectable finden Sie auf Seite 8 im Praxisteil.

GC Composite Modeling Liquid Flüssigkeit zum Modellieren von Kompositmaterialien für Direktrestorationen



PREISVORTEIL

15%	90,95 CHF
	107,- CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003387
GC Composite Modeling Kit

Inhalt: 1 x GC Modeling Liquid 6 ml, 2 x Gradia Brush Pinselhalter, 5 x Gradia Pinsel flach, 5 x Gradia Pinsel rund, 1 x Mischblock



G-æniäl Universal Flo

Fliebfähig und absolut universell für alle Kavitätenindikationen

Durch die einzigartige Fliebfähigkeit lässt sich G-æniäl Universal Flo wie ein Flowable applizieren und ist zusätzlich so standfest wie ein herkömmliches Komposit. Es ist für alle Kavitätenklassen geeignet und zeichnet sich durch hervorragende Festigkeit, Polierbarkeit und Vielseitigkeit aus.

PREISVORTEIL

4 + 1	10 + 3
78,- CHF	

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen G-æniäl Universal Flo Spritzen zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-æniäl Universal Flo Spritzen zum Preis von 10!


Art.-Nr. 10000839 **G-æniäl Universal Flo A2**
Art.-Nr. 10000840 **G-æniäl Universal Flo A3**
Spritze 3,4 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung
Standardfarben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;
Innenfarben: AO2, AO3; Aussenfarben: JE, AE

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



everX Flow®

Mit Glasfasern
verstärktes fließfähiges
Komposit für den
Dentinersatz

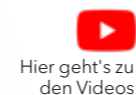

Überzeugend stabile Struktur

everX Flow ist die neue Lösung aus dem Hause GC für die widerstands-fähige und unkomplizierte Verstärkung all Ihrer Restaurationen. Mit seiner einfachen Anwendung, zwei Farbtönen und seiner herausragenden Festigkeit wird everX Flow schnell zu Ihrem neuen Nummer-1-Produkt für alle Restaurationen, die einen starken Aufbau erfordern. Die „Bulk-Farbe“ mit einer Aushärtungstiefe von 5,5 mm eignet sich optimal für tiefe posteriore Kavitäten, während die Dentin-Farbe die erste Wahl für herausragende ästhetische Ergebnisse ist.

PREISVORTEIL

BUNDLEPACK everX Flow
+ G-ænial Universal Injectable

~~218,- CHF~~ **185,- CHF**

Art-Nr. 10004834
**everX Flow +
G-ænial Universal Injectable Bundlepack**
Inhalt: everX Flow Spritzen 1 x Bulk,
1 x Dentin, G-ænial Universal Injectable
Spritzen 1 x A2, 1 x A3, Zubehör;
185,- CHF (Preis pro Bundlepack)



PREISVORTEIL

BUNDLEPACK everX Flow
+ G-ænial A'CHORD

~~260,40 CHF~~ **210,- CHF**

Art-Nr. 10006949
**everX Flow +
G-ænial A'CHORD Bundlepack**
Inhalt: everX Flow Spritzen, 1 x Bulk,
1 x Dentin, G-ænial A'CHORD Spritzen
1 x A2, 1 x A3
210,- CHF (Preis pro Bundlepack)



PREISVORTEIL

4 + 1 **AB**
10 + 3 **66,-**
CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen everX Flow zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen everX Flow zum Preis von 10!

Art-Nr. 10001488 **everX Flow Bulk**
Spritze 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing
Tip III Kunststoff, Lichtschutzkappe

Art-Nr. 10001489 **everX Flow Dentin**
Spritze 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing
Tip III Kunststoff, Lichtschutzkappe

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

**AUCH ALS BULK-FARBE
BEI TIEFEN KAVITÄTEN MIT
AUSHÄRTUNGSTIEFE BIS
5,5 MM OPTIMAL GEEIGNET!**

Injection-Moulding-Technik

Neuartige Spritzgusstechnik zur Behandlung
von Patienten mit hohen ästhetischen Ansprüchen



Sehen Sie hier
Injection-
Moulding-
Techniken!



**JETZT
INFORMIEREN**



Injection-Moulding-Technik
mit EXACLEAR und
G-ænial Universal
Injectable
mit Dr. Serhat Köken



151,40 CHF

Art-Nr. 10003753
Injection Moulding Kit
Inhalt: je 1 Spritze G-ænial Universal
Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3;
1 Exaclear Kartusche 48 ml;
151,40 CHF pro Packung



G-ænial Universal Injectable

Injizieren, formen
und konturieren -
alles zugleich

- Ultra-feine Bariumfüller (150µm)
- Hoher Fülleranteil
- Full-coverage Silane Coating (FSC) Technologie verbessert: das Ausbringen & den Verbund der Füller in der Matrix
- Geringer Auspressdruck
- Klebt nicht
- Hohe Röntgensichtbarkeit

Nähere Informationen zum Produkt
finden Sie auf Seite 8.



G-Premio BOND

Lichthärtendes
Einkomponenten-
Universaladhäsiv

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung Für Komposite, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzit-verstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperative Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

Nähere Informationen zum Produkt
finden Sie auf Seite 4.



EXACLEAR

Klares Vinyl-
Polysiloxan-Material

- Hohe Transparenz ermöglicht visuelle Detailkontrolle
- Effektive Lichthärtung durch exzellente Transparenz
- Optimale Konsistenz für einfache Platzierung im Abformlöffel
- Einfach zu schneiden oder zu durchbohren
- Gut reproduzierbar, hat während des Applizierens optimale Stabilität und Reißfestigkeit

Perfekt geeignet für:
• Injection Moulding Technik: einfache Kontrolle beim Injizieren und effektive Lichthärtung

PREISVORTEIL

10 + 3 **80,20 CHF**

Preis pro Packung

Erhalte 13 Packungen Exaclear zum Preis von 10!

Art-Nr. 10001483 **Exaclear**
2 x Kartuschen à 48 ml (51 g),
6 x Mixing Tips II L (blue);
80,20 CHF pro Packung

Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.



everX Posterior®

Glasfaserverstärkte Komposit-
Unterkonstruktion für grosse Kavitäten

Art-Nr. 10001048 **everX Posterior;**
89,10 CHF pro Packung; 15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Art-Nr. 10001148 **everX Posterior;**
267,40 CHF pro Packung; 50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips




Kontaktieren Sie uns oder Ihren persönlichen
GC Fachberater um ein Sample anzufordern.



EQUIA Forte™ HT

Das neueste Glas-Hybrid-Bulk-Fill-
Restaurationssystem –
Ihr verlässlicher Partner
für Seitenzahnrestorationen

- Stärkeres und nicht klebriges Material,
perfekt für die Bulk-Fill-Platzierung
- Erhöhte Transluzenz
- Kofferdam-Platzierung und das
Auftragen des Adhäsivs fallen weg
- Hervorragende Biokompatibilität
- Einfache Seitenzahnrestorationen in
wenigen Schritten – ohne absolute Isolation
- Restauration empfindlicher,
hypomineralisierter MIH-Zähne bei
jungen Patienten

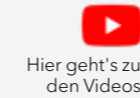

PREISVORTEIL

EQUIA FORTE HT
PROMOPACKUNG A2 ODER A3

20% **285,36 CHF**
~~356,70 CHF~~

Preisvorteil von 20% gilt ausschliesslich für die
Promopackung in Farbe A2 (Art-Nr. 10004866)
oder die Promopackung in Farbe A3
(Art-Nr. 10004811)

Weitere Verpackungseinheiten:

EQUIA Forte HT, Nachfüllpackung: 182,90 CHF;
Inhalt: 1 Packung beinhaltet 50 Kapseln EQUIA Forte
HT, 0,40g Pulver und 0,13 g (0,10 ml) Liquid;
gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml Farben:
sortiert, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Intropackung: 103,- CHF;
Inhalt: 20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose
Farben: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Promopackung:
Aktionspreis nur gültig für Farbe A2 und A3
285,36 CHF anstatt **356,70 CHF**
Inhalt: 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml
Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Klinikpackung: 603,70 CHF
Inhalt: 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml
Farben: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT - Hybrid Technologie

- verbesserte Transluzenz
- noch einfachere Verarbeitung

**1 x EQUIA Forte HT
PROMOPACKUNG**
Inhalt: à 100 Kapseln,
1 x Equia Forte Coat 4 ml

**1 x EQUIA Forte HT
INTROPACKUNG GRATIS**
Inhalt: 20 Kapseln,
20 Equia Forte Coat Unitdose

Kaufe 1 x EQUIA Forte HT Promopackung
(à 100 Kapseln, 1 EQUIA Forte Coat 4ml) und
erhalte 1 x EQUIA Forte HT Intropackung
(20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose)
gratis!

Aktion nur gültig für alle Promopackungen
und nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.

Art.-Nr. 10004885
EQUIA Forte Coat FlipCap
4 ml Flasche, Zubehör, 89,60 CHF

Art.-Nr. 10003513
EQUIA Forte Coat, Unitdose-Packung
50 Unitdose (à 0,1 ml) 118,40 CHF

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3 **176,- CHF**

Preis pro Packung

Erhalte 5 EQUIA Forte HT
Nachfüllpackung zum Preis von 4!
Erhalte 13 EQUIA Forte HT
Nachfüllpackung zum Preis von 10!

Aktion nur gültig für alle Refillpackungen und
nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

INDIKATIONEN

- Klasse-I-Restaurationen/permanent
- Kaudruckbelastete Klasse-II-
Restaurationen/permanent
- Interimsfüllungen
- Klasse-V- und Wurzeloberflächen-
restaurationen Stumpfaufbau

1 EQUIA FORTE HT PROMOPACKUNG

**+ 2 SPRITZEN
GC KOMPOSIT GRATIS**
(G-ænial Universal Injectable
ODER everX Flow)

Kaufe 1 x EQUIA Forte HT Promopackung
(100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml) und
erhalte 2 Spritzen GC Komposit gratis!
Zur Auswahl der Komposit-Spritzen stehen:
G-ænial Universal Injectable oder everX Flow.

Produkt- und Farbmix möglich. Gültig nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater.

EQUIA Forte HT Promopackung; 356,70 CHF
Inhalt: 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml;
Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2



EQUIA Forte HT Klinikpackung
603,70 CHF pro Packung
Inhalt: 200 Kapseln,
1 x Equia Forte Coat (4 ml)
Farben: A2, A3, B2

1 x EQUIA Forte HT KLINIKPACKUNG
Inhalt: à 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

**+ CM-II
KAPSELMISCHER GRATIS!**

**+ 1 CAPSULE APPLIER IV
GRATIS!**

Kaufe 1 Packung EQUIA Forte HT Klinikpackung
und erhalte 1 CM-II Kapselmischer
(im Wert von 749,10 CHF) und 1 Capsule Applier IV
(im Wert von 118,30 CHF) gratis!

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater. Aktion für alle verfügbaren
Klinikpackungen gültig.

**GC GLASIONOMER /
GLAS-HYBRID-
MATERIAL
(5 PACKUNGEN)**

**CM-II
KAPSELMISCHER
GRATIS!**

Kaufe 5 Packungen GC
Glasionomer oder GC Glas-Hybrid
+ 1 CM-II Kapselmischer
(im Gesamtwert von 749,10 CHF) gratis!

Aktion für alle erhältlichen
GC Glasionomer/Glashybrid
Kapselpackungen gültig.

Farbmix möglich.

Aktion gültig nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater.



**RESTORATIVE
SOLUTIONS**

Restorative-Guide

Mehr Informationen finden Sie
in unserem Restaurations-Leitfaden
oder in der App!

CAVITON

Provisorisches
Füllmaterial



PREISVORTEIL

4 + 1 **21,80 CHF**

Erhalte 5 Caviton-Packungen zum Preis von 4!

Art.-Nr. 10000101 **CAVITON**
Jar, 30 g, White; 21,80 CHF pro Packung

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.

Erfolgreiche Restaurations- und Befestigungssysteme von GC!



RESTORATIVE SOLUTIONS



LUTING SOLUTIONS

GC Fuji™ II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Glasionomer-Restaurationsmaterial



Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

- Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und einfaches Verfahren
- Ausgezeichnete Ästhetik & Transluzenz
- Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restaurationen der Wurzeloberfläche und die Behandlung von Kindern
- Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Technik
- Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
- Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung

MUST HAVE
JETZT TESTEN!



PREISVORTEIL	
4 + 1	186,70 CHF
10 + 3	

Preis pro Packung
 Erhalte 5 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 4!
 Erhalte 13 Fuji II LC Kapselpackungen zum Preis von 10!
 Art.-Nr. 10000035 **Fuji II LC Kapseln A2**
 Art.-Nr. 10000036 **Fuji II LC Kapseln A3**
 Inhalt: à 50 Kapseln (0,33 g Pulver und 0,10 g (0,085 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel (0,10 ml);
 Aktion für alle Farben gültig.
 Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
 Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GC Fuji IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares Glasionomer-Restaurationsmaterial



Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP FAST macht ihn zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II, als Basis- oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

- Breites Indikationsspektrum
- Sehr guter chemischer Verbund
- Schnelle Bulkapplikation
- Keine Mikrospaltbildung
- Hervorragende Druckfestigkeit und Oberflächenhärte
- Schutz durch Fluoride
- Biokompatibel

PREISVORTEIL	
4 + 1	159,40 CHF
10 + 3	



Preis pro Packung
 Erhalte 5 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 4!
 Erhalte 13 Fuji IX GP FAST Kapselpackungen zum Preis von 10!
 Art.-Nr. 10000078 **Fuji IX GP FAST Kapseln A2**
 Art.-Nr. 10000079 **Fuji IX GP FAST Kapseln A3**
 Inhalt: à 50 Kapseln (0,40 g Pulver und 0,11 g (0,09 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel (0,14 ml)
 Aktion für alle Farben gültig.
 Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.
 Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-CEM ONE™

Selbstadhäsives Befestigungskomposit

Zuverlässig

Optimale Haftwerte bei retentiven und nicht-retentiven¹ Präparationen, dank der einzigartigen GC Touch Cure Technologie des optionalen G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primers.

Universell

Hervorragende Haftfestigkeit zum Zahn und zu allen Substraten: Schmelz, Dentin, Zirkonoxid, Metall, Glaskeramik², Hybrid-Keramik².

PREISVORTEIL
4 + 1 AB **68,40 CHF**

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10006921 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
Art.-Nr. 10006922 **G-CEM ONE Twin Refill Transluzent**
Inhalt pro Twin Refill: 2 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips; 130,50 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10006923 **G-CEM ONE Single Refill AO3**
Art.-Nr. 10006924 **G-CEM ONE Single Refill Weiss Opak**
Inhalt pro Single Refill: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips; 68,40 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10006925 **G-CEM ONE Value Refill A2**
Art.-Nr. 10006926 **G-CEM ONE Value Refill Transluzent**
Inhalt pro Value Refill: 8 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips; 414,60 CHF pro Packung

Anwenderfreundlich

Ausgeprägte Dunkelhärtung, „tack-cure“ Überschussentfernung, hohe Toleranz gegenüber Speichel und Feuchtigkeit¹, Fließfähigkeit ideal für Befestigungen, praktisch keine postoperative Sensibilitäten³.

Ästhetisch

Unsichtbare, abrasionsstabile Ränder für ästhetische Ergebnisse.



Art.-Nr. 10006918 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
Art.-Nr. 10006919 **G-CEM ONE Starter Kit Transluzent**
Inhalt pro Starter Kit: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; 79,30 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10006920 **G-CEM ONE System Kit**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Spritze A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Spritze TR (4,6 g), 15 x Automix Tips Regular, 5 x Automix endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 4 ml; 173,20 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10037116 **G-CEM ONE Universal System Kit**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Spritze TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix endo tips 1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml; 184,50 CHF pro Packung

GC Touch Cure

Der Initiator im G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer beschleunigt die chemische Aushärtung (Dunkelhärtung) des Befestigungskomposits an der Zahnoberfläche und stellt einen stabilen Verbund her.


Optional: G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer Für alle Pfeilerzähne und Kavitäten

- MDP: Verbund zur Zahnhartsubstanz, Zirkonoxid und Nichtedelmetall
- 4-MET: Verbund zur Zahnhartsubstanz
- MDTP: Verbund zu Edelmetall
- Beschleuniger - Starker Verbund an Pfeilerzahn und Kavität durch GC Touch Cure-Funktion

Art.-Nr. 10006833 **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; Preis pro Packung 70,80 CHF

Zubehör:
Art.-Nr. 10003289 **Automix Tip pro Endo** 10 Stk. mit Verlängerungstip; 13,50 CHF
Art.-Nr. 10003335 **Automix Tip Regular** 10 Stk.: 12,50 CHF

Farben G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal

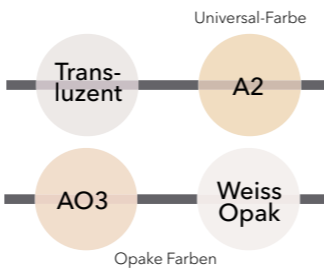

Jetzt auch mit G-Premio BOND kombinierbar!
G-CEM ONE ist nun zusätzlich in drei neuen Packungen in Kombination mit G-Premio BOND verfügbar, aus denen Sie Ihr bevorzugtes Befestigungsprotokoll wählen können.



Art.-Nr. 10037114 **G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regulär, 2 x GC Automix Endo Tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 128,80 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10037115 **G-CEM ONE Universal Starter Kit Transluzent**
1 x G-CEM ONE Syr. TR (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regulär, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 128,80 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10037116 **G-CEM ONE Universal System Kit**
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Syr. TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regulär, 5 x GC Automix endo tips 1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml; 184,50 CHF pro Packung

G-CEM ONE Universal Kits

Universelles, selbstadhäsives Befestigungskomposit

Vereinfachtes Universal-Adhäsiv in nur einer Flasche dank G-Premio BOND:

- Die Kombination aus drei funktionellen Monomeren, sorgt für eine optimale Haftung - nur ein Adhäsiv für alle direkten und indirekten Workflows!
- Einfache Anwendung: G-Premio BOND auftragen, 10 Sekunden warten, Luft trocknen, Lichthärtung für 10 Sekunden. Kompatibel mit allen Ätzverfahren (Self-Etch, Selektive und Total-Etch).

¹ Mit G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
² Mit G-Multi PRIMER | ³ Feldtestergebnisse, nur für G-CEM ONE. Daten auf Anfrage.



GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

Einen Schritt voraus

Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgenopazität und einen langlebigeren Haftverbund - hauptsächlich auf Zirkonoxid.



Hier geht's zu den Videos

Ideal für Metall- und Zirkonrestorationen

- Handmischvariante oder Automix
- Keine Vorbehandlung
- Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
- Hervorragende Randsichtigkeit
- Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
- Optimale Viskosität
- Geringe Filmstärke
- Optionale Lichthärtung

PREISVORTEIL
JETZT EINSTEIGEN
FUJICEM EVOLVE SINGLE PACK
3 + 1 103,30 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen FujiCEM Evolve zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10004926 **FujiCEM Evolve Single Pack**
Inhalt: 1 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular

Zubehör:

Art.-Nr. 10004917 **Push and Click Mixing Tips Regular** (15 Stk.); 20,10 CHF

Art.-Nr. 10004929 **Push and Click Mixing Tips Endo** (15 Stk.); 30,00 CHF

PREISVORTEIL
3 + 1 223,50 CHF

Preis pro Triple Pack Automix

Erhalte 4 Packungen FujiCEM Evolve Triple Pack Automix zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10004928 **FujiCEM Evolve Triple Pack Automix**
Inhalt pro Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mischkanülen Regular

Weitere Verpackungseinheiten:

Art.-Nr. 10004916 **FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix**
Inhalt pro Triple Pack Handmix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritzen (à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; 224,70 CHF

Art.-Nr. 10006621 **FujiCEM Evolve Klinikpackung**
Inhalt: 8 x GC FujiCEM Evolve syringe (9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22; 532,60 CHF

Befestigungslösungen

Der GC „Luting Guide“ Befestigungsleitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials. Er enthält darüber hinaus Informationen zu den einzelnen Befestigungsschritten. Mehr Informationen finden Sie in unserem Befestigungsleitfaden oder in der App!



Entdecken Sie den **GC Luting Guide!**

Die schrittweise Anleitung für alle Befestigungen finden Sie im **GC Luting Guide** (Befestigungsleitfaden)



Hier gehts zur
Webpage:
www.initiallisiblock.com

initial
LiSi Block

GC Initial LiSi Block

Vollkristallisierter CAD/CAM-Block aus Lithium-Disilikat

Initial LiSi Block ist ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. In Verbindung mit der ONE SQIN Technik - dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem - können Sie schnell und einfach ästhetischere Ergebnisse erzielen.



PREISVORTEIL

+10% ZUSÄTZLICHER
PREISVORTEIL

4 + 1 **112,68**
CHF

10 + 3 ~~125,20~~ CHF

Erhalte 5 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.)
zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.)
zum Preis von 10!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern,
allerdings nur innerhalb derselben Produktgruppe und
nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT,
A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL; Grösse 14: 125,20 CHF
Packungseinheit: 5 Blöcke pro Packung

Preis pro Initial LiSi Block Packung (à 5 Stk.)
112,68 CHF anstatt 125,20 CHF

**INITIAL LISI BLOCK
AESTHETIC KIT**

488,10 CHF

Art.-Nr. 10007322
Initial LiSi Block Aesthetic Kit
Initial LiSi Block, CEREC, Grösse 14,
5 Farben à 1 Block; A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3
HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, 5
Farben à 4 g; L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP;
Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF,
Diluting Liquid, 8 ml; Refresh Liquid, 8 ml
Zubehör; 488,10 CHF

Preis pro Packung



- Zeitersparnis, da kein Kristallisationsbrand erforderlich
- Langlebige Ästhetik
- Feine, passgenaue Ränder
- Natürliche Opaleszenz
- Ideale Basis für die ONE SQIN Technik
- Einfach schleifen, polieren, einsetzen

Politur und Fertigstellung



1 Schleifen 2 Vorpolutur 3 Brennwatte vorbereiten 4 Kristallisation 5 Abkühlung 6 Entfernen der Brennwatte 7 Reinigung 8 Abschliessende Politur
Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage. Unter Testbedingungen basierend auf Gebrauchsanweisung.



TEMPSMART® DC

Schnell und effizient zur
provisorischen Restauration

Dualhärtendes Komposit für provisorische Kronen und Brücken

Provisorische Restaurationen spielen in der restaurativen Zahnheilkunde eine wichtige Rolle. Mit TEMPSMART DC hat GC eine neue Technologie für ein smartes Provisorienmaterial eingeführt. TEMPSMART DC ist das erste frei von Weichmachern und dualhärtende Provisorienmaterial, das entwickelt wurde, um Ihnen die tägliche Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten.

48 ml Kartusche, 16 Mischkanülen; 115,60 CHF

Art.-Nr.	10001463	10001464	10001465	10001466
Farbe	A1	A2	A3	A3,5
Art.-Nr.	10001467	10001468		
Farbe	B1	BW		

10 ml Kartusche, 10 Mischkanülen; 68,90 CHF

Art.-Nr.	10001469	10001470	10001471	10001472
Farbe	A1	A2	A3	B1



PREISVORTEIL

4 + 1 AB **68,90** CHF

Preis pro Packung

TEMPSMART DC 48 ml Kartusche

115,60 CHF pro Packung

Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC
48 ml Kartusche zum Preis von 4!

TEMPSMART DC 10 ml Kartusche

68,90 CHF pro Packung

Erhalte 5 Packungen TEMPSMART DC
10 ml Kartusche zum Preis von 4!

Aktion gültig für alle Farben innerhalb
gleicher Verpackungseinheit und
nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Zubehör:

Art.-Nr. 10003754

Mischkanülen II Grösse SSS
(60 Stk.) 67,90 CHF

Art.-Nr. 10003335

GC Automix Tip Regular
(10 Stk.) 12,50 CHF

📍 **SICHERE HALTBARKEIT**
Hohe Bruchstabilität,
ideal für Seitenzahnbrücken

📍 **ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE**
Fluoreszenz und
langanhaltender Glanz

📍 **BEQUEME VERARBEITUNG**
Nicht-klebrig,
Hochglanz in wenigen Schritten

📍 **INTELLIGENTES KONZEPT**
Kurze Verarbeitungszeit
durch Lichthärtung



GC Fit Checker™ Advanced & GC Fit Checker Advanced Blue

VPES-Silikon zur Passgenauigkeitsüberprüfung (weiss & blau)

Fit Checker Advanced und Fit Checker Advanced Blue bieten eine einfache und präzise Möglichkeit, die Passgenauigkeit von Prothesen zu beurteilen und beim Anprobe-/Einsetztermin direkt Korrekturen vorzunehmen.

BLUE, die ideale Farbabstufung für Okklusionsanalysen und Passgenauigkeitsüberprüfungen von Vollkeramik-Restaurationen.

WEISS, zur Überprüfung von metallbasierenden Restaurationen und Unterfütterungsabformungen sowie optimales Analysieren von Druckstellen von Prothesen.

PREISVORTEIL

3 + 1 AB **83,10** CHF

Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen

FIT CHECKER ADVANCED zum Preis von 3!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig, nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



- „Snap Set“,
- Klare und deutliche Erkennbarkeit
- Keine Schwierigkeiten bei Anpassungen
- Leicht zu entfernen

Art.-Nr. 10001025

GC FIT CHECKER ADVANCED, 1-1 Pack

Inhalt: White 55 g (42ml) Base, 50 g (42 ml) Katalysator,
3 g Abbindeverzögerer, Mixing Pad N° 1;
83,10 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10001026

GC FIT CHECKER ADVANCED, Kartuschen (2 x 62 g)

White + 3 Mixing Tips IIS (pink), 3 Mixing Tips IISS (yellow)
White; 93,80 CHF pro Packung

Art.-Nr. 10001027

GC FIT CHECKER ADVANCED BLUE, Kartuschen (2 x 56 g)

Blue + 3 Mixing Tips IIS (pink), 3 Mixing Tips IISS (yellow)
Blue; 93,80 CHF pro Packung



GC INITIAL LISI BLOCK
TEMPSMART DC
FIT CHECKER
ADVANCED



**JETZT SYMPRESS
MISCHER GRATIS!**

EXA'lence® Vinyl PolyEther Silikon Abformmaterial

Mit EXA'lence bringt GC die Abformtechnik auf ein neues Niveau und löst eine ganze Reihe bekannter Problemstellungen im täglichen Umgang von Abformmaterialien - Abformtechniken. EXA'lence fliesst im feuchten Milieu detailgenau an die Präparation an und garantiert selbst bei feuchten subgingivalen Präparationen stets blasen- und verzugsfreie Funktions- bzw. Präzisionsabformungen. Das Ergebnis sind jederzeit reproduzierbare und absolut zeichnungsscharfe Modelle.



PREISVORTEIL

6+1

Preis pro Packung
Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig,
nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Erhalte 7 Packungen EXA'lence zum Preis von 6!

EXA'lence Standard Kit
370 ml Kartusche à 167,60 CHF pro Packung;
10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring;
Art.-Nr. 10001518 Medium Body Regular Set
Art.-Nr. 10001519 Heavy Body Regular Set
Art.-Nr. 10001520 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Nachfüllpackung, 2 x 370 ml Kartusche à 233,10 CHF;
Art.-Nr. 10001507 Medium Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001506 Heavy Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001504 Heavy Body Fast Set

Art.-Nr. 10001512 **EXA'lence Putty 1-1 Packung**
(500 g/278 ml Base, 500 g/278 ml Katalysator, Zubehör);
151,00 CHF

Art.-Nr. 10001514 **EXA'lence Putty 5-5 Klinikpackung**
(5 x 500 g/278 ml Base, 5 x 500 g/278 ml Katalysator, Zubehör);
439,20 CHF

EXA'lence, Klinikpackung, 6 x 370 ml Kartusche à 687,40 CHF;
Art.-Nr. 10001516 Medium Body Regular Set
Art.-Nr. 10001515 Heavy Body Regular Set;
Art.-Nr. 10001517 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Nachfüllpackung,
2 x 48 ml pro Refillpackung, Mischkanülen à 77,30 CHF;
EXA'lence ExtraLight Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow);
Art.-Nr. 10001524 Regular Set | Art.-Nr. 10001529 Fast Set
EXA'lence Light Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow)
Art.-Nr. 10001525 Regular Set | Art.-Nr. 10001530 Fast Set
EXA'lence Medium Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001531 Regular Set | Art.-Nr. 10001528 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001522 Regular Set | Art.-Nr. 10001526 Fast Set
EXA'lence Heavy Body Rigid Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
Art.-Nr. 10001527 Fast Set



Renfert Sympress Mischer
ist keine Handelsmarke von GC.

**ABFORMMATERIAL
AKTION**

**RENFERT SYMPRESS
MISCHER GRATIS!**

Kaufe GC Abformmaterial (EXA'lence) im Wert
von 1890,- CHF und erhalte einen Renfert Sympress
Mischer (im Wert von 949,- CHF) kostenlos!



Workshop

Notfallmassnahmen bei schwierigen MIH Zähnen

Ein praktischer Kurs am Modell

Kursinhalte

Eine MIH Erkrankung bedeutet im schlimmsten Fall für die Kinder chronische Schmerzen (Hypersensibilitäten) und unberechenbar auftretende tiefe Substanzdefekte an den am schwersten betroffenen Molaren. Einer möglichst effizienten und einfachen Notfallversorgung, wenn möglichst bereits in der ersten Sitzung, kommt eine entscheidende Bedeutung in den verschiedenen Behandlungskonzepten zu. In knapp drei Stunden werden verschiedene Versorgungsmöglichkeiten und -Techniken eines „Emergency Konzepts“ erläutert, demonstriert und an Modellen selber geübt. Nach diesem Kurs sollten den Teilnehmenden eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung stehen, auch schwierige MIH Fälle so schnell als möglich zu versorgen.

Programm

13.00 - 15.00 Uhr

Vortrag von Dr. Richard Steffen zu Notfallmassnahmen bei schwierigen MIH Zähnen

15.00 - 15.30 Uhr

Pause mit Zwischenverpflegung

15.30 - 18.00 Uhr

Hands-On Workshop an Modellen „Emergency Konzepts“

Ab 18.00 Uhr

Apéro-Riche



REFERENT

Dr. Richard Steffen

WANN

Donnerstag, 13. März 2025
Vortrag: 13.00 - 15.00 Uhr
Workshop: 15.30 - 18.00 Uhr

WO

GC International AG
Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern

KURSBEBÜHR

Nur Vortrag: 190,- CHF
(inkl. Goody-Bag von GC)

Vortrag und Workshop:
350,- CHF

(inkl. Verpflegung
und Goody-Bag von GC)

KONTAKT/ANMELDUNG

kontaktieren Sie bitte
GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78

oder Ihren persönlichen
GC Fachberater:

Eveline Wangler

Produktspezialistin Praxis
Zürich, Zentralschweiz,
Mittelland
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental

Manuela Schuler

Produktspezialistin Praxis,
Ostschweiz
M: 079 326 23 30
manuela.schuler@gc.dental

Nicole Niederberger

Produktspezialistin Praxis
Region Bern, Solothurn, Tessin
M: 079 889 39 74
nicole.niederberger@gc.dental

Felix Gloor

Zahntechniker Produktspezialist,
Westschweiz
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental



Workshop

Zementieren - gewusst wie!

Praktischer Workshop: Die Wahl der richtigen Befestigung

REFERENT

Dr. Domenico Di Rocco

WANN

Freitag, 16. Mai 2025
16.00 - 20.00 Uhr

WO

Hotel St. Gotthard (am HB)

KURSBEBÜHR

350,- CHF (exkl. MwSt.)

ANMELDUNG

fortbildungROSENBERG
MediAccess AG
Hofstrasse 10 | Postfach 257
8808 Pfäffikon
Telefon 055 415 30 58
info@fbrb.ch | www.fbrb.ch

Eine Grosszahl an Herstellern bieten heutzutage eine beträchtliche Anzahl an verschiedenen Befestigungs-Kompositen, -zementen und Adhäsivsystemen an. Die Wahl, Indikationsstellung und schlussendlich die intraorale Verwendung eines geeigneten Befestigungssystems fällt daher nicht immer leicht.

Der Kurs soll kurz und prägnant eine Übersicht über die Dentalkeramiken und keramik-ähnlichen Materialien geben und die wichtigsten Grundsätze der konventionellen, selbstadhäsiven und adhäsiven Befestigung von keramischen oder konventionellen Rekonstruktionen vermitteln. Es erwartet Sie eine systematische Vertiefung zur praxisorientierten Auswahl und Anwendung verschiedener Systeme, bezogen auf die Materialeigenschaften der Rekonstruktion und der individuellen intraoralen Begebenheiten. Exemplarisch werden einzelne Befestigungssysteme vertieft und anschliessend an den Theorieteil in einem Hands-On Kurs direkt am Modell angewendet und geübt. Kurspreis inklusive Goody-Bag von GC inbegriffen.



REFERENT

Prof. Dr. Ivo Krejci

WANN

KURS 1
Freitag, 29. August 2025
9.00 Uhr - 17.00 Uhr

KURS 2

Freitag, 28. November 2025
9.00 Uhr - 17.00 Uhr

WO

KURS 1

Ostschweiz

KURS 2

GC International AG
Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern

KURSBEBÜHR

490,- CHF pro Person

TEILNEHMERZAHL

max. 15

ANMELDUNG

GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater

Kompositworkshop

Direkte adhäsive Komposit-Restaurationen

Praktischer Workshop: mit 3D-Demonstrationen

1

2

1

2

In diesem Workshop dürfen Sie keine Scheu vor praktischen Arbeiten haben. Nach einer kurzen theoretischen Einführung mit PowerPoint-Unterstützung geht es gleich in die Praxis sämtlicher Arten von direkten Kompositfüllungen. Angefangen mit der nichtinvasiven adhäsiven Restauration bis zum direkten Höckeraufbau aus Komposit in ausgedehnten Kavitäten mit subgingival liegenden Rändern wird der Referent sämtliche Techniken von A bis Z am Modell mit Hilfe eines 3D-Mikroskops demonstrieren. Anschliessend werden die Teilnehmer jede Technik Schritt für Schritt am Modell praktisch umsetzen. Für die Teilnahme ist eine Lupenbrille unabdingbare Voraussetzung.

Melden Sie sich frühzeitig an - first come, first serve. Die Rechnung wird nach Erhalt der Anmeldung verschickt und ist innert 14 Tagen fällig. Eine Annullierung ist bis eine Woche vor Kursbeginn kostenlos möglich. Danach kann die Kursgebühr nicht mehr rückerstattet werden. Die Einzahlungsbestätigung berechtigt zur Kursteilnahme. Ihre Anmeldung ist erst nach Zahlungseingang gültig.



CEREC-Kurs für Zahnärzte

Erleben Sie die Zukunft der Zahnmedizin

Die digitale Zahnmedizin hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und ist heute ein unverzichtbarer Teil moderner Behandlungsabläufe. Viele Praxen nutzen inzwischen Intraoralscanner und fast die Hälfte davon kombiniert diese bereits mit der CEREC-Rekonstruktionssoftware. Die Technologie ist so ausgereift, dass Spitzenresultate mit erstaunlicher Effizienz erzielt werden können. In unserem praxisorientierten Tageskurs lernen Sie, wie Sie Ihre CEREC-Fähigkeiten perfektionieren und das volle Potenzial Ihres Systems ausschöpfen. Erfahren Sie, wie Sie ästhetische Restaurationen auf höchstem Niveau erstellen - das sogar in nur einer Sitzung, wenn Sie es wünschen.

- Präparationsgrundlagen: Optimierungsmöglichkeiten
- Materialien: Vor- und Nachteile, Kombinationsmöglichkeiten
- Aufnahmeprotokolle: wie unterstütze ich das System und vermeide Fehler
- Design: Biogenerik, Kopieren, Spiegeln
- Herstellung: Fräsen - Schleifen
- Finalisieren: Konturieren, Individualisieren, Glasieren
- Isolation: Tipps und Tricks
- Zementieren

Im Anschluss des theoretischen Teils werden sämtliche Möglichkeiten im Rahmen einer Live-Behandlung vertieft.



REFERENT

Dr. Konstantinos Tokmakidis

WANN

Freitag, 19. September 2025
09.00 - 17.00 Uhr

WO

Vormittag:
Restaurant Rössli, Dorfstrasse 1,
6045 Adligenswil

Nachmittag:

Praxis in Adligenswil
(Dr. Konstantinos Tokmakidis),
Obgardrain 7, 6043 Adligenswil

TEILNEHMERZAHL 10

KURSBEBÜHR

490,- CHF pro Person

KONTAKT/ANMELDUNG

kontaktieren Sie bitte
GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78

oder Ihren persönlichen
GC Fachberater:

Eveline Wangler

Produktspezialistin Praxis
Zürich, Zentralschweiz,
Mittelland
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental

Manuela Schuler

Produktspezialistin Praxis,
Ostschweiz
M: 079 326 23 30
manuela.schuler@gc.dental

Nicole Niederberger

Produktspezialistin Praxis
Region Bern, Solothurn, Tessin
M: 079 889 39 74
nicole.niederberger@gc.dental

Felix Gloor

Zahntechniker Produktspezialist,
Westschweiz
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental



Sie haben Interesse
an weiteren Workshops?
Hier finden Sie
alle Informationen!



Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!



Die aktuellen Kurstermine für unsere Workshops finden Sie unter
<https://Europe.gc.dental/de-CH/education/courses>



REFERENT
Prof. Dr Marleen Peumans,
Belgium

WANN

Freitag, 21. Februar 2025
12.00 - 17.00 Uhr
Samstag, 22. Februar 2025
09.00 - 17.00 Uhr

WO

GC International AG
Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern

KURSBEBÜHR

490,- CHF pro Person

KURSSPRACHE Englisch

ANMELDUNG


GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater

Workshop Prof. Dr. Marleen Peumans

Minimally invasive restoration of severe tooth wear with direct composite restorations

Learning objectives

- Learn about the different aspects of localized/complete rehabilitation of tooth wear with direct composite restorations
- Learn about several methods to build up the teeth in the posterior region will: the stamp technique or the technique of free-hand modeling in combination with a conventional composite and the injection flowable technique
- Learn about the durability of the direct composite restorations in wear cases

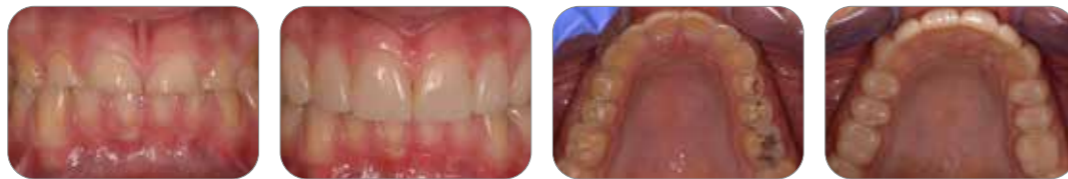

The Restorative Advisory Board brings together top dental professionals from Europe and the Middle East to advance restorative dentistry through collaboration, discussion and innovation. Since its inception in 2010, the board has worked to influence the development of groundbreaking materials and continues to help in shaping the trajectory of dental care.



Workshop Georg Benjamin

Restoration of compromised vital and nonvital teeth

Learning objectives

Mastering Rubber Dam Techniques: Learn the essential tools and techniques to ensure rubber dam stability and prevent tearing, even in challenging deep cases, ensuring optimal isolation.

Understanding Vital Pulp Therapy: Gain a understanding of vital pulp therapy, from indirect pulp capping to full pulpotomy. Explore the benefits of preserving pulp vitality and how to make the best clinical choices decisions for treatment success.

Simplified Post-Endo Restorations: Discover pragmatic approaches to restoring endodontically treated teeth using fiber-reinforced composites, injectable flowable materials, and other efficient techniques for predictable outcomes.

Werte Kund:Innen!

Ein herzliches Willkommen zu der aktuellen und ersten Ausgabe 2025 der GC News & Highlights-Broschüre, die unter dem Motto „Small changes, big smiles“ steht.

Lächeln macht glücklich und Lachen macht gesund, doch zahlreiche Menschen sind mit ihrem Lächeln unzufrieden und dies hat oft psychosoziale Folgen. Viele Patienten wünschen sich eine kosmetische Zahnbehandlung schrecken aber vor hohen Kosten, möglichen Schmerzen und der Behandlungsdauer zurück. Dabei könnte man bei einem Grossteil schon mit kleinen Veränderungen an den Zähnen die Ästhetik des Lächelns deutlich verbessern.

Wir von GC möchten Sie dabei mit hochqualitativen und innovativen Produkten und bester Beratung durch unsere Produktspezialisten zu den unterschiedlichsten Techniken und Themen sehr gerne unterstützen und Ihnen dabei helfen Ihren Patienten das Lächeln zu geben, das sie gerne hätten!

Die Ausgabe 1 enthält eine Fülle an interessanten Produkten, verschiedenen Fortbildungsangeboten und Neuheiten z. B. im Laborbereich mit unserer neuen höchästhetischen Initial ZR Disk Multilayer Elite, die perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Festigkeit und aussergewöhnlicher Ästhetik gewährleistet und dies alles in gewohnter und Ihnen bestens bekannter GC Qualität!

Und wir freuen uns Sie auf der IDS 2025 von 25.- 29. März 2025 in Köln an unserem Stand Halle 11.2 Stand N010 - O039 herzlich begrüssen zu dürfen und Sie über unsere neuesten Innovationen informieren zu können.

Es ist und bleibt eine spannende Zeit in der dentalen Welt!
Ihr GC Swiss Team!



CLAUS NÜSSLE
Regional Sales Manager DACH
Managing Director Germany
Country Manager Switzerland
M: 079 172 1985
claus.nuessle@gc.dental



REFERENT
Georg Benjamin,
Germany

WANN

Donnerstag, 2. Mai 2025

WO

GC International AG
Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern

KURSBEBÜHR

490,- CHF pro Person

KURSSPRACHE Englisch

ANMELDUNG

GC Austria GmbH Swiss Office
info.switzerland@gc.dental
T: 041 520 01 78
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater

GET CONNECTED SMILE PROGRAM

**LERNEN.
TEILEN
PROFITIEREN.**




GC Get Connected - alles in einer App!

Nutzen Sie die Chance, sich jeder Zeit über GC und unsere Produkte zu informieren – laden Sie sich die GC Get Connected App auf Ihr Handy. Stöbern Sie online in unserer Bibliothek, sehen Sie Anwendervideos, erfahren Sie mehr zu Fortbildungen oder Events und erhalten Sie Informationen zu unseren Produkten.

Bei GC sind Smiles mehr wert – lernen, teilen, profitieren. Laden Sie sich jetzt das Get Connected Smile Program auf Ihr Handy. Sammeln Sie Smiles, indem Sie Artikel teilen, an Umfragen teilnehmen und sich für Fortbildungsveranstaltungen anmelden.

**Laden Sie die App
und sammeln Sie Smiles!**

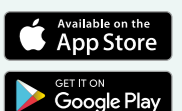

Aadva™ Lab Scanner 3

Sie sind auf der Suche nach einem einzigartigen und mitreissenden Scan-Erlebnis?

Einzigartiger gestengesteuerter Laborscanner

Der Aadva Lab Scanner 3 von GC ist ein Scanner der nächsten Generation mit zahlreichen ausgeklügelten und praktischen Funktionen. Dieser gestengesteuerte Laborscanner vereint ein einzigartiges Benutzererlebnis mit hoher Geschwindigkeit, Präzision, Flexibilität und Sicherheit, die Sie in einem modernen CAD/CAM-Workflow benötigen.

- Überzeugendes Benutzererlebnis durch patentierte Projektionstechnologie
- Schnelligkeit und Präzision vereint durch ein abgewinkeltes Doppelkamera-Set-up und Hochgeschwindigkeitsmotoren
- Einfache Positionierung durch vollautomatische Objekterkennung
- Augensicheres LED-Blaulicht
- Hybrid-Scan für das Arbeiten ohne Sägeschnitt-Modellvorbereitung.
- Smart Occlusion für das Arbeiten ohne vestibulär Scan.



JETZT NEU

AADVA ALS 3
14.999,- CHF



Sie möchten unseren ALS 3 testen?

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Teststellung unter info.switzerland@gc.dental oder telefonisch unter 041 5200178.

GC Fachberater




EVELINE WANGLER
Produktspezialistin Praxis
Region Basel, Aargau,
Zentralschweiz
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental



MANUELA SCHULER
Produktspezialistin Praxis
Region Ostschweiz, Graubünden,
Zürich und Thurgau
M: 079 326 23 30
manuela.schuler@gc.dental



FELIX GLOOR
Zahntechniker;
Produktspezialist Praxis/Labor
Region Westschweiz, Wallis
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental

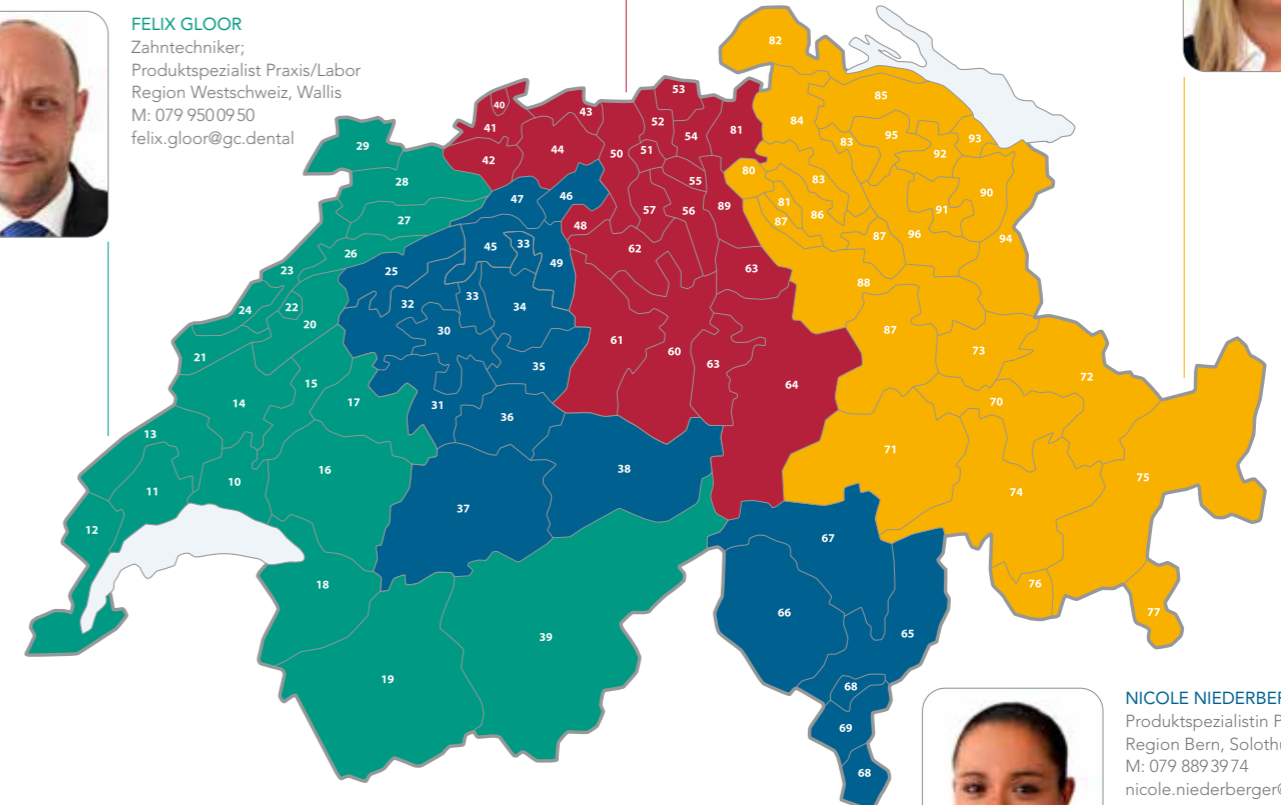

NICOLE NIEDERBERGER
Produktspezialistin Praxis
Region Bern, Solothurn, Tessin
M: 079 889 39 74
nicole.niederberger@gc.dental

Serviceleistungen von GC



Praxisgründungsberatung
Nutzen Sie die Gelegenheit unsere Spezialisten für Ihre Praxisgründung und individuelle Beratung anzufordern. Wir unterstützen Sie gerne!

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Praxisgründung mit optimaler, strukturierter und professioneller Produktelektierung - und dies zu ganz besonderen Konditionen.



Inhouse - Hands-on Workshops
Unsere Produktspezialisten sind jederzeit gerne bereit in Ihrer Praxis/Ihrem Labor Sie und Ihr Team mit verschiedensten Hands-on Workshops zu unterstützen!

Inhouse-Kurse und Workshops sowie Beratung zu individuellen Themen durch unsere GC Produktspezialisten.



Kundenservice
Unser aussergewöhnlicher Kundenservice mit dem jeweiligen Produktspezialisten steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Zusätzlich zu unseren bevorzugten persönlichen Kundenbesuchen bieten wir auch die Möglichkeit der Online-Beratung zu Ihrem individuellen Termin.



Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/gcswitzerland

Besuchen Sie unsere Homepage
<https://www.gc.dental/europe/de-CH>



Besuchen Sie uns auf Instagram:
[gc_switzerland](https://www.instagram.com/gc_switzerland)



Besuchen Sie uns auf Youtube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts

GC Austria GmbH SWISS Office | Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern | T: 041 520 01 78 | info.switzerland@gc.dental | <https://www.gc.dental/europe/de-CH>
GC Austria GmbH | Tallak 124 | A-8103 Gratwein/Strassengel | T: +43.3124.54020 | info.austria@gc.dental | <https://www.gc.dental/europe/de-AT>

Fordern Sie ein Demo-Set

zum Testen an!

Labolight DUO

Mit der Entwicklung der Labolight DUO bietet GC jetzt ein multifunktionelles Lichthärtegerät für den Techniker, das zwei Härtingsmodi kombiniert.

Vorhärtung - Step Modus | Endhärtung - Vollmodus

Mit der neuesten LED-Technologie

Das Labolight DUO ist mit einer zweiwelligen LED-Technologie ausgestattet, die jedes GC Komposit sicher und dauerhaft härtet.

Es verfügt über einen Wellenlängenbereich von 380 nm - 510 nm mit maximalen Spektralbereichen von:

- 465 nm - 485 nm (12 blaue LEDs)
- 390 nm - 400 nm (3 lilafarbene LEDs)

Diese Technologie gewährleistet einerseits eine optimale Härtung von allen lichtgehärteten Dentalwerkstoffen und verkürzt andererseits die Lichthärtungszyklen durch die höhere Leistung.



Automatisches Drehsystem

Die Reflektionsplatte streut das Licht effektiv und belichtet Ihre Werkstoffe von allen Seiten. Auf der Halterung der Härtungslampe werden die Objekte während sämtlicher Lichthärtungszyklen sicher positioniert.



Kompaktes, ergonomisches Design

Die Labolight DUO von GC kann nicht nur den Grossteil Ihrer Arbeiten fertigstellen. Es sieht dabei auch noch gut aus. Das preisgekrönte, schlanke, moderne Design mit den glatten Oberflächen lässt sich ganz einfach reinigen und in Ihrem Labor platzsparend aufstellen. Das Design ist zudem auch noch anwenderfreundlich: Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und intuitiv. Die inneren Komponenten sind dank der breiten Öffnung leicht zugänglich.



Zwischenhärtungs-Modus



Endhärtungs-Modus

SONDERPREIS
10% **2.939,22** CHF
~~3.265,80~~ CHF

Art.-Nr. 10001246 **Labolight DUO**
2.939,22 CHF anstatt 3.265,80 CHF

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GRADIA® PLUS

Modulares Kompositsystem für indirekte Restaurationen

Ein neuer Standard für natürliche Mischungen und die Reproduktion von Farben



Technisches Handbuch GRADIA PLUS




Farbtabelle GRADIA PLUS

- Innovation trifft Indikation
- Keramikpolymer-Technologie
- Rot & Weiss-Ästhetik
- Indikationsspezifische Konsistenz
- Effizient, modular und ökonomisch
- Lichthärtung: LED-Technologie

PREISVORTEIL
7+1

Erhalte 8 Pkg. GRADIA PLUS Nachfüllpackungen (Refill) zum Preis von 7!

Farbmix möglich. Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

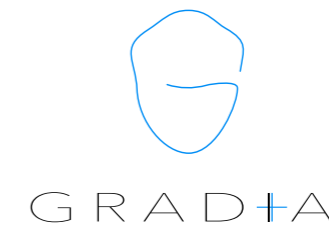

PREISVORTEIL A
35% **1.565,79** CHF
~~2.408,90~~ CHF

GRADIA PLUS Combi-Set A
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1094,90 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 691,60 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 CHF

PREISVORTEIL B
35% **2.210,-** CHF
~~3.400,-~~ CHF

GRADIA PLUS Combi-Set B
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1094,90 CHF
Art.-Nr. 10003652 **Layer Pro Set** 991,10 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 691,60 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 CHF

PREISVORTEIL C
35% **1.251,19** CHF
~~1.924,90~~ CHF

GRADIA PLUS Combi-Set C
Art.-Nr. 10003562 **One Body Set** 610,90 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 691,60 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 CHF

PREISVORTEIL D
35% **868,99** CHF
~~1.336,90~~ CHF

GRADIA PLUS Combi-Set D
Art.-Nr. 10003561 **GUM Set** 714,50 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 622,40 CHF

Die Farben sind auch als Einzelnachfüllpackungen erhältlich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Jetzt mit neuer Kuvette für die Injectionstechnik.



Kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater für weitere Informationen!

Optimale Verklebung
von Hybrid-Abutments!

GC FUJIROCK® EP

Eine bewährte Produktlinie in verschiedenen Versionen für alle Ansprüche und Anwendungen



GC FUJIROCK EP PREMIUM

Die FUJIROCK EP Premium Line wurde für eine Vielzahl von High-End-Techniken wie zum Beispiel Implantatsuprakonstruktionen und Vollkeramik Indikationen entwickelt. Ein für anspruchsvolle Fälle aus Fujirock EP Premium Line gefertigtes Gips/Meistermodell erfüllt alle Anforderungen des Workflows und bewerkstelligt eine perfekte Basis für die Modellation, Zahnfleischmaske, digitales Scannen, Auf- und Anpassen Ihrer zahntechnischen Arbeit sowie das Individualisieren und Polieren.



GC FUJIROCK EP CLASSIC

Einer der weltweit beliebtesten Typ 4 Stumpfgipse mit höchster Qualität Fujirock EP Classic, der „Klassiker“ eignet sich ideal für alle Arten von prothetischen Arbeiten. Er vereint höchste Präzision, hervorragende Kanten- und Druckfestigkeit. Fujirock EP Classic ist dünnflüssig und dennoch thixotrop und erlaubt somit beste Handlungseigenschaften und einfaches, luftblasenfreies Ausgiessen. Ein wirklich perfekter Allround-Gips.

**20 %
PREIS
VORTEIL**

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater. Angeführte Preise gelten pro Packung.

FUJIROCK EP
Classic Line
Art.-Nr. 10003220
**FUJIROCK EP
Classic Line,
Golden Brown**, 12 kg
81,20 CHF
anstatt 101,50 CHF

Art.-Nr. 10003218
**FUJIROCK EP
Classic Line,
Golden Brown**, 5 kg
42,24 CHF
anstatt 52,80 CHF

Art.-Nr. 10003219
**FUJIROCK EP
Classic Line,
Topaz Beige**, 5 kg
46,56 CHF
anstatt 58,20 CHF



GC FUJIROCK EP
Premium Line
Art.-Nr. 10003242
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Pastel Yellow**, 4 kg
Art.-Nr. 10003244
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Polar White**, 4 kg

Art.-Nr. 10003245
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Inca Brown**, 4 kg
Art.-Nr. 10003246
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Titanium Grey**, 4 g

38,08 CHF
anstatt 47,60 CHF

Art.-Nr. 10003243
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Pastel Yellow**, 11 g
82,88 CHF
anstatt 103,60 CHF

OPTIGLAZE color

Lichthärtende Oberflächenversiegelung zur Individualisierung indirekter Kompositrestaurationen



Art.-Nr. 10001150 **OPTIGLAZE color Set**;
Inhalt: 1 x OPTIGLAZE color A plus, 1 x B plus,
1 x C plus, 1 x white, 1 x ivory white, 1 x yellow,
1 x orange, 1 x pink orange, 1 x red brown,
1 x olive, 1 x grey, 1 x blue, 1 x lavender, 1 x pink,
1 x red (pro Farbe 2,6 ml); 1 x OPTIGLAZE color
clear, 1 x clear HV, (pro Farbe 5 ml);
5 x disposable pallet, 1 x protective cover,
1 x brush round 5 Stk. (N°1B), 1 x brush flat 5 Stk.
(N°1B), 2 x brush holder (1 each ivory, white),
1 x OPTIGLAZE color IFU, 1 x OPTIGLAZE color
Technique Card; 773,00 CHF pro Packung

Zur Charakterisierung aller Komposite und PMMA-Kunststoffe

- Direkte & indirekte Kompositrestaurationen
- Prothesen und Konfektionszähne
- Provisorien
- Gefräste Restaurationen mit Kompositblöcken
- Gefräste PMMA-Ronden und -Blöcke

PREISVORTEIL
4 + 1 AB 63,80 CHF

OPTIGLAZE® color Nachfüllpackung
Art.-Nr. 10001151 **OPTIGLAZE color, A plus**
Art.-Nr. 10001152 **OPTIGLAZE color, B plus**
Art.-Nr. 10001153 **OPTIGLAZE color, C plus**
Art.-Nr. 10001154 **OPTIGLAZE color, White**
Art.-Nr. 10001155 **OPTIGLAZE color, Ivory White**
Art.-Nr. 10001156 **OPTIGLAZE color, Yellow**
Art.-Nr. 10001157 **OPTIGLAZE color, Orange**
Art.-Nr. 10001158 **OPTIGLAZE color, Pink Orange**
Art.-Nr. 10001159 **OPTIGLAZE color, Red Brown**
Art.-Nr. 10001160 **OPTIGLAZE color, Olive**
Art.-Nr. 10001161 **OPTIGLAZE color, Grey**
Art.-Nr. 10001162 **OPTIGLAZE color, Blue**
Art.-Nr. 10001163 **OPTIGLAZE color, Lavender**
Art.-Nr. 10001164 **OPTIGLAZE color, Pink**
Art.-Nr. 10001165 **OPTIGLAZE color, Red**
Preis pro Einzelpackung 63,80 CHF à 2,6 ml

Art.-Nr. 10001166 **OPTIGLAZE color, Clear**
Art.-Nr. 10001167 **OPTIGLAZE color, Clear HV**
Preis pro Einzelpackung 63,80 CHF à 5 ml

G-CEM ONE™

Extraorale Verklebungen von Hybrid-Abutments

G-CEM ONE ist ein dualhärtendes, selbstadhäsives Befestigungskomposit zum Verkleben aller Keramiken, Metall und Kompositrestaurationen. Die Eigenschaften und Vorteile gewährleisten zudem auch den optimalen Einsatz beim Verkleben von laborgefertigten Abutments im Labor. Durch die optimierte Dunkelhärtung gewährleistet G-CEM ONE hervorragende Ergebnisse sowie eine sichere Aushärtung - auch in Fällen in denen die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigt ist. Durch die Verwendung von MDP in G-CEM ONE wird eine hohe und dauerhafte Haftfestigkeit sowohl zu Titan als auch zu Zirkonoxid erzielt, ohne die Vorbehandlung durch zusätzliche Primer. Bei Glaskeramiken wird die Vorbehandlung durch Silan empfohlen. Mit der dünnsten am Markt verfügbaren Filmstärke von nur 5µm gewährleistet es die optimal Passung Ihrer Prothetik.* G-CEM ONE ist in einer Automix-Spritze erhältlich und gewährleistet mit wenigen Komponenten und Arbeitsschritten reproduzierbare Befestigungsergebnisse.

Für die Befestigung wird G-CEM ONE, Farbe AO3 (opak) empfohlen. Die Spritzenöffnungen vor dem Aufsetzen der Automix-Tips überprüfen. Eine geringe Materialmenge herausdrücken und verwerfen bevor Material auf die Klebeflächen aufgetragen wird. Abhängig von Ihren ästhetischen Anforderungen, ist G-CEM ONE auch in der Farbe White Opaque (weiss opak) erhältlich.

*Alle Daten auf Anfrage erhältlich



PREISVORTEIL
4 + 1 68,40 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 5 Nachfüllpackungen G-CEM ONE zum Preis von 4!

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit der Nachfüllpackungen (Refill) gültig.

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10006923

G-CEM ONE

Single Refill AO3

Art.-Nr. 10006924

G-CEM ONE

Single Refill Weiss Opak

Inhalt pro Single Refill:
1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
8 x GC Automix Tips Regular,
2 x GC Automix Endo Tips;
Preis pro Packung 68,40 CHF

Weitere Details siehe Seite 20 im Praxisteil.

Zubehör:

Art.-Nr. 10003289

Automix Tip for Endo

10 Stk. mit Verlängerungstip;
13,50 CHF

Art.-Nr. 10003335

Automix Tip Regular

10 Stk.; 12,50 CHF



Opake Farben — AO3 — Weiss Opak

Fordern Sie die Verarbeitungsanleitung für extraorale Verklebung von Hybrid-Abutments mit G-CEM ONE an.



Aadva-Abutment mit Titanbasis mit Schraube



Modell mit Implantatanalog + Abutment auf Ti-Basis + Gingivamaske (okklusale Ansicht)



Implantat Analog mit Gingiva-Maske (laterale Ansicht)



Implantat Analog + Ti-Basis-Abutment + Vollkeramik-Krone (Zirkonoxid-Basis)


Initial LiSi

Verblendkeramik für Lithium-Disilikat
Ein Farbsystem – ein Schichtungssystem

- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Niedrige Brenntemperatur und exakt aufeinander abgestimmter WAK-Wert mit sehr hoher Brennbarkeit
- Umfassendes Farb- und Schichtungssystem – Initial-Konzept
- Einfache Handhabung und effiziente Verarbeitung
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse



Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Umsteigerpaket an!

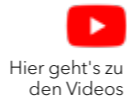

AKTION
JETZT AB 830,50 CHF

Preis pro Packung
Initial LiSi Basic + Advanced Set
Art.-Nr. 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 750,90 CHF
Art.-Nr. 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 910,10 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Initial Zr-FS Multiindikatives Vollkeramik-System

AKTION
JETZT AB 1.946,40 CHF

Preis pro Packung
Initial Zr-FS Basic + Advanced Set
Art.-Nr. 10003119 **Basic Set**; 1946,40 CHF
Art.-Nr. 10003120 **Advanced Set**; 1946,40 CHF
Art.-Nr. 10003168 **Bleach Set**; 359,70 CHF
Art.-Nr. 10003172 **Gum Shades Set**; 325,40 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL
5+1 INITIAL ZR-FS
INITIAL MC

Erhalte 6 Nachfüllpackungen von Initial Zr-FS oder Initial MC zum Preis von 5!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater und innerhalb der gleichen Verpackungseinheit.

Initial MC Metall-Keramik

AKTION
JETZT AB 2.090,65 CHF

Preis pro Packung
Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set
Art.-Nr. 10003150 **Basic Set mit Pulver-Opaquer**; 1709,10 CHF
Art.-Nr. 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaquer**; 1546,10 CHF
Art.-Nr. 10003151 **Basic Plus Set mit Pulver-Opaquer**; 1700,30 CHF
Art.-Nr. 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer**; 1590,30 CHF
Art.-Nr. 10003113 **Advanced Set**; 1044,90 CHF
Art.-Nr. 10003170 **Gum Shade Set (Pulver-Opaquer)**; 286,60 CHF
Art.-Nr. 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaquer)**; 255,30 CHF
Art.-Nr. 10003165 **Bleach Set**; 351,80 CHF
Art.-Nr. 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaque Set**; 589,50 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Initial LiSi Press

Die innovative Press-Keramik kombiniert beeindruckende Stärke mit hervorragender Ästhetik



Das werden Sie an Initial LiSi Press lieben:


- Sehr hohe Biegefestigkeit
- Hervorragende Ästhetik
- Deutliche Zeitersparnis
- Nahezu keine Reaktions-schicht beim Ausbetten
- Schont die Antagonisten und ist abrasionsstabil

PREISVORTEIL
7% **89,75 CHF**
9+1 ~~96,50 CHF~~


Preis pro Packung
Erhalte 10 Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) zum Preis von 9!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater

INITIAL LISI
INITIAL ZR-FS
INITIAL MC
INITIAL LISI PRESS
LISI PRESSVEST

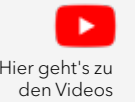

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Kalibrierset an!

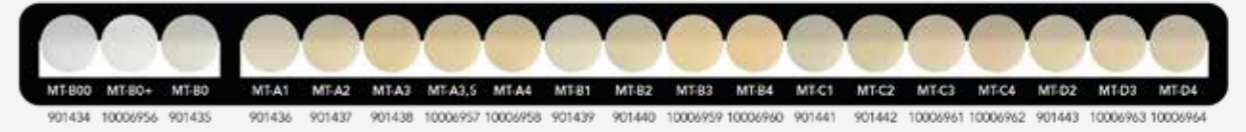


Low Translucency (LT)



Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Medium Opacity (MO)

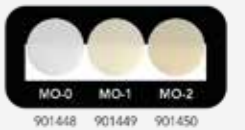

Diese Tabelle ist nur als Orientierungshilfe gedacht.

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre Initial LiSi Press Keramik beraten und holen Sie sich Ihre speziellen Angebote ab.

GC LiSi PressVest Phosphatgebundene Einbettmasse für Presskeramikverfahren (Typ I) Klasse 2

Einbetten und Pressen: Durch die Verwendung eines Trennmittels im Einbettmassenpulver und des GC LiSi PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt, so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abzustrahlende Reaktionsschicht gebildet wird.

Indikationen

Speziell für viele Presskeramikverfahren entwickelt:

- Vollkeramische Pressverfahren: Inlays, Verblendungen und Kronen
- Überpress-Verfahren



- Hohe Fließfähigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Konstante Abbindezeit
- Bessere interne Anpassung
- Mehr zeitliche Flexibilität vor dem Brennvorgang
- Zeitersparnis - hervorragend für die Arbeitsabläufe im Labor
- Größere Ausnutzung der Kapazität beim Anstiften auf den Sockelformer
- Problemloses Entfernen der Reaktionsschicht - keine Flusssäure

PREISVORTEIL
20% **175,76 CHF**
~~219,70 CHF~~

Art.-Nr. 10003661 **GC LiSi PressVest Powder** 100 g x 60, EU/US | 6 kg;
175,76 CHF anstatt 219,70 CHF pro Packung

PREISVORTEIL
20% **35,52 CHF**
~~44,40 CHF~~

Art.-Nr. 10003662 **GC LiSi PressVest Liquid** 900ml, EU/US | 900 ml;
35,52 CHF anstatt 44,20 CHF pro Packung

Weitere Verpackungseinheit:

Art.-Nr. 10003663 **GC LiSi PressVest SR Liquid** 100 ml, EU/US | 100 ml; 67,10 CHF

Initial Zirconia Disk

CAD/CAM-Zirkonoxid-Ronde



Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Die erste Wahl für höchste Ansprüche

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite gewährleistet ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Festigkeit und aussergewöhnlicher Ästhetik und eignet sich sowohl für Frontzahn- wie Seitenzahnrestaurationen.

HERVORRAGENDE ÄSTHETIK

Naturgetreuer Farb- und Transluzenzgradient für Restaurationen im Frontzahn- und Seitenzahnbereich.

HOHE FESTIGKEIT

Eingestuft in Klasse V nach DIN EN ISO 6872 mit einem Mittelwert von > 1100 MPa.

OMNIFUNKTIONAL

Vielseitig und für ein breites Spektrum an klinischen Indikationen geeignet. Für konventionelles und schnelles Sintern.

Physikalische Eigenschaften

- Zirkonoxid Typ II: Klasse V nach DIN EN ISO 6872
- Biegefestigkeit: typischer Mittelwert ≥ 1100 MPa
- Hoher Transluzenzgradient: > 45% bis > 49%
- Schnelles Sintern für Kronen und Brücken mit bis zu 3 Gliedern

Starke Lösungen für schöne Zähne

Mit Initial Zirconia Disk haben Sie die perfekte Lösung für besonders anspruchsvolle Restaurationen und sie passt perfekt zur Initial-Keramik.

Initial Zirconia Disk: Das perfekte Gerüst für anspruchsvolle Fälle

- Hohe Kaubelastung
- Subgingivale Ränder
- Auswahl bei Transluzenz und Schichtstärke
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System
- Mit einem Durchmesser von 98,5 mm und Dicken von 12, 14, 18 und 25 mm passen die Scheiben in die meisten CAD/CAM-Fräsmaschinen

Standard Translucent (ST) und High Translucent Zirconia (HT)

- Front- und Seitenzahnkronen
- Mehrgliedrige Brücken
- Hybrid-Abutments
- Implantatgerüste

Ultrahoch-transluzentes Zirkonoxid (UHT)

- Inlays
- Onlays
- Veneers
- Front- und Seitenzahnkronen
- Dreigliedrige Brücken (einschliesslich Molaren)

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis
10006708	98,5x12 mm	ST	198,20 CHF
10006709	98,5x14 mm		211,10 CHF
10006710	98,5x18 mm		245,40 CHF
10006711	98,5x25 mm		305,60 CHF

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis
10006712	98,5x12 mm	HT	198,20 CHF
10006713	98,5x14 mm		211,10 CHF
10006714	98,5x18 mm		245,40 CHF
10006715	98,5x25 mm		305,60 CHF

PREISVORTEIL


3 + 1 AB 198,20 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen Initial Zirconia Disk ST, HT oder UHT zum Preis von 3!

Aktion für Initial Zirconia Disk ST, HT und UHT innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis
10006716	98,5x12 mm	UHT	198,20 CHF
10006717	98,5x14 mm		211,10 CHF
10006718	98,5x18 mm		245,40 CHF
10006719	98,5x25 mm		305,60 CHF

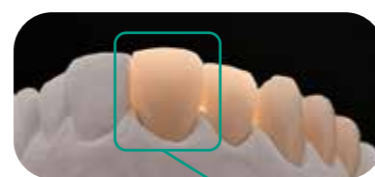

Transluzenz > 49% Festigkeit 800 MPa	5Y	Inzisal	20%
	4-5Y	Übergangsschicht 1	15%
	4-5Y	Übergangsschicht 2	15%
	4-5Y	Übergangsschicht 3	15%
Transluzenz > 45% Festigkeit 1150 MPa	4Y	Zervical	35%

Die Initial Zirconia Disk Multilayer Elite ist erhältlich in allen 16 V-Farben und 3 Bleach-Typen, in den Scheibengrössen 14, 16, 20 und 25 mm jeweils mit einem Durchmesser von 98,5 mm. Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3

INITIAL ZIRCONIA DISK MULTILAYER ELITE

AB 179,- CHF

Art.-Nr. 70017398 bis 70017416
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 14 mm 179,- CHF pro Packung

Art.-Nr. 70017417 bis 70017435
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 16 mm 199,- CHF pro Packung

Art.-Nr. 70017436 bis 70017454
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 20 mm 239,- CHF pro Packung

Art.-Nr. 70017455 bis 70017473
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, 25 mm 278,- CHF pro Packung

Initial Spectrum Stains

2D- und 3D-Lösungen für malbare Keramik

PREISVORTEIL

10% **853,11 CHF**
~~947,90 CHF~~

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003190 **Initial Spectrum Stain Set**

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.



Weitere Verpackungen:

- Art.-Nr. 10006992
GC Initial Spectrum Stain SPS-17
3g, Dark Brown; 56,70 CHF pro Packung
Art.-Nr. 10006993
GC Initial Spectrum Stain SPS-18
3g, Illusion 1; 56,70 CHF pro Packung
Art.-Nr. 10006994
GC Initial Spectrum Stain SPS-19
3g, Illusion 2; 56,70 CHF pro Packung
Art.-Nr. 10006995
GC Initial Spectrum Stain SPS-20
3g, Illusion 3; 56,70 CHF pro Packung

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die **einzigartige revolutionäre Initial™ Spectrum Stains** beraten und **sichern Sie sich Ihre speziellen Angebote!**



Hier geht es zum Technischen Handbuch:



Hier gehts zur Painting Solution Broschüre:



Charakterisierung aussen


Ein breites Anwendungsspektrum

- Malfarben zur Charakterisierung
- Individualisierung der Schichtkeramik
- Breiter WAK-Bereich
- Kompatibel mit allen Arten der Dentalkeramik
- 1 Set für alle Initial Systeme
- 20 Pulverfarben

Initial Zirconia Coloring Liquid

Coloring Liquid für ZrO2

- Ein wasserbasiertes System für die vollständige oder teilweise Einfärbung vorgesinterter Zirkonoxid-Restaurationen
- Die erforderliche Charakterisierungszeit verkürzen
- Zeitsparend, kalkulierbar und massgeschneidert
Das Initial Zirconia Coloring Liquid bietet einen individuellen Ansatz von der Basis bis einschliesslich zahnfleischfarbenen Bereichen.
- Bemalen oder Tauchen

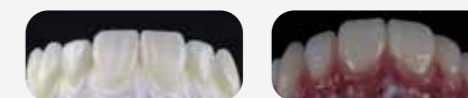

PREISVORTEIL

20% **479,20 CHF**
~~599,- CHF~~

Art.-Nr. 10041648 **Initial Zr Coloring Liquid Set**
479,20 CHF anstatt 599,- CHF

Inhalt: 700 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml:
1 x Body A, 1 x Body B, 1 x Body C, 1 x Body D,
1 x Cervical A, 1 x Cervical B, 1 x Cervical C,
1 x Cervical D, 1 x Effect Blue, 1 x Effect Grey,
1 x Effect Pink, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia
Marking Liquid à 25 ml: 1 x Red, 1 x Blue,
1 x Yellow, 1 x Green, Technisches Handbuch

INITIAL ZIRCONIA COLORING LIQUID SET

**+ INITIAL ZIRCONIA
DISK 12 MM GRATIS**

Kaufe 1 x Initial Zirconia Coloring Liquid Set zum Preisvorteil und erhalte zusätzlich 1 x Initial Zirconia Disk 12 mm gratis!

Aktion gültig nach Absprache mit einem GC Fachberater.



Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. und entsprechen einem mittleren Kurswert von 1,0 (CHF/EUR). Preisrücktümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschliesslich über Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in der Schweiz bis 30.06.2025. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

NEU



Weitere Verpackungseinheiten:

- Art.-Nr. 10041649
Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit;
190,- CHF pro Packung
Inhalt: 250 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml: 1 x Body A, 1 x Cervical A, 1 x Effect Grey, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25 ml: 1 x Red, 1 x Blue, Kurze Gebrauchsanweisung
Nachfüllpackungen à 50 ml; 53,50 CHF
Initial Zr Coloring Liquid: Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D; Effect Blue, Effect Grey, Effect Pink, Neutral
Nachfüllpackungen à 25 ml; 25,00 CHF
Initial Zr Marking Liquid: Red, Blue, Yellow, Green


Initial IQ ONE SQIN

Malbares Farb- und
Micro-Layering-Keramiksysteem



ONE SQIN-Technik - für alle Restaurationen aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat

- Erarbeiten der Form sowie feinsten Texturdetails im nassen Zustand – keine Veränderung durch den Brennvorgang.
- Selbstglasierende Eigenschaften – für ein schönes, glänzendes Finish nach nur einem Brand.
- Optimal eingestellte Fluoreszenz – für einen natürlichen Look in jedem Licht.
- Maximale Ästhetik in einer minimalen Schicht.

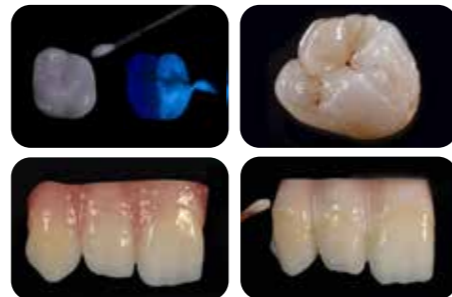

© ZTM Michael Brüsch
© ZTM Stefan M. Roozen

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Farben

Zwei Systeme – ein Ansatz:
Malen Sie Ihre rote und weisse Ästhetik



Art.-Nr. 10003186
Initial IQ One Body LP NF GUM Shades Set
5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g); 4 x Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3 g); 1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF mixing dish; 1 x IQ LP NF Brush A; 1 x IQ LP NF Brush B; 1 x IQ LP NF Plastic Cover; 1 x IQ LP NF, Color Chart; 1 x IQ LP NF; Technical Manual; 461,30 CHF pro Set



Art.-Nr. 10007017
Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-Shades Set
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g; 4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g; 10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE/NF; Refreshing Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE Mixing dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00; 1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Colour Chart; 833,90 CHF pro Set



PREISVORTEIL
5+1 INITIAL
IQ ONE SQIN

Erhalte 6 Nachfüllpackungen von
Initial IQ ONE SQIN zum Preis von 5!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater und
innerhalb der gleichen Verpackungseinheit.

**RISK-FREE
EINFÜHRUNGSAKTION**
~~1.447,60 CHF~~ **1.085,70 CHF**

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006991
Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET
10 x SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3 g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4 g;
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4 g;
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ LP ONE Mixing Dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00
1 x IQ LP ONE Plastic Cover
1 x IQ ONE SQIN Technical Manual;
1 x IQ LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



NEU



**INITIAL IQ
SQIN SHADES SET**
592,20 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006990
Initial IQ SQIN SHADES SET
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ SQIN; Technical Manual



Weitere Verpackungen:

Art.-Nr. 10041666
Initial IQ, SQIN Powder GUM OM
white 10g, 37,- CHF



Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Farben (4 g), 68,40 CHF



Lustre Pastes NF Gum Farben (4 g), 56,70 CHF





Initial IQ
 Lustre Pastes ONE
 V-Farben
 Initial IQ ONE BODY
 Lustre Pastes NF
 Gum Farben
 Initial Spectrum Stains

Initial MC
 Initial Zr-FS
 Initial LiSi

Initial Zirconia Disk
 Initial Zirconia Disk
 Multilayer Elite

Initial IQ
 ONE SQIN

Initial Zirconia
 Coloring Liquid

Initial LiSi Press
 Initial LiSi Block
 Initial LRF

OPTIGLAZE® color
 CERASMART™270



GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JANUAR BIS JUNI 2025

LABOR

