

*initial*TM Lustre Pastes ONE a Spectrum Stains
Painting Solutions

Umění
nabarvit
keramiku



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Dobarvujte estetické náhrady s Initial™ od GC

GC nabízí uživatelům Initial nejmodernější a vysoce estetická řešení pro keramiku, kterou lze dobarvovat. V závislosti na konkrétním případě a požadovaných vlastnostech poskytnou dvě produktové řady, Initial Lustre Pastes ONE a Initial Spectrum Stains, očekávaný výsledek. Jsou vhodné pro celou řadu CTE, takže můžete pracovat s kompletní keramickou řadou GC Initial a téměř se všemi typy jiné keramiky.

Initial Lustre Pastes ONE, jedinečné trojrozměrné dobarvovací pasty na keramiku od GC, dodávají vaší práci fluorescenci, hloubku a autenticitu... a to pouhým dobarvením. K dosažení nepřekonatelné životnosti a přirozeného lesku všech vašich dostaveb už není potřeba složité vrstvení nebo vypalovací cykly navíc.

Initial Lustre Pastes GUM Dásňové odstíny jsou založeny na promyšleném výběru růžově zbarvených keramických částic bez obsahu fluorescence, které dokonale napodobují vzhled přírodní dásně. Reálného přechodu od okraje koruny k dásni tak lze velmi snadno dosáhnout.



Initial Spectrum Stains poskytují dvourozměrné dobarvovací efekty a lze jich použít jak k vnitřnímu, tak vnějšímu barvení. Díky nim dosáhnete velmi vytříbeného konečného výsledku s lesklým povrchem, přičemž textura zůstane zachována.

Lustre Pastes a Spectrum Stains se vzájemně doplňují. V některých případech se používají oba: například Spectrum Stains lze přidat k Lustre Pastes ONE nebo jednotlivým keramickým práškům.

Lustre Pastes Rodina & Spectrum Stains,
jsou kompatibilní s celou řadou keramiky Initial

CTE

$10^{-6} \times K^{-1}$

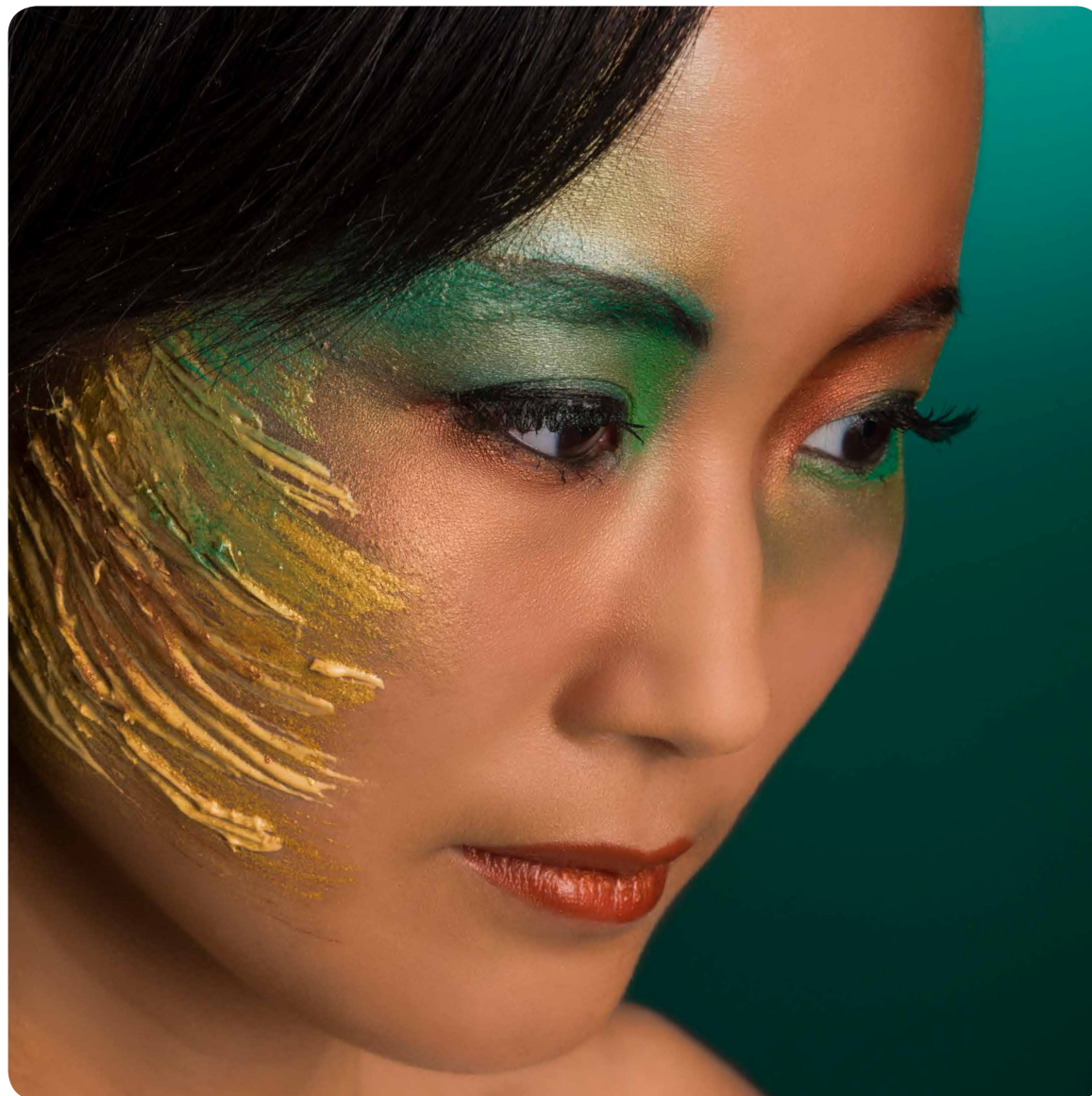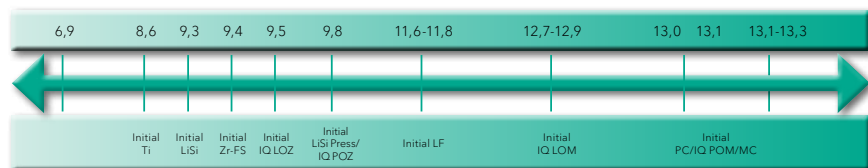

Lustre Pastes ONE V odstíny

S odstíny „Body A-D“ lze požadovaných V odstínů docílit velmi snadno během okamžiku. Za pomoci dalších dostupných odstínů můžete náhrady dále individualizovat, a dosáhnout tak dokonale přizpůsobeného konečného výsledku.

Fluo



Optimální úroveň fluorescence.
Zajišťuje vzhled přirozených zubů za všech světelných podmínek.



Lustre Pastes NF - dásňové odstíny

5 jedinečných dásňových odstínů Lustré Pastes umožňuje individuální přizpůsobení dásní tak, aby ladily s přírodními odstíny v přirozené harmonii. Můžete použít 4 libovolně míchatelné odstíny Gum Modifiers, které umožňují neomezenou kreativitu a bezproblémové reprodukování i nejjemnějších dásňových odstínů.



Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains jsou práškové dobarvovače dostupné v různých 20 barvách, které zvyšují estetiku vašich náhrad.

Bez ohledu na způsob aplikace bude dosaženo velmi jemného konečného výsledku při zachování povrchu textury a zajištění optimální úrovně lesku.



Krásná hloubka s Initial Lustre Pastes ONE

Dokonalé dokončení vašich náhrad

K dosažení nepřekonatelné živosti a přirozeného lesku všech vašich dostaveb již nepotřebujete složité vrstvení nebo vypalovací cykly navíc.

S pastami Initial Lustre Pastes ONE můžete dosáhnout hloubky barev a reálně působícího efektu translucence... pouhým barvením.

Initial Lustre Pastes ONE jsou založeny na speciální směsi jemných keramických částic. Kroky k dokončení vaší práce zůstávají stejné bez ohledu na techniku použitou k vytvoření základu.

Použitím ředicí tekutiny zachováte optimální konzistenci až do konce.

Požadovaný V odstín vytvoříte nanesením Lustre Pastes ONE „Body A-D“. Tento postup zahrnuje vše potřebné k okamžitému vytvoření V odstínů.

Pro lepší charakterizaci jednoduše použijte další dostupné barvy k vytvoření vysoce estetických výsledků.



Výchozí stav



Nanášení LP ONE Neutral Fluo



Nanášení odstínů Body



Konečná náhrada vykazující barvu a lesk

Snadné úpravy

S pastami Initial Lustre Pastes ONE můžete své práce snadno upravovat.

Změnit barvu, jas, šedou světelnost nebo přidat povrchový lesk nikdy nebylo tak snadné!



Jas





Barva



Šedá hloubka

Díky nabarvení keramiky můžete ztvárnit i ty nejjemnější detaily

Lustre Pastes ONE se zlepšenou fluorescencí jsou speciálně vyvinuty pro podporu fluorescence monolitických náhrad a zajistí vzhled přirozených zubů za všech světelných okolností.

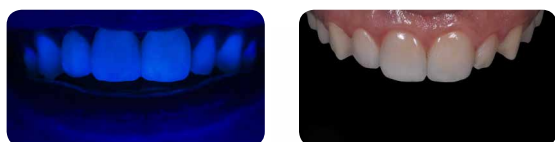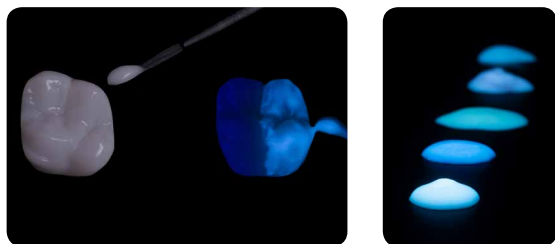

Lustre Sklovinný efekt - opál
Vysoce opalescentní základní pasta pro použití v oblasti incize zubu.




Dodejte svým monolitickým dostavbám charakter...

Jedinečná konzistence zajišťuje stejnorodé úpravy i vzhled. Požadované textury / hladkosti vrstvy Lustre Pastes ONE lze docílit jemnou vibrací nebo kondenzací dostavby. Není potřeba žádného složitého vrstvení nebo vypalovacích cyklů navíc; je to rychlé, snadné a bezpečné. Pasty jsou připravené k použití a mají jemné tixotropní vlastnosti pro snadné a přesné nanášení.




Plně anatomické konstrukce z lithium disilikátu jako LiSi Press lze individualizovat pomocí Lustre Pastes ONE.

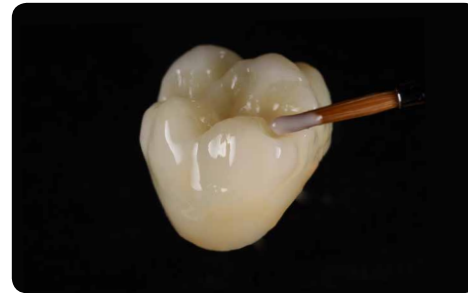

Hledáte způsob, jak dodat život svým zirkonovým monolitickým náhradám zhotoveným pomocí CAD/CAM, jako např. Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes ONE nabízejí řešení pro všechny druhy náhrad.



...nebo je využijte pro hloubkové efekty uvnitř vrstvení.

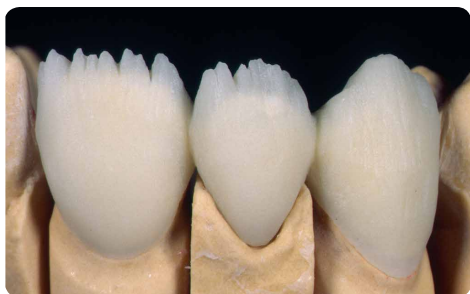

Cut back



Nanášení Lustré Pastes ONE (+vypalování)



Nanášení opálových / incizních hmot (+vypalování)



Konečný výsledek

Dosáhněte těch nejlepších estetických výsledků díky pastám Initial Lustré Pastes ONE s technikou cut-back u lisovaných nebo vrstvených prací. Po nabarvení pomocí Lustré Pastes ONE dokončíte náhradu příslušnými fazetovacími keramickými materiály GC Initial: CL-F pro vysokou translucenci a opálové a sklovinné hmoty pro incizní efekty.



Dobarvěte své červené a bílé estetické náhrady...

Dvě sady, jeden přístup.



Výchozí stav




Nanášení různých dásňových odstínů Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades



Charakterizace pomocí V odstínů



Konečný výsledek

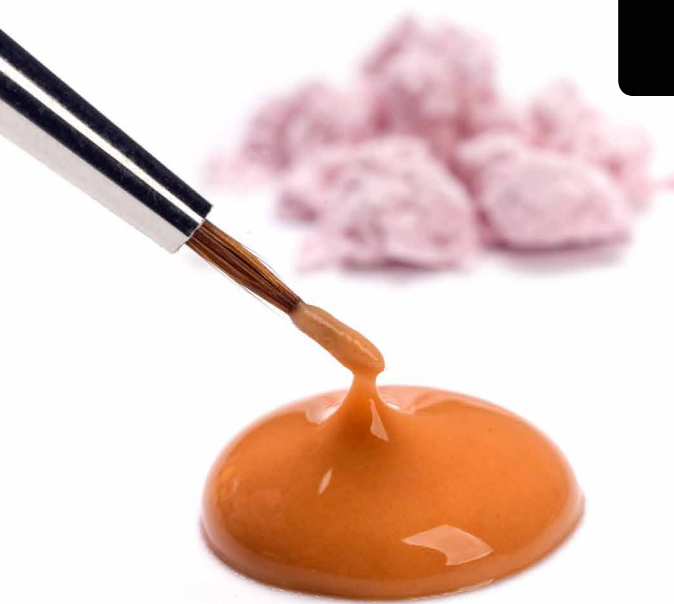

...s přirozeně vypadajícími přechody, a to i na zirkoniových konstrukcích.



Luster Pastes ONE zajišťují optimální úroveň fluorescence a vzhled přirozených zubů za všech světelných podmínek a používají se jako dobarvovací a individualizační vrstva v kombinaci s Initial SQIN - technologie mikrovrstvení.

Vzhledem k narůstající oblibě zirkonových náhrad a dostaveb zhotovených pomocí CAD/CAM nabízí GC řešení k zachování stejných estetických standardů. S Lustre Pastes ONE budou vaše monolitické dostavby vypadat přirozeně a plně života. Jejich unikátní složení umožňuje větší interakci se základním keramickým materiálem a opticky působí jako vrstvená keramika. Díky tomu se zvyšuje trojrozměrný efekt vaší náhrady. V jednoduchosti se skrývá krása!



Rozšiřte své možnosti dobarvení o Initial Spectrum Stains


Initial Spectrum Stains obsahují pigmenty, které jsou sintrované uvnitř skelné matrice, nabízejí stabilitu a umožňují reprodukovatelné a stejné výsledky. S Initial Spectrum Stains můžete vytvářet nekonečné kombinace. Používejte je jak k vnějšímu, tak vnitřnímu barvení. Lze je také přidat ke keramickým hmotám nebo k Initial Lustre Pastes ONE a dosáhnout ještě většího počtu možností!

Dvě konzistence, obě zachovávající texturu


Initial Spectrum Stains lze nanášet v konzistenci preferované uživatelem jako pastu nebo tekutější. Bez ohledu na použitou konzistenci budou konečné výsledky stejné: zabarvení a lesk s velmi jemným rozlišením, zachovávající povrchovou texturu náhrady. Jsou 2D protějškem past Initial Lustre Pastes ONE.



Korunka s jemnou texturou připravená ke glazování

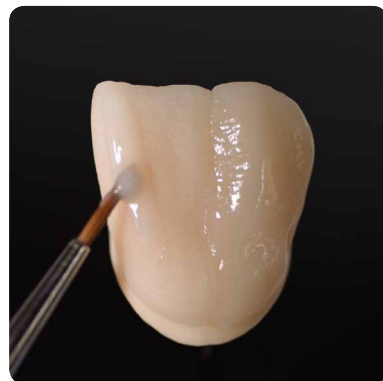

Glazování s tekutou nebo pastovou konzistencí

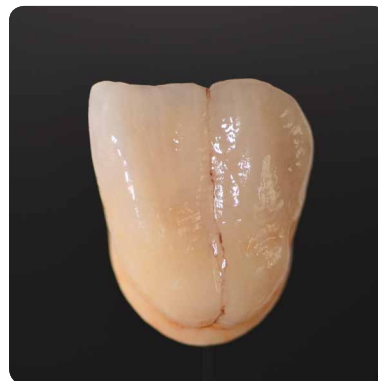

Po vypálení: dobarvená a glazovaná se zachováním jemné textury



Vnitřní dobarvení...



...nebo vnější



2D a 3D řešení dobarvení keramiky... od GC

GC Initial Lustre Pastes Set ONE - V odstíny

- 4 odstíny Body a 1 neutrální k nejsnazšímu dosažení náhrady ve V odstínu.
- 9 efektů, pomocí kterých můžete projevít své umělecké vloh a domalovat bílé skvrny, dekalciфикации, tenké linky a prasklinky.

Složení sady:

- 1 x neutrální (4 g)
- 1 x Neutral Fluo (4 g)
- 1 x Value (4 g)
- 4 x odstín Body (4 x 4 g)
- 8 x odstín se sklovinným efektem (8 x 4 g)
- 1 x ředící tekutina (8 ml)
- 1 x obnovující tekutina (8 ml)
- 1 míchací nádobka
- 2 štětce
- Tabulka barev
- Technický manuál



GC Initial Lustre Pastes Set NF - odstíny dásní

- 5 past v barvě dásní připravených k použití, s ideálními tixotropními vlastnostmi pro snadné a přesné nanášení.
- 4 mísitelné modifikátory dásní umožňující neomezenou kreativitu při kopírování přirozené harmonie dásní.

Složení sady:

- 5 x odstín pro dásně (5 x 4 g)
- 4 x modifikátor barvy pro LP NF (4 x 3 g)
- Ředící tekutina (8 ml)
- Obnovující tekutina (8 ml)
- 1 míchací nádobka
- 2 štětce
- Tabulka barev
- Technický manuál



GC Initial Spectrum Stains

- 16 práškových barev zvýrazňujících estetiku náhrady.
- Dvě konzistence s vylepšeným konečným výsledkem, zachovávající texturu a poskytující optimální úroveň lesku.

Složení sady:

- 16 x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16 x 3 g)
- 1 x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10 g)
- 1 x Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml)
- 1 x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 ml)
- 1 x Initial Spectrum Stains Shade Guide Colour Chart
- Technical Manual

Available as refill:

- GC Initial Spectrum Glaze Powder GL-FLUO (10 g)
- GC Initial Spectrum Stains SPS-17 - SPS-20 (3 g)



*initial*TM Lustre Pastes ONE a Spectrum Stains
Painting Solutions

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<http://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic
V Olšínách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/cs-CZ>