



Pasvorm en comfort voor een actief leven!



RELINE™ II Soft
& RELINE™ II Extra
Soft van GC

Zacht siliconen
reliningmateriaal in cartridge

GC

Pasvorm, comfort en functie voor een glimlach

Veel van uw patiënten leven langer dan ooit tevoren en hebben ook een actiever leven. Zij willen onbezorgd kunnen glimlachen, comfortabel praten en van hun eten genieten op elke leeftijd, ook als ze een prothese dragen. Protheses leiden tot irritatie en extractie, plaatsing van implantaten tot veranderingen in zachte en harde weefsels.

Reline II Soft en Extra Soft van GC passen zich efficiënt aan deze nieuwe omstandigheden aan, want ze vormen een zachte laag tussen de prothese en de slijmvliezen. Dit **ondersteunt de genezing en zorgt voor comfort**. Daarnaast werkt het weken, zelfs tot enkele maanden lang.



Afbeeldingen met dank aan dr. Garcia-Baeza, Spanje

Een gemakkelijk aan te brengen siliconen liner in cartridge

De **ideale viscositeit** van het materiaal maakt het vloeiend onder druk, zodat het precies de anatomische details volgt.

Door de **verbeterde trimmogelijkheid** is de eindafwerking van de randen nu nog gemakkelijker.

Duurzaam comfort en aangename verlichting voor uw patiënten

Met Reline II loopt de temperatuur niet op tijdens het uitharden, wat comfortabeler is voor uw patiënten.

Het materiaal **blijft glad en geurloos** en behoudt zijn **dimensionale stabiliteit en elasticiteit** weken of maanden lang. Het resultaat? Een duurzame en praktische oplossing voor prothesepatiënten.

Sterke hechting, maar gemakkelijk te onderhouden en aan te passen

De verbeterde samenstelling van **GC Reline II Primer voor kunstthars** biedt **sterke hechting aan de prothese** gedurende een langere tijd. Toch maakt deze sterke hechting het materiaal niet minder flexibel.

U kunt **materiaal toevoegen binnen 3 maanden** na de eerste applicatie, met het oog op veranderingen in de slijmvliezen en het bot. Dankzij de nieuwe **Reline II Remover voor kunstthars** kan de relinerlaag bijzonder snel worden verwijderd en vervangen.



De randen kunnen verder worden beschermd met Reline II afwerkingsmateriaal



Bescherming van de randen met Reline II afwerkingsmateriaal



**GC RELINE II
Primer
voor kunstthars**




**GC RELINE II
Remover
voor kunstthars**

onder alle omstandigheden

Van veerkracht tot elasticiteit:
kies het product dat het best past bij de klinische situatie

Met een hardheid van 32 (Shore A) is **GC RELINE II Extra Soft** een veerkrachtig materiaal. Het is met name nuttig voor het **normaliseren** van geïrriteerd weefsel en het **ondersteunen van de weefselgenezing** na de extractie of na het plaatsen van implantaten. Het kan **dagen of weken** lang op zijn plaats blijven zitten.

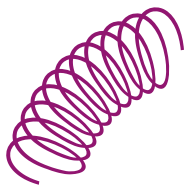

Met een Shore A-hardheid van 48 behoudt **GC RELINE II Soft** zijn elasticiteit in de loop der tijd en **verdeelt het net als een schokdemper de druk** bij anatomische problemen. Het is ook ideaal voor de relining van implantaat ondersteunde prothesen na de genezingsfase. Het kan **weken of maanden** lang op zijn plaats blijven zitten.



Eenvoudige applicatie en verwerking gedurende de hele procedure



Eerste prothese die moet worden gerelined, als gevolg van het aanbrengen van 4 implantaten.



Beslijp het gebied dat moet worden gerelined en ruw het oppervlak op.



Breng GC RELINE II PRIMER aan op het gebied dat gerelined moet worden. Droog voorzichtig met lucht.



Gemakkelijke levering met cartridge.



Breng GC RELINE II (Extra) Soft aan. De verwerkingstijd is 2'00".



Plaats de prothese in de mond en laat de patiënt de functionele mondbewegingen maken. Laat op zijn plaats gedurende 5'00".



Verwijder de overmaat met een scalpel of schaar. Trim met GC RELINE II AFWERKPUNT.



Werk af met GC RELINE II POLIJSTWIEL.



Gerelinede prothese.

RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

Pasvorm en comfort voor een actief leven

Ontdek de complete GC Reline-family



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Materiaal	Acrylhars	A-siliconen	A-siliconen	Acrylhars (vrij van MMA)
Indicaties	<ul style="list-style-type: none"> • Drukplaatsen • Tijdens implantatie-procedures • Zachte relining • Weefselherstel na trauma/chirurgie • Functionele afdrukken 	<ul style="list-style-type: none"> • Weefselharmoniserend materiaal • Gevoelige slijmvliezen • Drukplaatsen • Normaliseren van geïrriteerde weefsels 	<ul style="list-style-type: none"> • Implantatieprocedures • Drukplaatsen • Benige ondersnijdingen • Pijnreductie en comfortverbetering • Duurzame relining bij afwezigheid van ondersteunend weefsel 	<ul style="list-style-type: none"> • Relining voor de lange duur • Niet-passende prothesen zonder weefseltrauma • Laatste stap na voorbehandeling met zachte reliningmaterialen en/of tissue conditioners
Tijd in de mond	Dagen/weken/maand	Dagen/weken	Weken/maanden	Maanden/jaren

Verkrijgbare verpakkingen van Reline II Soft en Extra Soft

Introductiekit

010259 **GC RELINE II Cartridge Soft:**
 1x GC RELINE II Primer voor kunsthars
 1x GC RELINE II Afwerkpunt
 1x GC RELINE II Polijst wiel
 1x GC RELINE II Remover voor kunsthars
 Toebehoren

010262 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:**
 1x GC RELINE II Extra Soft Cartridge
 1x GC RELINE II Primer voor kunsthars
 1x GC RELINE II Afwerkpunt
 1x GC RELINE II Polijst wiel
 1x GC RELINE II Remover voor kunsthars

Refills

010265 GC RELINE II Soft Cartridge, 48 ml
 010268 GC RELINE II Extra Soft Cartridge, 48 ml
 010273 GC RELINE II Primer voor kunsthars, 10 ml
 010271 GC RELINE II Afwerkingsmateriaal (Modifier),
 1-1 verpakking, 2x 9ml
 010275 GC RELINE II Remover voor kunstharsen, 5,5ml
 010277 GC RELINE II Afwerkpunt x 3
 010280 GC RELINE II Polijst wiel x 12
 010283 GC RELINE II Penseel voor eenmalig gebruik x 6

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental
 http://www.gceurope.com

GC EUROPE NV
Benelux Sales Department
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 13
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16 74.18.60
 info.benelux@gc.dental
 http://benelux.gceurope.com

