

# Постейший способ успешного завершения Ваших ортопедических конструкции

Fit Checker Advanced и Fit Checker Advanced Blue от GC - материалы, позволяющие легко и точно оценить качество припасовки конструкции и вовремя внести необходимые изменения непосредственно на приеме, что не только помогает пациенту избежать нежелательных дополнительных расходов в будущем, но и гарантирует ему максимальную степень комфорта.

Fit Checker™ Advanced	Преимущество	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES силикон	Инновационный силиконовый материал, обладающий высокими смазываемостью, текучестью и прочностью	VPES силикон
Белый	Два разных цвета для любых клинических требований	Синий
Рабочее время: 1 мин Время отверждения: 1 мин в полости рта	Достаточное рабочее время и быстрое отверждение в полости рта	Рабочее время: 1 мин Время отверждения: 1 мин в полости рта
Ручное (тубы) или автоматическое (картриджи) замешивание	Картриджи для автоматического замешивания позволяют работать просто, быстро и чисто	Картриджи для автоматического замешивания



## Упаковки

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, упаковка 1-1 (55 г + 50 г), Белый + замедлитель (3 г) + аксессуары
004904	Fit Checker Advanced, картриджи (2 x 62 г), Белый + насадки для смешивания IIS (3) и IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, картриджи (2 x 56 г), Синий + насадки для смешивания IIS (3) и IISS (3)
800006	Диспенсер GC Cartridge Dispenser II
890130	Насадки для смешивания GC Mixing Tips II, 60 x SS (желтые)
800100	Насадки для смешивания GC Mixing Tips II, 60 x SS (розовые)

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com


**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO - Russia  
129626 г. Москва  
Кулаков переулок, д. 13,  
офис 307  
Тел. /926/ 007-21-31  
russia@eoo.gceurope.com  
http://www.eoo.gceurope.com

Официальный импортер и дистрибьютор  
продукции компании ДЖИ СИ в России:  
ООО Крафтвэй Медикал  
129626, Москва  
3-я Мытищинская ул. 16  
Тел. /495/ 232-69-33  
Новый номер: 8-800-100-100-9  
(бесплатные звонки из любого региона)  
Факс. /495/ 737-78-88  
DENTAL@kraftway.ru  
http://www.kraftwaydental.ru



z O L F RU 3 67 06/13

# Fit Checker™ Advanced и Fit Checker™ Advanced Blue

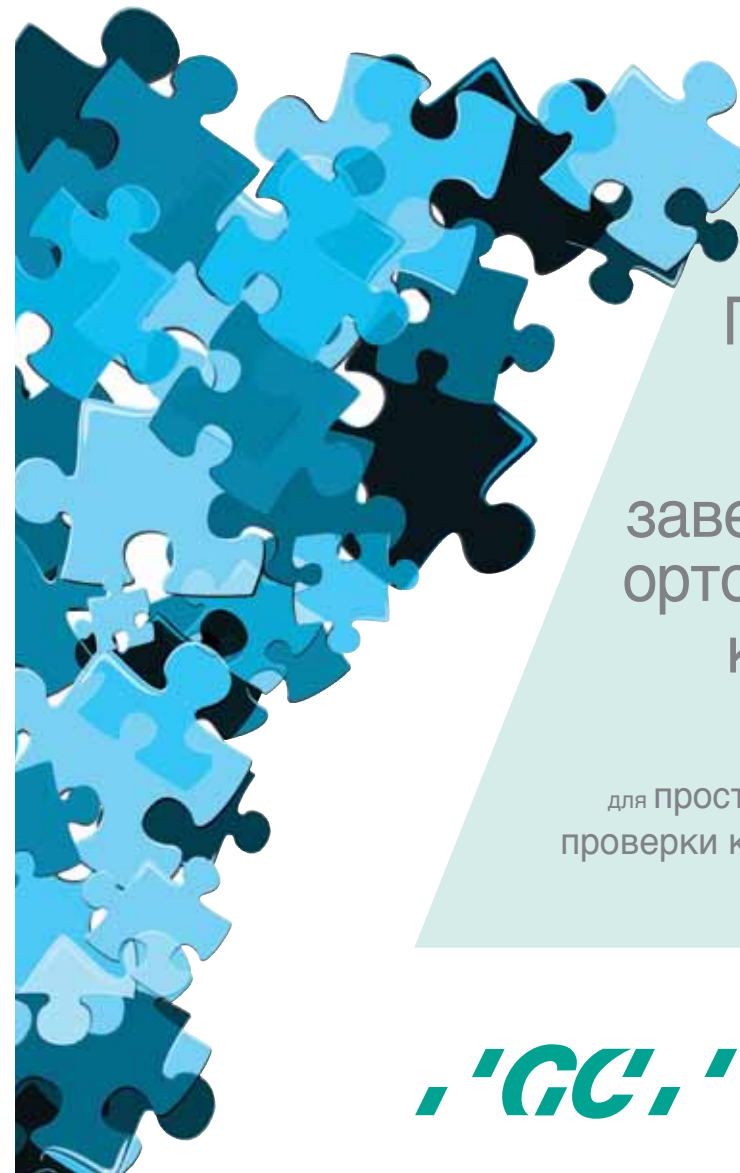

Простейший  
способ  
успешного  
завершения Ваших  
ортопедических  
конструкции

для простой, удобной и точной  
проверки качества припасовки

ортопедической конструкции.



## Fit Checker™ Advanced Blue

### Отчетливая градация СИНЕГО цвета для

- Проверки качества припасовки любых видов ортопедических конструкций, в частности коронок и мостовидных протезов, изготовленных из композита, керамики и на основе оксида циркония.
- Регистрации прикуса и проверки окклюзионных контактов.



Сбалансированные тиксотропические свойства материала обуславливают его **низкотекучую консистенцию**. Под давлением Fit Checker Advanced Blue **легко течет** и образует **очень тонкую пленку**, что гарантирует идеальную припасовку конструкции.



Области неудовлетворительной припасовки легко определить благодаря **оптимальной прозрачности** материала и уникальной **градации синего цвета**.



Наконец Вы можете быть уверены в **идеальной припасовке непрямых реставраций**, избегая дефектов краевого прилегания и коррекции окклюзионных соотношений после цементирования конструкции.

#### 1 Быстрое отверждение

Достаточное рабочее время и быстрое отверждение (1 мин в полости рта) материала дают возможность работать быстро и комфортно.



#### 2 Ясная четкая визуализация

Отчетливая градация цвета обеспечивает моментальную визуализацию окклюзионных контактов и областей неудовлетворительной припасовки.



## Fit Checker™ Advanced

### Отчетливая градация БЕЛОГО цвета для

- Проверки качества припасовки всех видов ортопедических конструкций, например полных и частичных протезов, а также коронок и мостовидных протезов на металлических каркасах.



**Идеальное решение** для проверки уровня адаптации полных и частичных протезов.



Fit Checker Advanced обладает оптимальной консистенцией и высокой смачиваемостью, что позволяет ему **легко адаптироваться** к деталям рельефа протезных базисов и подлежащих мягких тканей. Fit Checker Advanced удобно и просто **удалить в один прием**.



Дефекты прилегания конструкции можно затем исправить, используя перебазировочные материалы. После перебазировки производится повторная проверка качества припасовки, чтобы гарантировать максимальный **комфорт для пациента**.

#### 3 Аккуратная коррекция

Застывший материал не затрудняет обработку бором областей избыточного давления на поверхности конструкции.

#### 4 Легко удаляется

Силиконовая пленка материала легко удаляется, позволяя работать быстро и чисто.

