



*initial*<sup>™</sup>  
IQ ONE SQIN

Systeme ceramique  
avec forme et couleur  
à peindre

**GC**

## 90% des restaurations demandées le sont à partir d'une teinte précise

Depuis quelque temps, il est possible de réaliser des restaurations postérieures à partir d'un seul matériau comme le disilicate de lithium ou la zircone, suffisamment esthétiques et sans recourir à des techniques de stratification laborieuses. Le travail monolithique a le vent en poupe.

Avec **GC Initial IQ ONE SQIN** – le système céramique avec forme et couleur à peindre – des restaurations esthétiques adaptées à la zone antérieure peuvent être réalisées en toute simplicité.

Basé sur la "philosophie IQ" de GC Initial, ce système se compose de différents matériaux céramiques parfaitement adaptés pour être utilisés ensemble afin de finaliser de manière efficace et esthétique les pièces monolithiques et réalisations avec réductions à minima.





*initial*<sup>™</sup>  
IQ ONE SOIN

## Initial IQ Lustre Pastes ONE

La céramique à peindre la plus polyvalente pour la coloration externe ainsi que la caractérisation interne des sous-structures. Lorsqu'elle est utilisée avec SQIN, elle sert également de cuisson de connexion.

- ✓ Consistance prête à l'emploi
- ✓ Fluorescence inhérente
- ✓ Profondeur de couleur 3D

## Initial IQ SQIN

Complète le contour final de vos restaurations en offrant vitalité, texture et brillance naturelle.

- ✓ Forme et texture faciles
- ✓ Effet auto-glaze
- ✓ Structure de surface 3D



## Initial Spectrum Stains

Colorants en fine poudre pour des effets individuels supplémentaires

- ✓ Des nuances de couleurs infinies
- ✓ Se mélangent avec les Lustre Pastes ONE ou SQIN.

Avec **GC Initial IQ ONE SQIN** - le système céramique avec forme et couleur à peindre - vous pouvez rapidement et facilement obtenir des résultats esthétiques élevés, comparables aux restaurations stratifiées conventionnelles, mais avec un gain de temps significatif.



## Comment cela fonctionne ? A vous de choisir ...

### Micro-layering technique (monolithiques avec réductions à minima)

Les Initial Lustre Pastes ONE sont utilisées comme couche de couleur et d'individualisation assurant une cuisson de connexion parfaite avant l'application de la céramique SQIN.

La céramique SQIN peut être appliquée en couche de 0,1-0,6 mm d'épaisseur sur la surface peinte et cuite des Lustre Pastes ONE.

Grâce à leur mélange affiné de verres à base de feldspath, un effet tridimensionnel réaliste est créé, se traduisant par une profondeur de couleur et une translucidité naturelle.

Mélangées au liquide Form et Texture, les poudres SQIN se transforment en une pâte céramique très compacte et dense. Leurs propriétés uniques d'application et de modelage faciliteront la texturation individuelle des surfaces, avec des propriétés « auto-glaze » après cuisson de la céramique.





... ce que vous peignez est ce que vous obtenez après cuisson !

## Painting technique (monolithiques)

Disponibles dans une consistance prête à l'emploi, les GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - céramiques à peindre en 3D à base de feldspath - ajoutent une profondeur aux couleurs et une translucidité réaliste avec un glaçage très naturel à vos restaurations monolithiques.

Elles peuvent être appliquées en couche plus épaisse, garantissant une vitalité inégalée et un glaçage très naturel. Grâce à leur fluorescence inhérente, elles sont parfaites pour renforcer la fluorescence de vos restaurations monolithiques, en particulier lorsque vous utilisez la Lustre Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

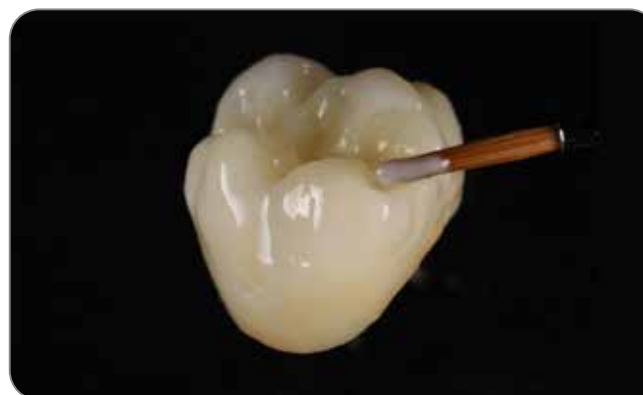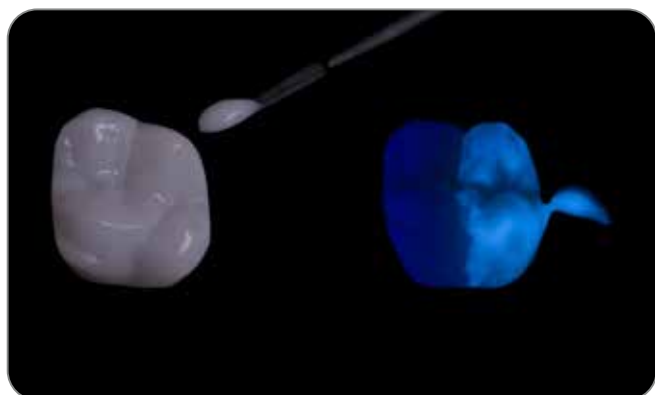

# Esthétique





## La beauté intérieure



Fluorescence



Esthétique rouge & blanche



Une esthétique maximale dans une micro-couche



## Facilité et gain de temps



Créez la forme et une texture délicate dans la phase humide.  
Aucune modification après la cuisson.




Les Initial IQ Lustre Pastes ONE servent également de cuisson  
de connexion.



Propriétés auto-glaze.  
Obtenez une belle finition glacée en une seule cuisson.

# P r a t i q u e

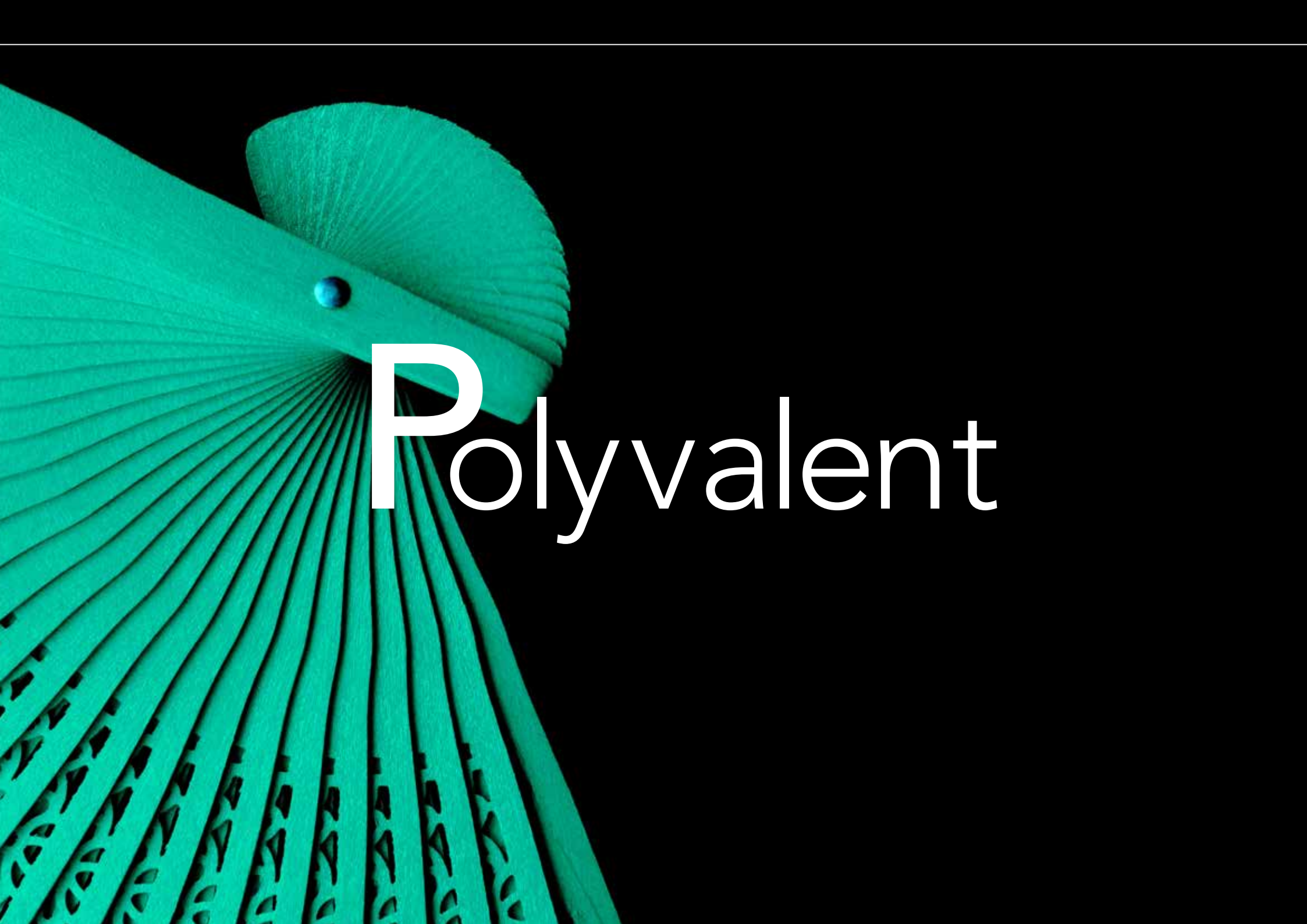

# Polyvalent

## Un seul système ...



... pour toutes vos réalisations tout céramique Zr et LDS  
(disilicate de lithium)



... pour les techniques micro-layering et painting



... pour les restaurations antérieures et postérieures

**ONE SQIN System Set...** pour obtenir facilement des résultats esthétiques élevés, comparables aux restaurations stratifiées conventionnelles mais avec un gain de temps significatif. Contient une sélection des principaux composants céramiques.



### GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g
- 1x SPS Glaze Liquide, 25ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquide, 8ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquide, 8ml
- 5x IQ SQIN Poudre Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
- 5x IQ SQIN Poudre Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
- 1x IQ SQIN Poudre Translucent Opal Booster (TO), 10g
- 3x IQ SQIN Poudre GUM (light, dark, neutral), 10g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquide, 25ml
- 1x IQ LP ONE Mixing Dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Plastic Cover
- 1x IQ ONE SQIN Manuel technique
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x SPS Colour Chart



### GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5x IQ SQIN Poudre Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
- 5x IQ SQIN Poudre Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
- 1x IQ SQIN Poudre Translucent Opal Booster (TO), 10g
- 3x IQ SQIN Poudre GUM (light, dark, neutral), 10g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquide, 25ml
- 1x IQ SQIN Manuel technique



### GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-SHADES SET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
- 4x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquide, 8ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquide, 8ml
- 1x IQ LP ONE Mixing dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x IQ LP ONE Manuel technique



## Technique ONE SQIN - pour toutes vos restaurations en zircone et disilicate de lithium

- ✓ Créez des détails de forme et de texture au stade humide - Aucune modification après la cuisson.
- ✓ Propriétés auto-glaze - Obtenez une belle finition glacée en une seule cuisson.
- ✓ Niveau de fluorescence optimal - Assure l'aspect des dents naturelles sous toutes conditions de lumière.
- ✓ Une esthétique maximale dans une micro-couche.



Photo avec l'aimable autorisation de :  
ZTM Michael Brusch (Allemagne) : p7 (photo du milieu et à droite) ; p9 (photo au milieu à droite et en bas à droite) ; p13 (sauf côté droit de l'image du milieu et côté gauche de l'image en bas à droite)  
MDT Leonardo Cavallo (Italie) : p7 (photo à gauche) ; p9 (photo en haut à gauche)  
MDT Patric Freudenthal (Suède) : p13 (côté droit de l'image du milieu)  
ZTM Stefan Roozen (Autriche) : p6 et p10 ; p13 (côté gauche de l'image en bas à droite)

Dispositif médical pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale.  
Lire attentivement les instructions figurant dans le mode d'emploi avant toute utilisation.  
Organisme certificateur : n°0086 - Distribués par GC France : Classe IIa  
Concept de céramiques de couleur et de forme à peindre pour la réalisation esthétique d'armatures monolithiques  
ou de réalisations avec réductions a minima en dioxyde de zirconium ou en disilicate de lithium.

*initial*<sup>TM</sup>  
IQ ONE SQIN

#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

#### GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin  
94370 Sucy en Brie Cedex  
Tél. +33.1.49.80.37.91  
Fax. +33.1.45.76.32.68  
info.france@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/fr-FR>

**GC**



Since 1921  
100 years of Quality in Dental