

RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

Prianjanje i udobnost za aktivan život



Otkrijte cijelu porodicu GC materijala za podlaganje



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Materijal	Akriolat	Adicijski silikon	Adicijski silikon	Akriolat (bez MMA)
Indikacije	<ul style="list-style-type: none"> Mjesta pritiska Tokom postavljanja implantata Meko podlaganje Liječenje tkiva nakon traume/kirurškog zahvata Funkcijski otisci 	<ul style="list-style-type: none"> Materijal za poboljšanje tonusa tkiva Osjetljiva sluznica Mjesta pritiska Normalizacija iritiranih tkiva 	<ul style="list-style-type: none"> Radovi s implantatima Mjesta pritiska Potkopana koštana područja Smanjenje boli i povećanje udobnosti Dugotrajno podlaganje kod nedostatka potpornog tkiva 	<ul style="list-style-type: none"> Dugotrajno podlaganje Proteze koje ne prijanju Završna faza nakon pripreme terapije materijalima za meko podlaganje i/ili kondicioniranje tkiva
Vrijeme u ustima	Dani/sedmice/mjeseci	Dani/sedmice	Sedmice/mjeseci	Mjeseci/godine

Dostupna pakovanja materijala Reline II Soft & Extra Soft

Intro Kit

010260 **GC RELINE II Soft Intro Kit:** EEP
GC RELINE II Soft patrona (x1)
GC RELINE II Primer for resin (primer za akrilat) (x1)
GC RELINE II Point for Trimming (gumica za obradu) (x1)
GC RELINE II Wheel for finishing (polirer za završnu obradu) (x1)
GC RELINE II Remover for Resin (odstranjivač za akrilat) (x1)

010263 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:** EEP
GC RELINE II Extra Soft patrona (x1)
GC RELINE II Primer for resin (primer za akrilat) (x1)
GC RELINE II Point for Trimming (gumica za obradu) (x1)
GC RELINE II Wheel for finishing (polirer za završnu obradu) (x1)
GC RELINE II Remover for Resin (odstranjivač za akrilat) (x1)

Refill (dopuna)

010266 GC RELINE II Soft patrona, 48 ml EEP
010269 GC RELINE II Extra Soft patrona, 48 ml EEP
010273 GC RELINE II Primer for resin (primer za akrilat), 10 ml
010271 GC RELINE II Finishing Material (Modifier) (materijal za završnu obradu (modifikator)), 2 x 9 ml
010275 GC RELINE II Remover for Resin (odstranjivač za akrilat), 5,5 ml
010277 GC RELINE II Point for Trimming (gumica za obradu) (x 3)
010280 GC RELINE II Wheel for finishing (polirer za završnu obradu) (x 12)
010283 GC RELINE II Disposable Brush (jednokratni kistovi) (x 6)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bosnia and Herzegovina
Carice Milice 11
BIH - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.47.07.36
Fax. +387.51.47.07.36
bosniaherzegovina@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Prianjanje i udobnost za aktivan život



GC
RELINE™ II Soft &
RELINE™ II Extra Soft

Meki silikonski materijali
za podlaganje u patronama

Prianjanje, funkcija i udobnost za osmijeh u svim situacijama

Iritacije, vađenja zubi ili postavljanje implantata dovode do promjena mekih i tvrdih tkiva te **proteze treba prilagoditi novim okolnostima u okruženju.**

Budući da stariji pacijenti sve duže ostaju zdraviji i aktivniji, žele moći nastaviti smijati se, govoriti i jesti u svim situacijama, čak i kad nose proteze.

GC Reline II Soft i Extra Soft izrađeni su za stvaranje mekog sloja između proteze i sluznice, koji tjednima, a čak i do nekoliko mjeseci **pomaže liječenju te održava udobnost i funkciju.**



Slike ustupio dr. Garcia-Baeza, Španija

Silikonski premaz jednostavan za nanošenje u patroni

Idealna viskoznost materijala omogućuje mu **tečenje pod pritiskom**, lijepo se prilagođavajući svim anatomskim detaljima.

Poboljšano obrezivanje dodatno olakšava završnu obradu rubova.

Dugotrajna udobnost i olakšanje za vaše pacijente

Kod materijala Reline II temperatura se neće povećati tokom stvrdnjavanja, što povećava udobnost pacijenata.

Materijal **ostaje gladak i bez mirisa** te zadržava **dimenzijsku postojanost i elastičnost** tokom sedmica i mjeseci. A rezultat? **Trajno i udobno rješenje** za pacijente s protezom.

Snažna adhezija, ali jednostavno održavanje i prilagođavanje

Poboljšani sastav **GC Reline II Primer for Resin (primer za akrilate)** pruža **snažnu adheziju za zubnu protezu**. Međutim, ta ga snažna adhezija ne čini ništa manje fleksibilnim.

Materijal se može dodati kroz tri mjeseca, od prvog nanošenja, kako bi se izvršilo prilagođavanje promjenama sluznice i kosti. Novi **GC Reline II Remover for Resin (odstranjivač za akrilat)** omogućava lako odstranjivanje sloja za podlaganje i njegovu brzu zamjenu.



Poboljšano obrezivanje za bolju završnu obradu rubova



Zaštita rubova materijalom za završnu obradu Reline II



GC RELINE II Primer for Resin (primer za akrilate)




GC RELINE II Remover for Resin (odstranjivač za akrilat)

Slike uz dozvolu prim. D. Seifert, Hrvatska

Od rezilijencije do elastičnosti: odaberite proizvod koji najbolje odgovara kliničkoj situaciji

Tvrdoćom od 32 (Shore A), **GC RELINE™ II Extra Soft** je rezilijentni materijal. Osobito pomaže u **normalizaciji** iritiranih tkiva i **liječenju tkiva** nakon vađenja zubi ili postavljanja implantata. Može se koristiti **danima ili sedmicama**.

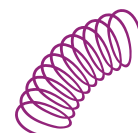

Tvrdoćom od 48 Shore A, **GC RELINE™ II Soft** zadržat će elastičnost s vremenom, poput **amortizera**, šireći **pritisak opterećenja** u slučaju anatomskih problema. Također je idealan za podlaganje **implantatom poduprtih proteza** nakon faze cijeljenja. Može se koristiti **sedmicama ili mjesecima**.



Jednostavno nanošenje i rukovanje, kroz cijeli postupak



Početa proteza za podlaganje, nakon postavljanja 4 implantata.



Odstraniti opterećenje s područja za podlaganje i ohrapaviti površinu.



Nanijeti GC RELINE II Primer na područje za podlaganje. Blago osušiti zrakom.



Jednostavno doziranje iz patrone.



Nanijeti GC RELINE II (Extra) Soft. Vrijeme rada iznosi 2 minute.



Postaviti protezu u usta i izvesti pasivne funkcijske kretnje. Ostaviti u mjestu 5 minuta.



Višak materijala odstraniti skalpelom ili škarama. Obraditi gunicom GC RELINE II POINT FOR TRIMMING.



Završno obraditi polirerom GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING.



Podložena proteza.

Slike ustupio dr. E. D'Incau, Francuska