

Adaptation et confort

pour une vie active



RELINÉ™ II Soft &
RELINÉ™ II Extra Soft
de GC

Silicones de rebasage
souples en cartouches

GC

Fonction, adaptation et confort pour garder le sourire

Les seniors sont de plus en plus nombreux et bénéficient plus longtemps d'une vie active. Nous voulons sourire, parler confortablement et apprécier la nourriture à tout âge, même avec des prothèses dentaires. Si votre patient porte des prothèses dentaires, les irritations, les extractions et la pose d'implant entraîneront inévitablement des changements au niveau des tissus mous et durs.

Reline II Soft et Extra Soft de GC adaptent efficacement les prothèses aux nouvelles situations, car ils créent une couche souple entre la prothèse et la muqueuse. Cela permettra **la guérison des tissus et le maintien du confort et de la fonction** pendant des semaines, jusqu'à plusieurs mois.



Photos du Dr. Garcia-Baeza, Espagne

Une couche de silicone facile à appliquer grâce à sa distribution en cartouche

Une **viscosité idéale** qui **s'écoule sous pression, s'adaptant parfaitement** à tous les détails anatomiques.

Confort durable et soulagement pour vos patients

Avec RELINE II, pas d'augmentation de température pendant la prise pour plus de confort.

Le matériau **reste lisse et sans odeur et maintient stabilité** dimensionnelle et élasticité pendant des semaines ou des mois. Le résultat ? Une **solution durable et pratique** pour vos patients.

Adhésion puissante, mais facile à entretenir et à ajuster

La composition améliorée du primer **GC RELINE II offre une longue et puissante adhésion à la prothèse**. Toutefois, cette adhésion ne le rend pas moins souple.

Vous pouvez **ajouter du matériau dans les 3 mois** qui suivent la première application afin de s'adapter aux changements de la muqueuse et de l'os.

Le nouveau **RELINE II remover pour résine** permet de retirer la couche de rebasage et de la remplacer très rapidement.



Plus facile à tailler pour une meilleure finition des marges



Les marges peuvent être protégées avec Reline II finishing



**GC RELINE II
Primer
for resin**




**GC RELINE II
Remover
for resin**

en toutes circonstances

De la résilience à l'élasticité : choisir le produit le mieux adapté à la situation clinique

Doté d'une dureté de Shore A de 32, **GC RELINE™ II Extra Soft** est un matériau résilient. Il est particulièrement utile de normaliser les tissus irrités et de soutenir la cicatrisation des tissus après **extraction ou chirurgie** implantaire. Il peut rester en place pendant **des jours ou des semaines**.

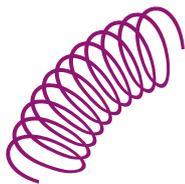

Avec une dureté Shore A de 48, **GC RELINE™ II Soft** maintiendra son élasticité dans le temps et, tout comme un amortisseur, écarte la charge de pression en cas de problèmes anatomiques. Il est également idéal pour rebaser les prothèses implantaires après la phase de guérison. Il peut rester en place pendant **des semaines ou des mois**.



Application et manipulation simples, tout au long de la procédure



Prothèse à rebaser, suite à la mise en place de 4 implants.



Evider la surface à rebaser et la rendre rugueuse.



Appliquer GC RELINE PRIMER R sur la zone à rebaser. Séchez soigneusement.



Distribution aisée avec la cartouche.



Appliquer GC RELINE II (Extra) Soft. Temps de travail de 2'00" à 23 °C.



Positionner la prothèse en bouche et faire effectuer des mouvements masticatoires. Laisser en place pendant 5'00".



Retirer les excès avec un scalpel ou des ciseaux. Ajuster avec GC RELINE II POINT FOR TRIMMING.



Finir avec GC RELINE II wheel for finishing.



Prothèse rebasée.

RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

Adaptation et confort pour une vie active

Découvrez la gamme GC de matériaux de rebasage GC



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Matériau	Résine acrylique	A-Silicone	A-Silicone	Résine acrylique (sans MMA)
Indications	<ul style="list-style-type: none"> • Points de pression • Au cours de la procédure d'implant • Rebasage souple • Récupération tissulaire après traumatisme/chirurgie • Empreinte fonctionnelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Tonifier les tissus • Muqueuse sensible • Points de pression • Normalisation des tissus irrités 	<ul style="list-style-type: none"> • Cas d'implant • Points de pression • Crêtes osseuses • Réduction de la douleur et amélioration du confort • Rebasage à long terme si manque de tissus de soutien 	<ul style="list-style-type: none"> • Rebasage longue durée • Prothèses non adaptées sans aucun traumatisme tissulaire • Étape finale après un pré-traitement avec des matériaux de rebasage souple et/ou conditionneurs de tissus
Temps en bouche	Jours/semaines/mois	Jours/semaines	Semaines/mois	Mois/années

Conditionnement des Reline II Soft & Extra Soft

Intro Kit

010259 **GC RELINE II Soft Intro Kit :**
 1 cartouche Reline II (Soft ou Extra Soft),
 1 Primer for Resin
 1 Point for Trimming
 1 Wheel for Finishing
 1 Remover for Resin

010262 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit :**
 1x GC RELINE II Extra Soft Cartridge
 1x GC RELINE II Primer for Resin
 1x GC RELINE II Point for Trimming
 1x GC RELINE II Wheel for finishing
 1x GC RELINE II Remover for Resin

Recharge

010265 GC RELINE II Soft cartouche de 48ml
 010268 GC RELINE II Extra Soft cartouche de 48ml
 010273 GC RELINE II Primer for Resin, 10 ml
 010271 GC RELINE II Finishing Material (Modifier),
 1-1 Pack, 2x 9ml
 010275 GC RELINE II Remover for Resins, 5,5ml
 010277 GC RELINE II Point for Trimming x3
 010280 GC RELINE II Wheel for Finishing x 12
 010283 GC RELINE II Disposable Brush x 6

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC EUROPE NV
Benelux Sales Department
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 13
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16 74.18.60
 info.benelux@gc.dental
<http://benelux.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH
 Swiss Office
 Bergstrasse 31c
 CH-8890 Flums
 Tel. +41.81.734.02.70
 Fax. +41.81.734.02.71
 info.switzerland@gc.dental
<http://switzerland.gceurope.com>

