



Fit e comfort  
per una vita attiva!



RELINE™ II Soft e  
RELINE™ II Extra Soft  
di GC

Ribasanti morbidi  
a base siliconica in cartuccia

**GC**

# Fit, comfort e funzionalità per continuare a sorridere

L'aspettativa di vita dei nostri pazienti si è allungata e molti di loro hanno una vita attiva. Pertanto, noi vogliamo garantire che possano sorridere tranquillamente, parlare senza disagi e gustare **il cibo a qualunque età, anche se sono portatori di protesi mobili**. Le protesi mobili, le irritazioni, le estrazioni e gli impianti causano modifiche dei tessuti molli e duri.

Creando uno strato morbido tra la protesi e la mucosa, **Reline II Soft ed Extra Soft di GC** permettono di adattare perfettamente le protesi. In questo modo si facilita la guarigione e si mantiene un buon livello di comfort e funzionalità per settimane o perfino mesi.



Immagini gentilmente fornite dal Dott. Garcia-Baeza, Spagna

## Ribasante siliconico in cartuccia facile da applicare

Grazie alla sua **viscosità ideale**, il materiale **scorre sotto pressione e si adatta** bene a tutti i dettagli anatomici.

Inoltre, è più facile da **sgrossare** e di conseguenza la rifinitura dei margini è ancora più semplice.



Sgrossatura più efficace per una miglior rifinitura dei margini

## Confort duraturo e sollievo delicato per i pazienti

Con Reline II, la temperatura non aumenta durante la fase di indurimento e di conseguenza il confort per i pazienti risulta maggiore.

Il materiale **rimane liscio e inodore** e mantiene **stabilità dimensionale ed elasticità** per settimane o perfino mesi. Il risultato è una soluzione duratura e comoda per i pazienti portatori di protesi mobili.



I margini possono essere protetti ulteriormente applicando il materiale per rifinitura Reline II

## Adesione forte, facile manutenzione e adattamento

Grazie alla composizione migliorata del **primer per resine GC Reline II**, **l'adesione alla protesi rimane forte** più a lungo ma contemporaneamente il materiale rimane flessibile.

Fino a **3 mesi** dopo la prima applicazione, si può aggiungere altro materiale per adattare la protesi ai cambiamenti della mucosa e dell'osso. Il nuovo **Reline II Remover** permette di rimuovere lo strato di ribasatura e di sostituirlo molto velocemente



**GC RELINE II  
Primer  
for resin**




**GC RELINE II  
Remover  
for resin**

# in qualunque circostanza

Dalla resilienza all'elasticità:  
scegliete il prodotto più adatto a ciascuna situazione clinica

Con un valore di Durezza pari a 32 (Shore A), **GC RELINE II Extra Soft** è un materiale resiliente e risulta particolarmente utile per normalizzare i tessuti irritati e **facilitare la guarigione dei tessuti** dopo un'estrazione o una chirurgia implantare. Può rimanere in situ per **giorni o settimane**.

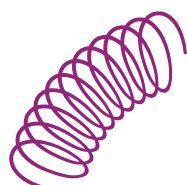

Con un valore di Durezza pari a 48 (Shore A), **GC RELINE II Soft** mantiene la sua elasticità nel tempo e, similmente a un **ammortizzatore**, **distribuisce il carico di pressione** in presenza di problemi anatomici. Il prodotto è ideale anche per ribasare le protesi su impianti successivamente alla fase di guarigione. Può rimanere in situ per **settimane o mesi**.



Applicazione diretta e buona maneggevolezza durante l'intera procedura



Protesi mobile iniziale da ribasare dopo il posizionamento di 4 impianti.



Ridurre l'area da ribasare e irruvidire la superficie.



Applicare GC RELINE II PRIMER sull'area da ribasare. Asciugare con getto d'aria delicato.



Facile erogazione da cartuccia.



Applicare GC RELINE II (Extra) Soft. Il tempo di lavorazione è di 2'00".



Posizionare la protesi in bocca e modellare i margini. Tenere in situ per 5'00".



Eliminare il materiale in eccesso con un bisturi o con le forbici. Sgrossare con GC RELINE II POINT FOR TRIMMING.



Rifinire con GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING.



Protesi ribasata.

# RELINE™ II Soft e RELINE™ II Extra Soft

## Fit e comfort per una vita attiva

Scoprite l'intera gamma dei materiali ribasanti



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
<b>Materiale</b>	Resina acrilica	Silicone A	Silicone A	Resina acrilica (priva di MMA)
<b>Indicazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Punti di pressione durante procedure implantari</li> <li>Ribasatura soffice</li> <li>Guarigione dei tessuti dopo traumi/procedure chirurgiche</li> <li>Impronte funzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tonificazione dei tessuti</li> <li>Sensibilità della mucosa</li> <li>Punti di pressione</li> </ul> Normalizzazione dei tessuti irritati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizionamento di impianti</li> <li>Punti di pressione</li> <li>Sottosquadri nell'osso</li> <li>Riduzione del dolore e miglioramento del comfort</li> </ul> Ribasatura a lungo termine nei casi in cui manca tessuto di supporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ribasatura a lungo termine</li> <li>Maladattamento di protesi senza traumi tissutali</li> </ul> Ultimo passaggio dopo il trattamento preliminare con materiali soffici per ribasatura e/o condizionatori per tessuti
<b>Permanenza in bocca</b>	Giorni/settimane/mesi	Giorni/mesi	Settimane/mesi	Mesi/anni

### Confezioni di Reline II Soft ed Extra Soft

#### Intro Kit

010259 **GC RELINE II Soft:**  
 010262 **GC RELINE II Extra Soft :**  
 1x GC RELINE II Soft Cartridge  
 1x GC RELINE II Primer for Resin  
 1x GC RELINE II Point for Trimming  
 (punte per sgrossatura),  
 1x GC RELINE II Wheel for finishing  
 (dischi per rifinitura),  
 1x GC RELINE II Remover for Resin  
 Accessori

#### Ricambi

010265 GC RELINE II Soft Cartuccia, 48 ml  
 010268 GC RELINE II Extra Soft Cartuccia, 48 ml  
 010273 GC RELINE II Primer for Resin, 10 ml  
 010271 GC RELINE II Finishing Material (Modifier)  
 1-1 Pack, 2x 9ml  
 010275 GC RELINE II Remover for Resin, 5,5 ml  
 010277 GC RELINE II Point for Trimming x 3  
 (punte per sgrossatura),  
 010280 GC RELINE II Wheel for Finishing x 12  
 (dischi per rifinitura),  
 010283 GC RELINE II Disposable Brush x 6  
 (pennelli monouso)

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 http://www.gceurope.com

**GC ITALIA S.r.l.**  
 Via Calabria 1  
 I-20098 San Giuliano Milanese  
 Tel. +39.02.98.28.20.68  
 Fax. +39.02.98.28.21.00  
 info@italy.gceurope.com  
 http://italy.gceurope.com

