



# Dopasowanie i komfort dla aktywnego życia



RELIN<sup>™</sup> II Soft &  
RELIN<sup>™</sup> II Extra Soft  
z GC

Miękkie silikonowe  
materiały do podścielen  
dostępne w nabojach

**GC**

# Dopasowanie, funkcjonalność i komfort dla beztróskiego uśmiechu

Podrażnienia, ekstrakcje czy też zabiegi implantacji prowadzą do zmian w tkankach miękkich i twardych. **Powoduje to konieczność adaptacji protez do nowych warunków.**

Obecnie pacjenci w starszym wieku dłużej zachowują dobry stan zdrowia i mogą prowadzić aktywny tryb życia. Chcą przy tym zachować możliwość uśmiechania się i dobrej wymowy, a także czerpać przyjemność z jedzenia, nawet wtedy, gdy użytkują protezy.

**Reline II Soft i Extra Soft z GC** został opracowany z myślą o tym, aby wytworzyć delikatną warstwę pomiędzy protezą a błoną śluzową, która **wspomaga gojenie, zapewni komfort i funkcję** przez okres wielu tygodni a nawet miesięcy.



Zdjęcia dzięki uprzejmości dr. Garcia-Baeza, Hiszpania

## Łatwe do nałożenia silikonowe podścielenie dostępne w naboju

Idealna lepkość materiału sprawia, że **upłynnia się pod wpływem nacisku**, a tym samym **optymalnie dostosowuje się** do wszystkich szczegółów anatomicznych.

Jego ulepszona **podatność na przycinanie** sprawia, że ostateczne wykończenie krawędzi podścielenia jest teraz jeszcze łatwiejsze.



Ulepszona podatność na przycinanie zapewnia lepsze wykończenie krawędzi podścielenia

## Długotrwały komfort i przyjemna ulga dla Twoich pacjentów

Reline II nie powoduje wzrostu temperatury w trakcie wiązania, co oznacza większy komfort dla pacjentów.

Materiał pozostaje **gładki i bezwonny** oraz utrzymuje **stabilność wymiarów i elastyczność** przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. **Trwałe i wygodne rozwiązanie** dla pacjentów użytkujących protezy.



Dzięki materiałowi wykończeniowemu Reline II - Finishing krawędzie mogą być jeszcze lepiej chronione

## Silna adhezja przy jednoczesnej łatwości w utrzymaniu i adaptacji

Udoskonalona formuła **primera GC Reline II do żywicy** zapewnia **silną adhezję do protezy** na długi czas. Ta silna adhezja nie sprawia jednak, że staje się ona mniej elastyczna.

**W ciągu 3 miesięcy** od pierwszej aplikacji **materiał można dodawać**, aby dopasować protezę do zmian zachodzących w błonie śluzowej i kości. Nowy środek **GC Reline II Remover do żywicy** umożliwia usunięcie warstwy podścielenia i szybkie zastąpienie go nowym.



**GC RELINE II Primer do żywicy**




**GC RELINE II Remover do żywicy**

# w każdej sytuacji i w każdym wieku

Od większej wytrzymałości po większą elastyczność:  
wybierz produkt, który najlepiej pasuje do danej sytuacji klinicznej

**GC RELINE™ II Extra Soft** posiada twardość 32 w skali A Shore'a i jest materiałem sprężystym. Jest to szczególnie istotne, gdy celem jest **normalizacja** podrażnionych tkanek i **wspomaganie procesu gojenia** po zabiegu ekstrakcji czy implantacji. Może być pozostawiony na **kilka dni, a nawet tygodni**.

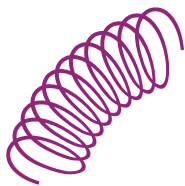

**GC RELINE™ II Soft** posiada twardość 48 w skali A Shore'a i nie traci elastyczności z upływem czasu działając jak **amortyzująca poduszka, która powoduje rozkład obciążeń** w przypadku problemów z anatomią podłoża. Jest to materiał idealny do podścielenia **protez wspartych na implantach** po zakończonej fazie gojenia. Może być pozostawiony na **kilka tygodni, a nawet miesięcy**.



## Prosta aplikacja i sposób pracy w trakcie całej procedury



Początkowy wygląd protezy, która ma być podścielona po wprowadzeniu czterech implantów.



Należy zredukować obszar, który ma zostać podścielony i zmatowić powierzchnię.



Nanosimy GC RELINE II PRIMER na obszar wymagający podścielenia. Delikatnie osuszamy powietrzem.



W łatwy sposób aplikujemy materiał z naboju.



Nanosimy GC RELINE II (Extra) Soft. Czas pracy wynosi 2 minuty.



Umieszczamy protezę w ustach i polecamy wykonanie ruchów czynnościowych. Pozostawiamy w miejscu przez 5 minut.



Usuwamy nadmiary za pomocą skalpela lub nożyczek. Przycinamy używając ostrza do skrawania GC RELINE II POINT FOR TRIMMING.



Kończymy procedurę tarczą polerską GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING.



Podścielona proteza.

# RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

## Dopasowanie i komfort - dla aktywnego życia

Odkryj całą rodzinę materiałów do podścielen z GC



|                   | GC TISSUE CONDITIONER  | GC RELINE II Extra Soft  | GC RELINE II Soft  | GC RELINE P/L   |
|-------------------|--|--|--|---|
| Materiał          | Akryl  | Silikon-A  | Silikon-A  | Akryl<br>(nie zawiera MMA)  |
| Wskazania         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Punkty uciskowe</li> <li>Zabiegi implantologiczne</li> <li>Miękkie podścielenie</li> <li>Regeneracja tkanek miękkich po urazie/zabiegu</li> <li>Wyciski czynnościowe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiał działający tonizująco na tkanki</li> <li>Wrażliwa błona śluzowa</li> <li>Punkty uciskowe</li> <li>Normalizacja podrażnionych tkanek</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prace na implantach</li> <li>Punkty uciskowe</li> <li>Podcienie w tkance kostnej</li> <li>Zmniejszenie dolegliwości bólowych i zwiększenie komfortu</li> <li>Długoczasowe podścielenie przy braku tkanek podporowych</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Długoczasowe podścielenie</li> <li>Niepasujące protezy bez urazu tkanek</li> <li>Jako ostateczny etap po podścieleniu miękkimi materiałami podścielającymi i/lub do kondycjonowania tkanek miękkich</li> </ul> |
| Okres użytkowania | Dni/tygodnie/miesiąc   | Dni/tygodnie   | Tygodnie/miesiące  | Miesiące/lata   |

### Dostępne opakowania Reline II Soft & Extra Soft

#### Zestaw Intro

010259 **GC RELINE II Soft Zestaw Intro:**  
 1x GC RELINE II Soft nabój  
 1x GC RELINE II primer do żywicy  
 1x GC RELINE II ostrze do skrawania  
 1x GC RELINE II tarcza polerska  
 1x GC RELINE II środek do usuwania do żywicy

010262 **GC RELINE II Extra Soft Zestaw Intro:**  
 1x GC RELINE II Extra Soft nabój  
 1x GC RELINE II primer do żywicy  
 1x GC RELINE II ostrze do skrawania  
 1x GC RELINE II tarcza polerska  
 1x GC RELINE II środek do usuwania do żywicy

#### Uzupełnienia

010265 GC RELINE II Soft nabój, 48 ml  
 010268 GC RELINE II Extra Soft nabój, 48 ml  
 010273 GC RELINE II primer do żywicy, 10 ml  
 010271 GC RELINE II materiał do wykańczania (modyfikator), opakowanie 1-1, 2x 9 ml  
 010275 GC RELINE II środek do usuwania do żywicy, 5,5 ml  
 010277 GC RELINE II ostrze do skrawania x 3,  
 010280 GC RELINE II tarcza polerska x 12,  
 010283 GC RELINE II pędzelek jednorazowy x 6

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE Spółka Akcyjna**  
 Przedstawicielstwo w Polsce  
 ul. Królowej Jadwigi 325B  
 PL - 30-234 Kraków  
 Tel. +48.12.425.14.74  
 Fax. +48.12.625.28.60  
 poland@eoo.gceurope.com  
 www.eoo.gceurope.com

