

# RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

## Adaptare și confort pentru o viață activă



Descoperiți familia completă de materiale de căptușire de la GC



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Material	Rășină acrilică	Silicon A	Silicon A	Rășină acrilică (Fără MMA)
Indicații	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puncte de presiune</li> <li>În timpul procedurilor cu implante</li> <li>Căptușire rezilientă</li> <li>Refacerea țesutului după traume/chirurgie</li> <li>Amprente funcționale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material de refacere a țesutului</li> <li>Sensibilitatea mucoasei</li> <li>Puncte de presiune</li> <li>Normalizarea țesuturilor iritate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implante</li> <li>Puncte de presiune</li> <li>Praguri osoase</li> <li>Diminuarea durerii &amp; sporirea confortului</li> <li>Căptușire de lungă durată în cazul lipsei țesutului de suport</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Căptușire de lungă durată</li> <li>Proteze neadaptate fără traume a țesutului</li> <li>Etapă finală după pre-tratamentul cu materiale de căptușire reziliente și/sau condiționante tisulare</li> </ul>
Timp în cavitatea orală	Zile/săptămâni/Luni	Zile/săptămâni	Săptămâni/Luni	Luni/ani

### Pachete Reline II Soft & Extra Soft disponibile

#### Intro Kit

- 010260 **GC RELINE II Soft Intro Kit** EEP:  
 1x GC RELINE II Soft, Cartuș  
 1x GC RELINE II Primer for Resin  
 1x GC RELINE II Point for Trimming  
 1x GC RELINE II Wheel for finishing  
 1x GC RELINE II Remover for Resin
- 010263 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit** EEP:  
 1x GC RELINE II Extra Soft, Cartuș  
 1x GC RELINE II Primer for Resin  
 1x GC RELINE II Point for Trimming  
 1x GC RELINE II Wheel for finishing  
 1x GC RELINE II Remover for Resin

#### Rezerve

- 010266 GC RELINE II Soft Cartuș, 48 ml EEP  
 010269 GC RELINE II Extra Soft Cartuș, 48 ml EEP  
 010273 GC RELINE II Primer for Resin, 10 ml  
 010271 GC RELINE II Finishing Material (Modifier), 1-1 Pack, 2x 9 ml  
 010275 GC RELINE II Remover for Resin, 5,5 ml  
 010277 GC RELINE II Point for Trimming x 3,  
 010280 GC RELINE II Wheel for Finishing x 12,  
 010283 GC RELINE II Disposable Brush x 6

GC EUROPE N.V.  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
 GCEEO Romania  
 Carol Davila 21 A, ap.5  
 050451, București  
 Tel: +40.31.425.75.27  
 Fax: +40.31.425.75.27  
 romania@eeo.gceurope.com  
 www.eeo.gceurope.com

# Adaptare și confort pentru o viață activă



RELINE™ II Soft &  
 RELINE™ II Extra Soft  
 de la GC

Materiale de căptușire din  
 silicon rezilient, livrate în cartuș



Z O LF 662 RO 04/17



# Adaptare, funcționalitate și confort pentru a zâmbi

Iritațiile, extracțiile sau implantele vor conduce la modificări ale țesuturilor moi și dure și **va fi nevoie de adaptarea lucrărilor protetice la noile condiții din cavitatea orală.**

Datorită faptului că pacienții în vârstă devin mai sănătoși și rămân activi mai mult timp, doresc să își păstreze zâmbetul, capacitatea de a vorbi și plăcerea de a mânca în orice situație; chiar și atunci când poartă proteză.

**Reline II Soft și Extra Soft de la GC** a fost conceput pentru a crea un strat rezilient între proteză și mucoasă fapt ce va **ajuta vindecarea și va menține confortul și funcționalitatea** timp de mai multe săptămâni și până la câteva luni.



Imagini prin amabilitatea Dr. Garcia-Baeza, Spania

Un liner din silicon ușor de aplicat, livrat în cartuș

Vâscozitatea ideală a materialului îl face **fluid sub presiune, adaptându-se** perfect la toate detaliile anatomice.

Capacitatea îmbunătățită de ajustare face ca finisarea finală a marginilor să fie și mai simplă.

Confort de lungă durată și suport oferit pacienților dumneavoastră

Cu Reline II, temperatura nu va crește în timpul prizei, oferind astfel un confort sporit pacienților dumneavoastră.

Materialul rămâne neted și inodor și își menține stabilitatea dimensională și elasticitatea timp de săptămâni sau chiar luni. Rezultatul? O soluție durabilă & convenabilă pentru pacienții cu lucrări protetice.

Adeziune puternică dar ușor de menținut și adaptat

Compoziția îmbunătățită a materialului **GC RELINE II Primer for resin** oferă o **adeziune puternică la lucrarea protetică** pentru mai mult timp. Totuși, această adeziune puternică nu diminuează flexibilitatea.

Puteți **adăuga material timp de 3 luni** de la prima aplicare pentru a adapta lucrarea la modificările mucoasei și osului. Noul **GC RELINE II Remover for resin** face posibilă îndepărtarea stratului de silicon și înlocuirea sa foarte rapidă.



Capacitate îmbunătățită de ajustare pentru o mai bună finisare a marginilor



Protecția marginilor cu Reline II material de finisare



**GC RELINE II Primer for resin**




**GC RELINE II Remover for resin**

Imagini prin amabilitatea Dr. Seifert, Croatia

# mereu în orice situație

De la reziliență la elasticitate: alegeți produsul adecvat situației clinice

Cu o duritate de 32 (Shore A), **GC RELINE™ II Extra Soft** este un material rezilient. Este indicat în special pentru **normalizarea** țesutului iritat și **promovarea vindecării țesutului** după extracții sau chirurgie implantară. Își menține poziția timp de câteva **zile sau săptămâni**.

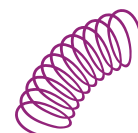

Cu o duritate Shore A de 48, **GC RELINE™ II Soft** își va menține elasticitatea în timp și, similar cu un **amortizor de șoc**, va **dispersa presiunea forței masticatorii** în cazul problemelor anatomice. Este ideal, de asemenea, pentru **căptușirea protezelor cu suport pe implantate** după etapa de vindecare. Își menține poziția timp de câteva **săptămâni sau luni**.



Aplicare & manipulare simple pe tot parcursul procedurii



Proteză inițială ce necesită căptușire, după aplicarea a 4 implantate.



Creați retenții în zonele care trebuie căptușite.



Aplicați GC RELINE II Primer pe zona ce va fi căptușită. Uscăți blând cu aer.



Livrare simplă în cartuș.



Aplicați GC RELINE II (Extra) Soft. Timp de lucru 2'00".



Poziționați proteza în cavitatea orală și realizați mișcările funcționale. Mențineți in situ timp de 5'00".



Îndepărtați excesul utilizând un bisturiu sau o foarfecă. Adaptați cu GC RELINE II POINT FOR TRIMMING.



Finalizați cu GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING.



Proteză căptușită.