

RELINTM II Soft & RELINTM II Extra Soft

Prilagoditev in udobje za aktivno življenje



Odkrijte kompletno družino GC materialov za podlaganje



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Material	Akrilni resin	A-silikon	A-silikon	Akrilni resin (brez MMA)
Indikacije	<ul style="list-style-type: none"> Točke pritiska Med postopki vstavitve implantatov Mehko podlaganje Celjenje tkiv po travmi/operacijah Funkcijski odtisi 	<ul style="list-style-type: none"> Material za toniranje tkiva Občutljiva sluznica Točke pritiska Normaliziranje vzdraženih tkiv 	<ul style="list-style-type: none"> Klinični primeri implantatov Točke pritiska Kostni podvisi Zmanjšanje bolečine & povečanje udobja Dolgotrajno podlaganje v primerih izgube podpornih tkiv 	<ul style="list-style-type: none"> Dolgotrajna podlaganja Proteze, ki se ne prilagajajo in ne povzročajo travme na tkivih Končni korak po podlaganju z mehкими materiali in/ali tkivnimi kondicionerji
Čas v ustih	Dnevi/tedni/meseci	Dnevi/tedni	Tedni/meseci	Meseci/leta

Na voljo v paketih Reline II Soft & Extra Soft

Intro set

010260 **GC RELINE II Soft Intro Kit** EEP:
 1x GC RELINE II kartoše Soft
 1x GC RELINE II Primer za resin
 1x GC RELINE II konice za oblikovanje
 1x GC RELINE II kolo za končno oblikovanje
 1x GC RELINE II odstranjevalec resina

010263 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit** EEP:
 1x GC RELINE II kartoše Extra Soft
 1x GC RELINE II Primer za resin
 1x GC RELINE II konice za oblikovanje
 1x GC RELINE II kolo za končno oblikovanje
 1x GC RELINE II odstranjevalec resina

Refill

010266 GC RELINE II Soft kartoša, 48 ml EEP
 010269 GC RELINE II Extra Soft kartoša, 48 ml EEP
 010273 GC RELINE II Primer za Resin, 10 ml
 010271 GC RELINE II material za končno oblikovanje (Modifier), 1-1 paket, 2x 9 ml
 010275 GC RELINE II odstranjevalec resina, 5,5 ml
 010277 GC RELINE II konice za oblikovanje x 3,
 010280 GC RELINE II kolo za končno oblikovanje x 12
 010283 GC RELINE II ščetke za enkratno uporabo x 6

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Slovenia
 Ulica Talcev 1a
 SLO - 3310 Žalec
 Tel. +386.3.710.32.70
 Fax. +386.3.710.32.71
 slovenia@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

Prilagoditev in udobje za aktivno življenje



GC
 RELINTM II Soft &
 RELINTM II Extra Soft

Mehak silikonski material
za podlaganje v kartoši



Z O LF 662 SI 09/17



Prilagoditev, funkcija in udobje za širok nasmeh v vseh okoliščinah

Iritacije, ekstrakcije ali vstavitve implantatov vodijo do sprememb v mehkih in trdih zobnih tkivih zato **je potrebno snemne proteze prilagoditi tem novim lokalnim pogojem.**

Starejši pacienti so vse bolj zdravi in dlje časa ostajajo aktivni zato se hočejo še naprej vsakodnevno smejati, govoriti in uživati v hrani, četudi nosijo snemne proteze.

GC Reline II Soft in Extra Soft sta bila razvita, da ustvarita mehko plast med protezo in sluznico, ki bo **podpora celjenju, vzdrževanju udobja in funkcije** za več tednov do več mesecev.



Fotografije z dovoljenjem Dr. Garcia-Baeza, Španija

Enostaven za nanos silikonski material za podlaganje v kartušah

Idealna viskoznost materiala dovoljuje, da **teče pod pritiskom, se lepo adaptira** v vse anatomske podrobnosti.

Njegova **izboljšana sposobnost prerezovanja** napravi končno oblikovanje robov še dosti lažje.

Dolgotrajno udobje in nežna ublažitev za vaše paciente

Pri Reline II se temperatura med strjevanjem ne bo dvignila, kar poveča udobje vaših pacientov.

Material **ostane gladek in brez vonja** ter ohrani **dimenzijsko stabilnost in elastičnost** še tedne ali mesece. Rezultat?

Dolgotrajna in konvencionalna rešitev za paciente s snemnimi protezami.

Močna adhezija a vendar enostaven za vzdrževanje in adaptacijo

Izboljšana sestava **GC Reline II Primer za rezin** zagotavlja dolgotrajno **močno adhezijo na protezo**. Vendar ta močna adhezija ne pomeni, da je material kaj manj fleksibilen.

Po prvi aplikaciji lahko **v roku treh mesecev še dodajate material**, da se prilagaja na spremembe sluznice in kosti. Z novim **GC Reline II odstranjevalcem za rezin** je možno hitro odstraniti plast podložitve in jo nadomestiti z novo plastjo.



Izboljšana sposobnost prerezovanja za odlično končno oblikovanje robov



Zaščita robov z Reline II končnim materialom



GC RELINE II Primer za rezin




GC RELINE II Odstranjevalec za rezin

Fotografije z dovoljenjem Dr. Seifert, Hrvaška

Od prožnosti do elastičnosti: izberite izdelek, ki bo najbolj ustrezal vaši klinični situaciji

S trdoto 32 (po Shoreovi lestvici A) je **GC RELINE™ II Extra Soft** prožen material. Še posebno je v pomoč pri **normalizaciji** vzdraženega tkiva in **podpori pri celjenju tkiv** po ekstrakcijah ali vstavitvah implantatov. Na mestu ostane od nekaj dni do nekaj tednov.

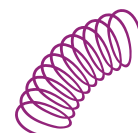

Po Shore-ovi lestvici A za merjenje trdote ima **GC RELINE™ II Soft** trdoto 48, a ohrani bo svojo elastičnost skozi čas in deloval **kot blažilec pritiskov in razporedil breme pritiska** na večje površine v primeru anatomskih problemov. Prav tako je idealen za podlaganje **implantatno nošenih protez** po fazi celjenja. Ostane lahko na mestu več **tednov ali mesecev**.



Enostavna aplikacija & rokovanje, skozi celoten postopek



Prejšna proteza, ki se bo podlagala, po vstavitvi 4 implantatov.



Osvobodite področje, ki se bo podlagalo in naredite površino grobo.



Nanesite GC RELINE II PRIMER na področja, ki jih boste podlagali. Nežno osušite z zrakom.



Enostavno rokovanje s kartušo v pištoli.



Nanesite GC RELINE II (Extra) Soft. Delovni čas je 2 minuti.



Vstavite protezo v usta in s sluznico oblikujte rob. Pustite na mestu 5 minut.



Odstranite viške z uporabo skalpela ali škarij. Odstranjujte s KONICAMI GC RELINE II.



Končno oblikovanje z GC RELINE II KOLO ZA KONČNO OBLIKOVANJE.



Vstavite protezo.