

医療ホワイトニング
TiON[®]

ティオン総合カタログ



Since 1921
100 years of Quality in Dental

ティオン オフィス / ティオンライト
ティオン ホーム ウィズ / ティオン ホーム プラチナ



医療ホワイトニングとは



歯科医療機関で



歯科医師・歯科衛生士^{※1}が


※1 歯科衛生士は歯科医師の指導のもと
医療ホワイトニング行為を実施



医療機器製品^{※2}を用いて

※2 過酸化水素または過酸化尿素含有製品/光照射器

歯の内部まで白くするホワイトニングです。

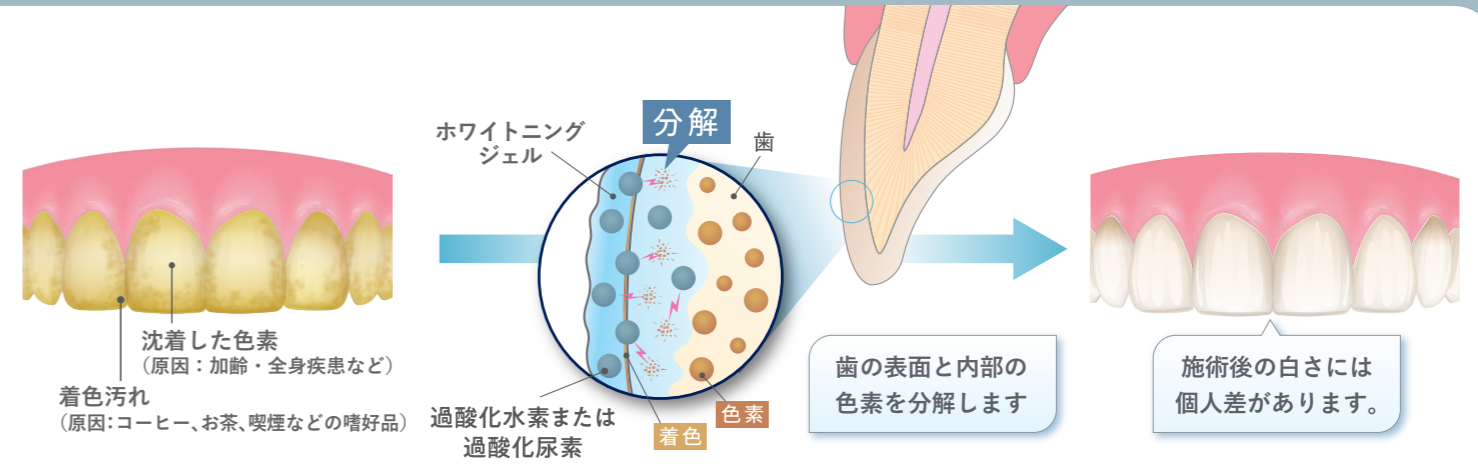

医療ホワイトニング・製品情報の詳細はコチラ



医療ホワイトニング ティオン[®]は患者さんに合わせた提案ができます。

オフィスホワイトニング

歯科医療機関で行うホワイトニング。
歯の表面にホワイトニングジェルを塗布し、
光照射によりホワイトニング効果を促進させます。



ホームホワイトニング

ご自宅などで行うホワイトニング。
患者さんの歯列に合わせて作製したマウストレーと
ホワイトニングジェルを用いて歯を徐々に白くします。



歯肉・粘膜保護 リアクター塗布 ホワイトニングジェル塗布 光照射 歯面清掃



マウストレーの作製 ホワイトニングジェルの注入 マウストレーの装着 マウストレーの取り外しと清掃 経過の確認

ティオン オフィス 過酸化水素濃度 35%
過酸化尿素濃度 30% 混和 過酸化水素濃度 約23%

成分

ティオン ホーム
ウィズ ● 過酸化水素6%
(過酸化尿素約17%相当)

ティオン ホーム
プラチナ ● 過酸化尿素10%

時間

- 施術時間: 約1~2時間 (1回の施術で最長3サイクル行う)
- 1回の施術で歯を白くする

ティオン ホーム
ウィズ ● 時間: 標準60分 (最長90分)
● 回数: 10回 (10日間)

ティオン ホーム
プラチナ ● 時間: 最長120分
● 回数: 14回 (14日間)

特徴

- 1回で効果が得られる
- ホームホワイトニングよりも後戻りしやすい

- 時間をかけることで白さが長持ちする
- オフィスホワイトニングよりも効果を得るまでに時間がかかる

おすすめ
の方

- 早く歯を白くしたい方 (例: 結婚式を間近に控えている方など)
- マウストレーを装着できない方 (例: 顎位が不安定、嘔吐反射があるなど)

- 自分のペースで歯を白くしたい方
- 片顎のみ白くしたい方

オフィスホワイトニング

ティオン オフィス

低刺激で高いホワイトニング効果

過酸化水素濃度 35%
過酸化尿素濃度 30%
混合
過酸化水素濃度
約23%



豊田中央研究所が開発した
可視光応答型光触媒

V-CAT®のはたらき


光照射されると電子を放出し、過酸化水素と反応することで多くのヒドロキシラジカルが発生するため、着色物質を効率よく分解します。

臨床試験の結果


治験の概要 72名の変色歯を有する成人を対象に、本品を用いて漂白処置を行い、その安全性と有効性の評価を行った。治験の結果について、下記に示す。

- **安全性** 漂白処置中、漂白処置直後及び漂白処置から1週間後に問診・口腔内検査を行うことにより、安全性を評価した。その結果、有害事象として歯肉の白変が11症例、軽度の副作用(唇が乾燥してヒリヒリした)が1症例認められた。
 - 副作用なし: 71症例
 - 歯肉の白変: 11症例
 - 軽度の副作用: 1症例(乾燥により唇がヒリヒリした)
- **有効性** 漂白前後の歯の色を、明度順に並べたVITAPAN classical シェードガイドを用いてシェードテイキングを行い、その明度の差により有効性を評価した。その結果、全ての症例において歯の色調は改善され、漂白効果が認められなかった症例及び色調が暗くなった症例はなかった。
 - 3シェード以上改善: 57症例
 - 1~3シェード改善: 15症例

ティオン オフィス (V-CAT®応用) の効果

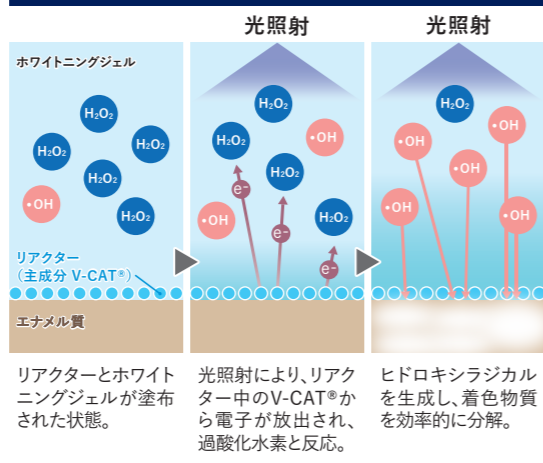

光触媒なし

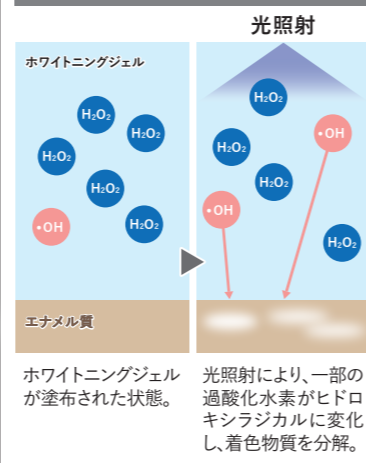


ティオンライト

オフィスホワイトニングのチェアタイムを短縮

Quickモード

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。

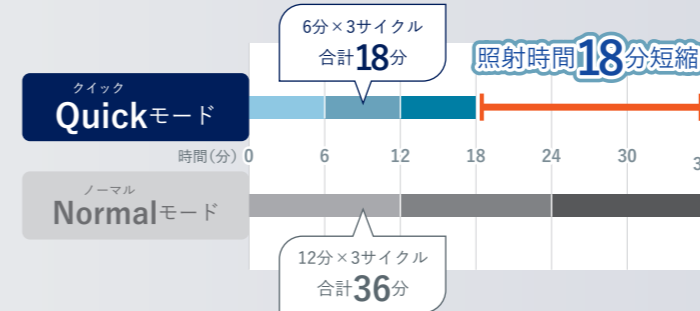


照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	
NEW レジン Resin	20秒	歯肉保護レジンの硬化に
NEW クイック Quick	6分	短時間でやりたいケースに
ノーマル Normal	12分	通常モード
ロー Low	12分	知覚過敏症状が心配なケースに


※Resin, Quickは自社従来品からの追加

照射光の波長域

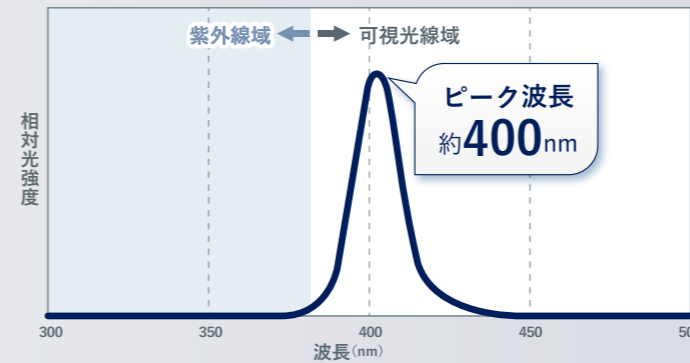


Resinモード

コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。

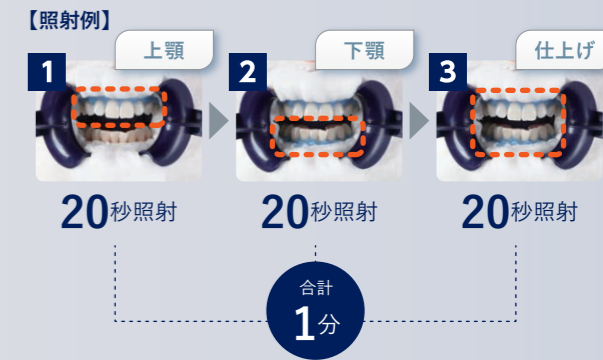

安全な光波長域で反応

一般的に、二酸化チタン光触媒は紫外線域の光にしかほとんど反応しませんが、V-CAT®(可視光応答型光触媒)は二酸化チタンの酸素の一部が窒素に置換されることで、可視光線域の光にも充分反応するため、歯科用照射器を用いたオフィスホワイトニングへの応用が可能となりました。

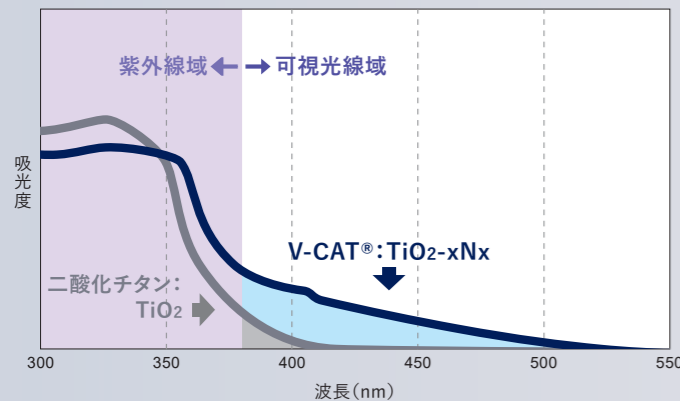

安全に使えるシステム

歯肉保護レジンにより、ホワイトニングジェルの歯肉への付着を防ぎます。また、ホワイトニングジェルはシリンジAとシリンジBを接合して混合し、ディスプレイファイバー付きチップから直接塗布できるため、安全にお使いいただけます。



歯科用オフィスホワイトニング ティオン オフィス

包装
1函: オフィスホワイトニング材 シリンジA(1.0g) 1本、オフィスホワイトニング材 シリンジB(1.0g) 1本、リアクター(2.0g) 1本、歯肉保護レジン(1.5g) 1本、ディスプレイファイバー 1個、ディスプレイファイバーブラシ 2本、ディスプレイファイバー付きチップ 2個

単品包装

歯肉保護レジン
包装●1函: 1.5g 1本

歯科用漂白材 ティオン オフィス
高度管理医療機器 22200BZX00785000

要冷蔵 医薬用外劇物

関連製品



歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器) ティオンライト

包装
本体1台、マウスガード(ティオンライト用) 2個(本体装着+付属)、保護メガネ(オーバークラスタイプ) コスモブルー/ティオンライト用 2個、六角レンチ(大) (小) 各1個、電源コード 1本

単品包装

保護メガネ(オーバークラスタイプ)
コスモブルー/ティオンライト用
包装●1個

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000312

仕様



電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸法	本体高さ 1,550mm ベース部 510mm×430mm
重量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光源	5Wタイプ紫LED×5灯
出力ピーク波長	395~410nm
照射時間	10秒~20分
照射範囲	横70mm×縦30mm

ホームホワイトニング

ティオンホームの特長


有効成分が効率よく歯面に浸透

ジェルが水となじみやすく、有効成分が歯面に浸透しやすいため、効率よくホワイトニング効果を発揮します。

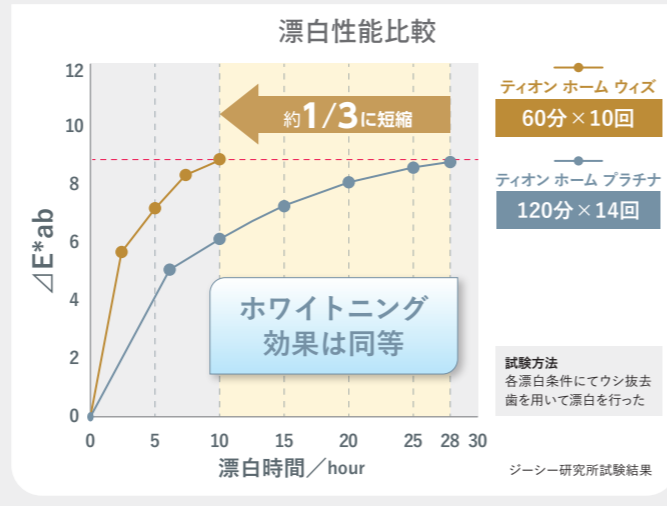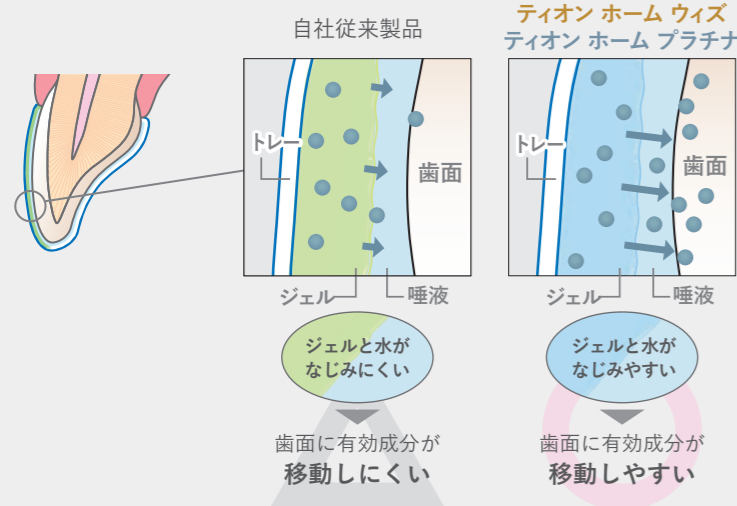

水に溶けにくく歯面に留まる

水に強く唾液に溶けにくいジェルが、歯面にムラなく広がり密着して留まるため、最後まで有効成分が作用します。

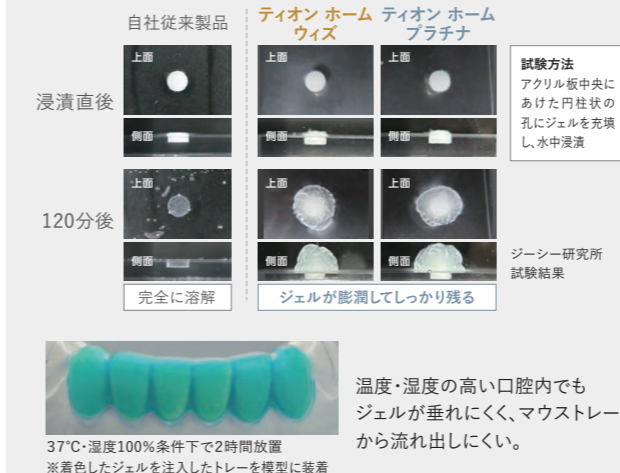

確認しやすい白色ジェル

ジェルがトレーからあふれ出た場合も、患者さんご自身が目で確認できるため、すぐにジェルを拭き取ることが可能です。




ティオンホーム ウィズ

高濃度で効率よくスピードホワイトニング

標準60分[※]×10日間

有効成分濃度が高い!

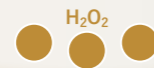

過酸化水素がダイレクトに漂白

※最長90分


すき間時間を活用したい方



ティオンホーム プラチナ

低濃度でじっくりマイルドホワイトニング

最長120分×14日間

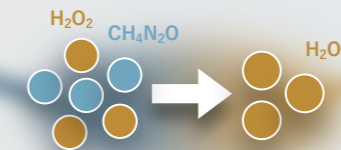

過酸化尿素が過酸化水素と尿素に分解

過酸化水素が漂白

知覚過敏症状に対して不安がある方



ホワイトバンド・ホワイトスポットを気にされている方

※早く白くなる方法では、一時的に目立ちやすくなる場合があります。



ティオンホーム共通



歯科用ホームホワイトニング
ティオンホーム ウィズ

包装●
スターターキット 1函：ホームホワイトニング材(1.8mL) 4本、トレーシート2枚、トレーケース 1個、シェードガイド1枚、ペーパーバッグ 1袋

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
ティオン ホーム ウィズ
高度管理医療機器
30600BZX00056000

要冷蔵



ティオンホーム ウィズ
リフィル(10本)

包装●
1袋：ホームホワイトニング材(1.8mL)2本

要冷蔵



ティオンホーム ウィズ
リフィル(10本)

包装●
1函：ホームホワイトニング材(1.8mL)1本入×10

要冷蔵



ティオンホーム ウィズ
リフィル(20本)

包装●
1函：ホームホワイトニング材(1.8mL)1本入×20

要冷蔵




ティオンホーム
トレーシート

包装●1函：10枚



ティオンホーム
トレーケース

包装●1函：10個

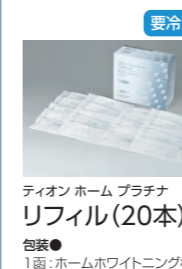

ティオンホーム プラチナ
リフィル(20本)

包装●
1函：ホームホワイトニング材(2.5mL)1本入×20

要冷蔵



ティオンホーム プラチナ
リフィル(10本)

包装●
1函：ホームホワイトニング材(2.5mL)1本入×10

要冷蔵



ティオンホーム プラチナ
2シリンジ

包装●
1袋：ホームホワイトニング材(2.5mL)2本

要冷蔵



歯科用ホームホワイトニング
ティオンホーム プラチナ

包装●
スターターキット 1函：ホームホワイトニング材(2.5mL) 4本、トレーシート2枚、トレーケース 1個、シェードガイド1枚、ペーパーバッグ 1袋

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
ティオン ホーム プラチナ
高度管理医療機器
22900BZX00205000

要冷蔵

歯面清掃に



フッ素入り歯面研磨ペースト ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト

香味●グリーンシトラス
内容量●80g
包装●1函:1本
歯面研磨材 ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト
一般医療機器 13B2X00124000003
製造販売元 日本ゼット株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



歯面清掃用カップ ジーシー PTCカップII

包装●1函:20個
歯磨カップ ジーシー PTCカップII
一般医療機器 13B1X00155000291

セルフケアに



薬用歯みがき類 医薬部外品 ルシェロ歯みがきペースト ホワイトプレミアムケア

【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイトP
香味●グリーンシトラス
内容量●100g
包装●1函:1本
包装・希望患者価格●1函:1本=¥2,200(税込)

※6歳未満の子供の手の届かないところに保管し、使用させない。

※本製品に配合している原料に由来してペーストが部分的に黄色く見える場合がございますが、品質に問題はございません。

製造販売元 日本ゼット株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

歯科医院用



歯ブラシ

ジーシー ルシェロ 歯ブラシ B-10/B-20 ピセラ/W-10

毛の硬さ●B-10、B-20=M(ふつ)、S(やわらかめ)
W-10=やわらかめ

包装●B-10 1函:20本(各色4本)
B-20 1函:20本(各色4本)
W-10 1函:6本(各色3本)

包装・希望患者価格●B-10 1本=¥390(税込)
B-20 1本=¥340(税込)
W-10 1本=¥450(税込)



ミネラル含有ペースト 化粧品 MIペースト


香味●5種:メロン、ストロベリー、バニラ、ヨーグルト、ミント
内容量●40g(35mL)
包装●

各フレーバー 1函:1本
イントロダクトリーセット 1函:3本(ストロベリー/ヨーグルト/ミント)
アソートセット 1函:10本(各フレーバー2本)

包装・希望患者価格●1函:1本=¥1,780(税込)

※本製品には牛乳由来成分(カゼイン)及びバラベンが含まれておりますので、牛乳由来成分(カゼイン)及びバラベンに対してアレルギーを持つ方は使用しないでください。

CPP-ACP(リカルデント™)を配合した歯のクリーム

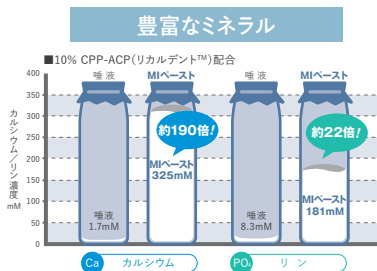


口腔内の環境を整える



CPP-ACP(リカルデント™)とは?



牛乳由来タンパク質の分解物であるカゼインホスホペプチド(CPP)と非結晶性リン酸カルシウム(ACP)の複合体。

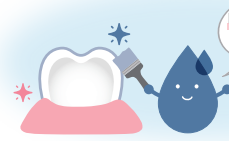

ブリリカピアンコ

包装●
パッケージ:本体1台、コントローラ1台、お知らせ受信機1台、ブリリカ用開口器S/SS各1個、保護めがね1個、収納袋1個、院内掲示用パネル、患者様用リーフレット50部、口唇・口腔シート化粧品リップリー1函10枚入

歯面漂白用加熱装置 ブリリカ ピアンコ
一般医療機器 特定保守管理医療機器 14B2X00036000008
発売元 株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13
製造販売元 株式会社東京技研横浜工場 横浜市都筑区東山田4-42-37

歯科用開口器 口角鉤 ダブルワイダー
一般医療機器 11B1X1000650D205
発売元 株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13
製造販売元 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28

※掲載情報は2024年9月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文または使用上の注意事項をお読みください。

発売元 株式会社 ゴーシー / 製造販売元 株式会社 ゴーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連沼町7番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。